



HAL
open science

**Mise en place du contrôle terminal des préparations
d'anticancéreux injectables par spectrométrie
UV-visible-IRTF, Multispec® à l'Unité de Pharmacie
Clinique et Cancérologique de l'Hôpital Bon Secours de
Metz : aspects analytiques et organisationnels**

Alexandra Camut

► **To cite this version:**

Alexandra Camut. Mise en place du contrôle terminal des préparations d'anticancéreux injectables par spectrométrie UV-visible-IRTF, Multispec® à l'Unité de Pharmacie Clinique et Cancérologique de l'Hôpital Bon Secours de Metz : aspects analytiques et organisationnels. Sciences pharmaceutiques. 2009. hal-01738900

HAL Id: hal-01738900

<https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01738900v1>

Submitted on 20 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie.

Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l'utilisation de ce document.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale.

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10

http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php

<http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm>

2009

FACULTE DE PHARMACIE

MEMOIRE
du DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES
de
PHARMACIE HOSPITALIERE ET DES
COLLECTIVITES

Soutenu devant le Jury Interrégional

Le 6 novembre 2009

Par Melle Alexandra CAMUT
née le 07 mars 1981

Conformément aux dispositions de l'arrêté

du 4 octobre 1988 tient lieu de

THESE
Pour le DIPLOME D'ETAT
De DOCTEUR en PHARMACIE

Mise en place du contrôle terminal des préparations d'anticancéreux injectables par spectrométrie UV-visible-IRTF, Multispec® à l'Unité de Pharmacie Clinique et Cancérologique de l'Hôpital Bon Secours de Metz : Aspects analytiques et organisationnels.

Membres du Jury

Président : Docteur Stéphane Gibaud, Maître de Conférences
Pharmacien Praticien Hospitalier

Juges : Docteur Véronique Noirez, Pharmacien Praticien Hospitalier
Docteur Denis Brossard, Professeur, Pharmacien Praticien Hospitalier
Docteur Jean Vigneron, Pharmacien Praticien Hospitalier

« LA FACULTE N'ENTEND DONNER AUCUNE
APPROBATION, NI IMPROBATION AUX
OPINIONS EMISES DANS LES THESES, CES
OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES
COMME PROPRES A LEUR AUTEUR ».

Remerciements

Je remercie Mr S.Gibaud, Mr D.Brossard et Mr J.Vigneron d'avoir accepté de participer à mon jury de mémoire de fin d'Internat.

Je remercie Mr Gustin de m'avoir accueillie dans son service durant ma première et dernière année d'internat, ainsi que toute l'équipe de pharmaciens et de préparateurs pour leur accueil, leur gentillesse, leur générosité dans le partage de leur expérience.

Je remercie plus particulièrement toute l'équipe de l'Unité de Pharmacie Clinique et Cancérologique (Mme Khalife, Mme Celli, Mme Burtin, Melle Toulouse, Melle Nicolai, Melle Schumacher, Mr Weisse) où j'ai réalisé ce travail, pour l'année que nous avons passée ensemble, et j'en suis très heureuse, pour les années à venir.

Je remercie Mr Leynia et Mme Devys du centre Paul Papin d'Angers pour m'avoir accueillie en formation et pour m'avoir guidée au début de mon travail sur le Multispec® ainsi que Mr Vigneron pour sa gentillesse et sa disponibilité lors des premières questions techniques difficiles et ses conseils avisés.

J'adresse mes sincères remerciements à Mme Véronique Noirez, qui m'a formée à mon métier de pharmacien, de mon stage d'externe à aujourd'hui, pour ses qualités personnelles et pour la richesse de son enseignement. Je la remercie de m'avoir confié ce projet et de m'avoir accordé sa confiance au long de cette dernière année d'internat. Je suis fière d'avoir été son élève, et d'être imprégnée de sa manière de concevoir et d'exercer notre profession.

Je tiens à remercier toute ma famille, surtout mes parents pour leur affection, leurs encouragements et pour m'avoir permis de réaliser mes études dans les meilleures conditions, mon frère Vincent et ma sœur Julia pour leur présence, mes grands-parents, oreilles attentives et justes.

Je remercie Raphaël, pour sa patience, son soutien, pour nos moments partagés et nos projets communs. Merci enfin, à mes collègues internes avec qui j'ai vécu cette expérience, mes amis pour les bons moments passés ensemble.

Sommaire

REMERCIEMENTS	3
ABREVIATIONS	7
TABLE DES FIGURES	8
TABLE DES TABLEAUX	9
TABLE DES ANNEXES	9
INTRODUCTION	9
PREMIERE PARTIE	
LE CONTROLE ANALYTIQUE DES PREPARATIONS D'ANTICANCEREUX	12
I. LE CONTROLE DES PREPARATIONS D'ANTICANCEREUX	13
1.1. LES TEXTES DE REFERENCE	13
1.2. EXIGENCES FONDAMENTALES (BPP) :	13
1.3. LES DIFFERENTES METHODES DE CONTROLE DES PREPARATIONS.....	14
1.3.1. LES CONTROLES VISUELS.....	14
1.3.2. LES CONTROLES GRAVIMETRIQUES	14
1.3.3. LES CONTROLES ANALYTIQUES	15
II. LA SPECTROMETRIE	18
2.1. SPECTROPHOTOMETRIE D'ABSORPTION MOLECULAIRE UV-VISIBLE	18
2.1.1. DEFINITION	18
2.1.2. ASPECT QUALITATIF	19
2.1.3. SPECTRE UV-VISIBLE D'UNE MOLECULE.....	20
2.1.4. INTERET ANALYTIQUE DES SPECTRES D'ABSORPTION UV-VISIBLE	20
2.1.5. ASPECT QUANTITATIF	21
2.1.6. METHODES DE QUANTIFICATION	21
2.1.7. CHOIX DE LA LONGUEUR D'ONDE.....	23
2.1.8. APPAREILLAGE	23
2.2. SPECTROMETRIE MOLECULAIRE IR.....	24
2.2.1. DEFINITION	24
2.2.2. APPAREILLAGE	26
2.2.3. INTERET ANALYTIQUE DU SPECTRE IR	28
III. INTERETS ET PROBLEMATIQUES DU CONTROLE ANALYTIQUE	28
3.1. LE CYTOTOXIQUE RECONSTITUE : UNE PREPARATION A RISQUE.....	28
3.2. CRITERES D'UNE METHODE DE CONTROLE ANALYTIQUE IDEALE.....	28
3.3. VALIDATION D'UNE METHODE D'IDENTIFICATION ET DE DOSAGE.....	29
3.3.1. PRINCIPAUX REFERENTIELS	29
3.3.2. CRITÈRES DE VALIDATION	30

DEUXIEME PARTIE

MISE EN PLACE DU SYSTEME MULTISPEC® DE MICRODOM® A L'UPCC.....32

I. PRESENTATION DU MULTISPEC® (MICRODOM)..... 33

2.1. OBJECTIFS DE LA TECHNIQUE MULTISPEC®	33
2.2. DEFINITIONS DANS MULTISPEC®	33
2.3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UNE METHODE.MDB	34
2.3.1. L'IDENTIFICATION	34
2.3.2. LA QUANTIFICATION.....	35
2.3.3. L'AIGUILLAGE ENTRE LES DEUX ETAPES.....	36
2.4. UTILISATION DU MULTISPEC®	36

II. ETAPES PREALABLES A LA MISE EN PLACE DU MULTISPEC A L'UPCC..... 37

2.1. FORMATION INITIALE ET APPROPRIATION DE L'OUTIL	37
2.2. RECUEIL D'EXPERIENCES	37
2.2.1. IMPLANTATION DE LA TECHNIQUE ANALYTIQUE DANS LE CIRCUIT DE LA PREPARATION	38
2.2.2. APPORTS DU RECUEIL D'EXPERIENCE SUR LE PLAN ANALYTIQUE	40
2.3. PREPARATION DE L'ACTIVITE	41

III. ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DU SECTEUR UPCC..... 43

3.1. OBJECTIFS	43
3.2. MATERIELS.....	43
3.2.1 MANUEL UTILISATEUR DE MICRODOM.....	43
3.2.2. CAHIER DE PAILLASSE	43
3.2.3. QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES CONNAISSANCES	44
3.2.3. QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES SUPPORTS.....	44
3.3. METHODES.....	44
3.3.1. ÉVALUATION DES CONNAISSANCES.....	44
3.3.2. ÉVALUATION DES SUPPORTS.....	45
3.4. RESULTATS	45
3.4.1. QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DES CONNAISSANCES	45
3.4.2. ÉVALUATION DES SUPPORTS.....	48
3.5. LE DIAPORAMA DE FORMATION	49
3.5.1. PREMIERE PARTIE : « ACCUEIL ».....	50
3.5.2. BLOC FORMATION : « PRESENTATION GENERALE »	51
3.5.3. BLOC FORMATION : « PRESENTATION SYSTEME ».....	52
3.5.4. BLOC FORMATION : « DEVELOPPEMENT ».....	53
3.5.5. BLOC FORMATION : « PRESENTATION APPAREIL »	55
3.5.6. BLOC FORMATION : « PRESENTATION ROUTINE ».....	56
3.5.7. BLOC EVALUATION DES CONNAISSANCES	56
3.6. DISCUSSION.....	57

<u>TROISIEME PARTIE</u>	
<u>DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE DE CONTROLE DES PREPARATIONS DE</u>	
<u>CYTOSTATIQUES A L'UPCC.....</u>	59
<u>I. INTRODUCTION</u>	60
<u>II. MATERIELS ET METHODE.....</u>	61
1.1. MATERIELS POUR LA REALISATION DES GAMMES ETALONS	61
1.1.1. MULTISPEC	61
1.1.2. LOGICIEL CHIMIO®	61
1.1.3. ISOLATEUR.....	61
1.1.4. MICROPIPETTE	61
1.1.5. PETIT MATERIEL.....	61
1.1.6. PRODUITS.....	62
1.1.7. GRILLE EXCEL DE TRANSFERT ET D'INTERPRETATION DES RESULTATS	62
1.2. METHODES.....	63
1.2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES.....	63
1.2.2. GAMMES D'ETALONNAGE.....	64
2.1.3. ESTIMATION DES BIAIS DUS AUX MANIPULATIONS.....	66
2.1.4. DOSAGE DES PREPARATIONS DESTINEES AUX PATIENTS	66
<u>III. RESULTATS.....</u>	67
3.1. CLASSEUR « VALIDATION.XLS »	67
3.1.1. PREMIERE PARTIE « RECAPITULATIF IMPRIMABLE »	67
3.1.2. PARTIE UTILITAIRE DE CALCUL	68
3.1.3. PARTIE « IMPORTS »	68
3.2. VALIDATION DES GAMMES D'ETALONNAGE.....	69
3.3. ETUDE DES BIAIS LIES DUS AUX MANIPULATIONS	76
3.3.1. EVALUATION DU VOLUME DE SUREMPLISSAGE DES POUCHES UTILISEES POUR LES POUCHES-TEST DE CISPLATINE	76
3.3.2. EVALUATION DU BIAIS LIE A LA TECHNIQUE DE PURGE	77
3.4. DOSAGE DES PREPARATIONS DESTINEES AUX PATIENTS	79
3.4.1. CISPLATINE	79
3.4.2. CARBOPLATINE / OXALIPLATINE / 5-FLUOROURACIL (5FU)	79
3.4.3. DOXORUBICINE / PACLITAXEL / GEMCITABINE / TRASTUZUMAB	81
3.4.5. BILAN DES DOSAGES.....	82
<u>QUATRIEME PARTIE : BILAN, DISCUSSION, CONCLUSION</u>	84
<u>ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN PLACE DE LA TECHNIQUE AU SEIN DE</u>	
<u>L'UPCC.....</u>	85
<u>DISCUSSION.....</u>	89
<u>CONCLUSION.....</u>	96
<u>BIBLIOGRAPHIE</u>	96

Abréviations

PUI	Pharmacie à Usage Intérieur
DO	Densité Optique
UV	Ultra Violet
IR	Infrarouge
IRTF	Infrarouge à Transformée de Fourier
ZAC	Zone à Atmosphère Contrôlée
5FU	5-Fluorouracil

Table des figures

Figure 1 : Spectre électromagnétique de la lumière et domaine UV-visible.....	18
Figure 2 : Principe de la spectrophotométrie d'absorption moléculaire.....	19
Figure 3 : Principe d'une gamme d'étalonnage	22
Figure 4 : Principe d'un étalonnage par ajouts dosés.....	23
Figure 5 : Spectrophotomètre monofaisceau-multicanal ou à barrette de diodes (d'après [26])	24
Figure 6 : Spectre électromagnétique de la lumière et domaine IR (d'après [25]).....	25
Figure 7 : Schéma du spectrophotomètre à transformée de Fourier (IRFT) (d'après [26])	27
Figure 8 : Diapositives extraites du chapitre d'accueil, signification des icônes et sommaire principal	50
Figure 9 : Sommaire du chapitre de présentation générale.....	51
Figure 10 : Diapositives extraites du chapitre de présentation générale	51
Figure 11 : Sommaire du chapitre de présentation du système	52
Figure 12a : Diapositives extraites du chapitre de présentation du système.....	53
Figure 13b : Diapositives extraites du chapitre de présentation du système.....	53
Figure 14 : Sommaire du chapitre de formation à l'activité de développement	54
Figure 15 : Diapositives extraites du chapitre Développement : plan interactif et diapositive de niveau 1.....	55
Figure 16 : Diapositives extraites du chapitre Développement : diapositives de niveaux 2 et 3	55
Figure 17 : Sommaire du chapitre de formation sur l'appareil Multispec	56
Figure 18 : Sommaire du chapitre de formation sur l'activité de routine	56
Figure 19 : Sommaire du chapitre d'évaluation des connaissances.....	57
Figure 20 : Partie récapitulatif imprimable du tableau de résultat.....	68
Figure 21 : Partie utilitaire de calcul	68
Figure 22 : Import des résultats d'analyse obtenus avec Multispec®.....	69
Figure 23 : Imports des informations extraites de l'ordonnancier de Chimio®.....	69
Figure 24 : Explication des calculs de validation d'une gamme d'étalonnage	70
Figure 25 : Organisation des campagnes de dosages entre juin et septembre 2009.....	79

Table des tableaux

<i>Tableau I : compilation du recueil d'expérience, et du mode de fonctionnement des PUI du Centre Paul Papin d'Angers, et de l'Hôpital d'adultes de Brabois CHU de Nancy.</i>	38
<i>Tableau II : étapes de mise en place et de développement.</i>	41
<i>Tableau III : récapitulatif des documents pour l'assurance qualité</i>	42
<i>Tableau IV : évolution des acquis pour chacun des critères après la formation initiale et après la lecture du diaporama interne.</i>	46
<i>Tableau V : notation du Manuel Microdom et du diaporama interne pour chaque critère.</i>	48
<i>Tableau VI : étapes de développement.</i>	60
<i>Tableau VII : étalonnages de 5-Fluorouracil</i>	70
<i>Tableau VIII : étalonnage de carboplatine</i>	71
<i>Tableau IX : étalonnages d'oxaliplatine</i>	71
<i>Tableau X : étalonnage de cisplatine</i>	71
<i>Tableau XI : étalonnages d'étoposide.</i>	72
<i>Tableau XII : étalonnages de paclitaxel</i>	72
<i>Tableau XIII : étalonnage de gemcitabine</i>	73
<i>Tableau XIV : étalonnage de trastuzumab</i>	73
<i>Tableau XV : étalonnages de doxorubicine</i>	73
<i>Tableau XVI : étalonnages de cyclophosphamide.</i>	74
<i>Tableau XVII : étalonnage de rituximab</i>	74
<i>Tableau XVIII : étalonnage de vincristine</i>	74
<i>Tableau XIX : étalonnage de docétaxel</i>	75
<i>Tableau XX : étalonnages de cytarabine</i>	75
<i>Tableau XXI : évaluation du volume de suremplissage et du volume de purge.</i>	76
<i>Tableau XXII : résultats des dosages de poches-test de cisplatine</i>	77
<i>Tableau XXIII : répartition des écarts de dosage des poches de cisplatine.</i>	79
<i>Tableau XXIV : répartition des écarts de dosage des poches de carboplatine / oxaliplatine / 5FU.</i>	80
<i>Tableau XXV : répartition des écarts de dosage des poches de doxorubicine / paclitaxel / gemcitabine / trastuzumab/5FU</i>	81
<i>Tableau XXVI : feuille de route de ma mise en place de l'activité de dosage au sein de l'UPCC</i>	85
<i>Tableau XXVII : relevé des durées des différentes étapes de l'activité de dosage.</i>	88

Table des annexes

<i>Annexe 1 : Questionnaire d'évaluation des connaissances du Multispec®</i>	101
<i>Annexe 2 : Tableau récapitulatif de la validation des gammes d'étalonnages</i>	106

Introduction

Depuis 2003 et la mise en application du Plan Cancer, des structures pharmaceutiques spécialisées en cancérologie (pôle cancer) se sont développées. Un renforcement des moyens techniques et humains est intervenu au niveau des Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) qui centralisent l'activité de reconstitution des cytotoxiques afin d'en améliorer la qualité. Ainsi s'impose au pharmacien hospitalier concerné, une obligation de faire évoluer ses capacités de production. Il s'agit d'un véritable bouleversement orientant une activité initialement « artisanale » vers des développements optimisés qui la rapproche de l'industrie.

L'activité de reconstitution relève, sur le plan pharmaceutique et législatif, de la production magistrale, et elle peut donc être exempte de contrôle analytique du produit fini. Cependant la préparation magistrale qu'est le cytotoxique reconstitué possède sur le plan pharmaceutique un caractère unique qui la rend hautement spécifique : une molécule / une concentration / un conditionnement / un malade / un jour donné de chimiothérapie. Il faut ajouter à cela, l'index thérapeutique particulièrement étroit de ces médicaments.

Ainsi, en raison d'un cadrage strict en termes d'assurance qualité, le contrôle analytique de l'opération de reconstitution s'impose de plus en plus.

L'Unité de Pharmacie Clinique et Cancérologique (UPCC) de la pharmacie à usage intérieur de l'Hôpital Bon Secours (CHR de Metz-Thionville) a fait l'acquisition en septembre 2008 d'un spectromètre UV/visible et Infrarouge (Multispec®, Microdom, France). Cet appareil permet le contrôle analytique des préparations en identifiant le principe actif et le solvant de la préparation ainsi que la concentration. Le contrôle analytique des préparations, une fois réalisé en routine, permettra de sécuriser le circuit des préparations de chimiothérapie et d'améliorer le système d'assurance qualité du secteur.

Cependant, cette activité analytique est totalement nouvelle pour l'établissement qui ne dispose pas de laboratoire de contrôle au sein de la pharmacie. Toute l'étude de faisabilité, l'analyse des besoins, l'appropriation de la technique a été possible dans le cadre de ce travail de thèse, en parallèle de l'activité de production en routine.

Dans le cadre de cette année de développement et de tests, la problématique a consisté à se documenter sur le rationnel et la méthodologie des contrôles analytiques, de les appliquer au système Multispec® installé et de planifier la montée en charge des premiers contrôles à *posteriori* des poches de perfusion.

Dans la première partie nous décrirons les différentes méthodes analytiques de contrôle terminal des préparations, et les expériences publiées par d'autres équipes. Nous développerons davantage quelques rappels théoriques sur la spectrométrie, principe selon lequel fonctionne notre appareil.

Dans la deuxième partie, nous présenterons le système Multispec®. La compréhension du fonctionnement de ce système jusqu'à sa maîtrise complète a demandé un important travail d'autoformation. Nous retracerons les étapes suivies, les moyens utilisés, pour aboutir à un module de formation adapté à notre situation. Nous exposerons le travail préparatoire réalisé pour la mise en place et le déploiement de la technique : le recueil d'expérience auprès de nos confrères ayant déjà du recul dans leur activité de contrôle analytique, et la feuille de route que nous avons rédigé pour guider l'avancement du projet.

Le système Multispec® est prévu pour réaliser des dosages dès son installation car il contient toute la base de molécules et d'étalonnages nécessaires. Cependant, nous avons fait le choix de développer une méthode propre à notre établissement, adaptée à nos préparations.

Dans la troisième partie, nous expliquerons donc notre stratégie de développement des gammes d'étalonnage spécifiques de nos molécules, nous identifierons les difficultés, les biais et les voix de réflexions en exploration. Nous proposerons la planification adoptée pour les phases tests de dosages *à posteriori* des poches de perfusions. Nous présenterons enfin, les outils de travail que nous avons développés pour l'interprétation des résultats des dosages. A chacune de ces étapes, nous nous sommes attachés à faire émerger les difficultés rencontrées et à discuter des solutions correspondantes apportées ou de celles qui restent à approfondir.

PREMIERE PARTIE

Le contrôle analytique des préparations d'anticancéreux

I. Le contrôle des préparations d'anticancéreux

1.1. Les textes de référence

Le contexte réglementaire est très important pour le développement et le maintien en conformité de l'activité de préparation. Il se renforce encore lorsqu'il s'agit de préparations sensibles comme les anticancéreux, qui sont des produits à marge thérapeutique étroite, et qui nécessitent d'être préparés de manière stériles, tout en protégeant l'environnement.

L'article L.5126-5 du Code de la Santé Publique, décrit les rôles des PUI qui « comportent notamment la préparation, le contrôle (...) » [1]

Les bonnes pratiques de préparation 1.1.2. (BPP) insistent encore sur le contrôle des préparations : « Une préparation n'est entreprise que si la pharmacie possède les moyens appropriés spécifiques pour la réaliser et la contrôler » [2]

1.2. Exigences fondamentales (BPP) :

Les Bonnes Pratiques de Préparation énoncent les exigences suivantes :

- Les installations sont adaptées,
- Le personnel est qualifié et régulièrement formé aux activités de contrôle,
- Des procédures écrites sont disponibles pour l'échantillonnage, l'analyse des matières premières et des préparations terminées et, le cas échéant, pour la surveillance des paramètres de l'environnement,
- Les échantillons sont prélevés selon des méthodes approuvées,
- Le matériel est qualifié et les méthodes d'analyse sont validées,
- Des relevés sont établis manuellement et/ou par des appareils d'enregistrement,
- L'évaluation de la préparation terminée comporte un examen et une revue critique des documents de préparation, ainsi qu'une estimation concernant les déviations par rapport aux procédures écrites établies,
- Tout lot de préparation ne peut être libéré pour la dispensation que par un pharmacien et après que celui-ci se soit assuré qu'il répond aux spécifications requises,
- Des échantillons de référence des matières premières et des préparations terminées sont conservés, sauf exceptions justifiées, en quantité suffisante pour permettre un contrôle ultérieur si nécessaire (cf. chapitre 1.5.6).

Ces exigences vont constituer la base du projet d'intégration du contrôle analytique au sein de notre unité.

1.3. Les différentes méthodes de contrôle des préparations

On peut distinguer deux concepts : les contrôles en cours de préparation (ils peuvent être visuels, ou par contrôle gravimétrique) et les contrôles finaux analytiques. [3]

1.3.1. Les contrôles visuels

Ils consistent d'une part en un double contrôle des volumes, au regard du protocole et de la nature des produits utilisés lors de la préparation (préparateur) et du contrôle du produit fini (pharmacien) : contrôle des volumes, des fuites éventuelles, de la nature des produits utilisés (PA et solvants), de la présence d'éventuelles particules (par mirage), ou de bulles (seringues), et l'étiquetage.

L'avantage de ce type de double contrôle est la facilité de mise en œuvre, la rapidité, et un coût réduit en matériel.

L'inconvénient est une formation du personnel importante et régulière, un besoin plus important en personnel, et un risque d'erreur intrinsèque (facteur humain).

1.3.2. Les contrôles gravimétriques

Le principe consiste à peser la poche de véhicule, la tarer, injecter le volume d'anticancéreux, puis peser la poche terminée. La vérification de la dose injectée se fait par la différence des deux pesées. La densité du produit doit être connue [4], [5], [6].

C'est une méthode simple, non destructive, suffisamment rapide pour permettre une validation avant dispensation, d'un coût peu élevé et qui peut s'intégrer assez facilement dans le processus de préparation.

Les limites résident dans la difficulté d'obtention des masses volumiques des produits, le temps de préparation qui est augmenté, et l'absence d'identification, de quantification précise.

Il existe des possibilités de comparaison du poids obtenu à un poids théorique grâce à un logiciel interfacé avec le système informatique de production (traitement statistique : calcul d'incertitude, intervalle de tolérance) [7], [8].

Et ce type de procédé est utilisable en salle blanche en cours de production.

Le contrôle du process entier est également possible : exemple, le système CATO®

Le système Cato® permet la préparation avec un contrôle de pesées des cytostatiques ou d'autres substances à l'aide d'une balance électronique connectée à un ordinateur. Lors du processus de préparation, l'ordinateur agit comme un assistant et guide le préparateur d'une manière interactive à travers les étapes de préparation. Une identification par codes barres des produits est possible et permet le contrôle de la nature des produits, le contrôle gravimétrique permet une vérification des dosages souhaités. La gestion des reliquats des produits est également prise en compte, ceux-ci seront proposés lors de préparations ultérieures jusqu'à expiration de leur date de conservation [7].

Les limites résident dans la nécessité d'une interface informatique efficace [9]. Par ailleurs ce procédé s'adapte mieux à la préparation sous hottes à flux d'air laminaire que sous isolateurs.

1.3.3. Les contrôles analytiques

Différentes équipes pharmaceutiques ont développé les méthodes de contrôles analytiques.

Spectrophotométrie UV-Visible

La spectrophotométrie a été utilisée par l'équipe de Basuyau et al, (centre Henri-Becquerel à Rouen) pour doser le 5-fluorouracil (5FU).

Ils ont utilisé la spécialité (5-fluorouracil, Teva®), un spectrophotomètre Hitachi U-1100 couplé à un diluteur Hamilton® réglé pour réaliser une dilution proche de 1/250^e.

Les absorbances de ces dilutions sont mesurées à 265 nm. Des valeurs comprises entre 0,374 et 1,301 de DO¹ sont observées, le zéro du spectrophotomètre étant réglé sur l'eau. Le coefficient de variation est inférieur à 1 % [6].

L'équipe de l'hôpital Robert-Debré (Collin et al.) a mis en place un contrôle d'uniformité de teneur des préparations injectables de cytarabine par spectrophotométrie [9].

Chromatographie liquide haute performance et spectrophotométrie.

Une méthode par chromatographie liquide haute performance (CLHP) avec une phase mobile eau/méthanol (95/5 %) et détection spectrophotométrique à 266 nm a été mise au point par Watt et al.

Une gamme d'étalonnage avec 7 points entre 20 µg/mL et 200 µg/mL a été réalisée à partir de 5-FU poudre en solution dans du glucose à 5 %. La reproductibilité et la

¹ Densité optique

répétabilité de la méthode de dosage ont été déterminées sur le temps de rétention et sur l'aire des pics. La répétabilité a été déterminée pour les sept points de la droite d'étalonnage par 10 dosages répétés de la même solution. Le coefficient de variation était compris entre 0,233 et 1,482 % pour le temps de rétention du 5-FU, et entre 0,079 et 0,439 % pour l'aire du pic. La reproductibilité a été déterminée sur les points de début et fin de la droite d'étalonnage, par dosages de 15 solutions différentes de chaque concentration. Les coefficients de variation étaient de 0,693 % et de 0,654 % pour les temps de rétention et de 3,349 % et de 1,992 % pour les aires des pics aux concentrations testées [10].

En 2005, l'HEGP (Hôpital Européen George Pompidou) avait imaginé un système chromatographique en phase liquide automatisant plusieurs processus chromatographiques différents sous forme d'un carrousel en vue d'un traitement rapide de l'échantillon. Les étalonnages étaient réalisés grâce aux cytotoxiques issus des spécialités pharmaceutiques (intégration de la matrice pharmaceutique, excipients).

La préparation de phases mobiles différentes était réalisable in-situ dans la pompe et extemporanément grâce à la pompe alimentée par une double électrovanne permettant la sélection de trois solvants, tout en modifiant la composition de la phase mobile grâce au réglage du volume d'injection. L'échantillon dans sa phase mobile passe ensuite dans une colonne de phase stationnaire sélectionnée parmi cinq possibles (plus une voie de purge des solvants et pour la technique par FIA) grâce à un sélecteur. La détection du signal se fait à l'aide d'une barrette de diode dans l'UV-visible.

Six molécules avaient été validées en HPLC ou FIA (5FU, carmustine, carboplatine, cisplatine, oxaliplatine, docetaxel) avec des coefficients de variation situés entre 0,6% et 5,4% [11], [12].

Chromatographie en couche mince

L'équipe de Bourget et *al.* (Institut Gustave Roussy) a développé une méthode originale de chromatographie planaire (ou en couche mince), l'HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) [13], [14].

Le système comporte :

- une chambre de développement destinée à l'optimisation de différentes phases mobiles (permet un test simultané et en ligne de 6 phases mobiles au moyen d'un seul support chromatographique),
- deux déposeurs automatisés d'échantillons (pulvérisation pneumatique de haute précision garantissant un dépôt calibré et reproductible des échantillons),
- une cuve de migration horizontale (temps de migration inférieur à 10 minutes pour des distances de migrations de l'ordre de 5 à 6 cm),

- et un densitomètre en lecture optique à longueur d'onde multiple qui rend possible la quantification, couplé à un ordinateur.

Une détection par fluorescence a également été utilisée (pour les dérivés de la camptothécine) [15].

Avec cette méthode, Bourget et *al.* ont validé l'identification et la quantification des vinca-alcaloïdes, et de gélules de busulfan à 70 mg [16].

L'analyse par injection en flux continu : La FIA (Flow Injection Analysis)

La FIA consiste, dans son principe le plus simple, en l'injection d'un petit volume (μL) d'une solution échantillon (dispersion contrôlée) dans un fluide en mouvement (liquide transporteur), qui se déplace de façon continue. La zone formée par l'injection de l'échantillon est ainsi transportée vers un détecteur.

Pour son utilisation la plus simple, le matériel de base pour la mise en œuvre de cette technique est constitué des éléments suivants : d'un réservoir de liquide transporteur, d'un moyen de propulsion du liquide transporteur (pompe à débit constant), d'un injecteur (formation d'une zone échantillon parfaitement définie et reproductible), d'un « réacteur » (un enroulement de tuyaux dans lequel est dispersé l'échantillon et qui peut permettre le déroulement de réactions chimiques), d'un détecteur et d'un enregistreur [17].

Cette méthode est utilisée, à l'heure actuelle, notamment, par Hôpital Européen George Pompidou (HEGP) de Paris (sur l'appareil décrit précédemment) [11], et par le CHU de Nancy [3], pour réaliser des dosages en routine de la production d'anticancéreux. Mais ils n'utilisent pas le « réacteur », la détection s'effectue par spectrophotométrie UV-visible.

La saturation de l'absorption est traitée par l'injection d'un faible volume d'échantillon, une cellule de mesure de faible longueur, la dilution par l'autosampler. L'avantage de cette méthode est l'affranchissement des manipulations de dilution (exposition + risque d'erreur + validation méthode), un faible volume de prise d'essai, la rapidité du résultat. Les contraintes sont financières (coût d'acquisition, de développement, et consommables), analytiques (non spécificité du spectre d'identification des anthracyclines, des vinca-alcaloïdes dans l'UV-visible).

La spectrométrie couplée Ultraviolet / visible / Infrarouge

Cette technique est celle que nous avons choisie. Elle permet l'identification et le dosage des anti-cancéreux et des anticorps monoclonaux (grâce à l'infrarouge). Plusieurs équipes l'utilisent déjà intégrée à l'activité de préparation des anti-cancéreux, certains l'utilisent également pour d'autres types de molécules [18-23]

II. La Spectrométrie

2.1. Spectrophotométrie d'absorption moléculaire UV-visible

2.1.1. Définition

La spectrophotométrie correspond à l'étude des variations de grandeurs photométriques spectrales ou de leur équivalent énergétique résultant de l'interaction du rayonnement avec une substance placée sur le faisceau [24].

Le domaine de longueur d'onde de l'UV se situe entre 10 nm à 400 nm, celui du visible se situe entre 400 nm à 800 nm (Figure 1).

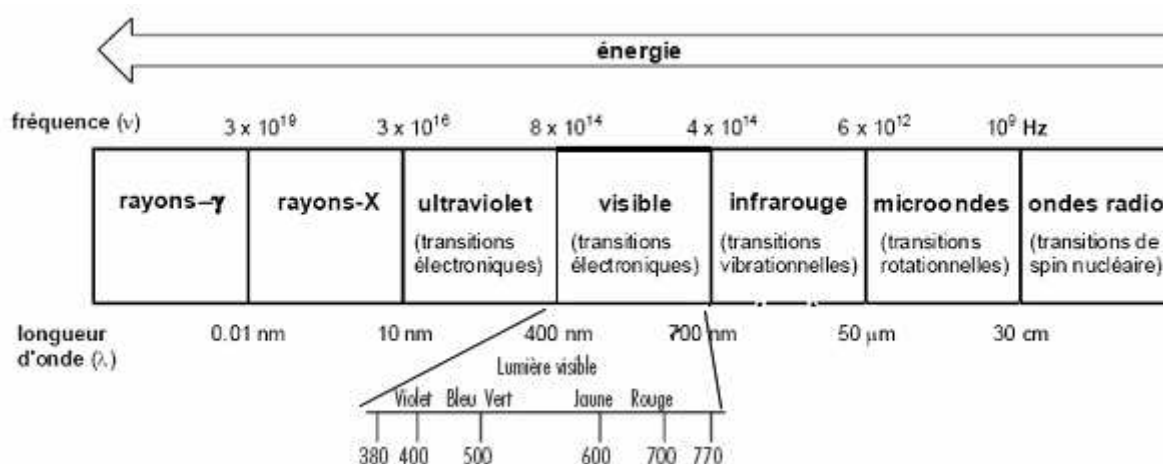


Figure 1 : Spectre électromagnétique de la lumière et domaine UV-visible (d'après [25])

Le terme photométrie signifie que l'on mesure une densité de photons.

En spectrophotométrie d'absorption moléculaire, on sélectionne des photons de fréquence ν_0 absorbables par la molécule à étudier. Ainsi, lorsqu'un faisceau d'intensité I_0 traverse une solution de molécule absorbante, le faisceau transmis présente une intensité I inférieure à I_0 .

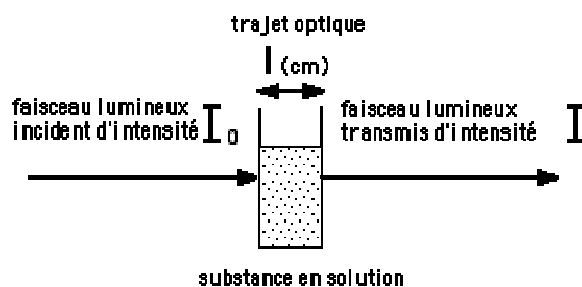


Figure 2 : Principe de la spectrophotométrie d'absorption moléculaire (d'après [26])

Les applications analytiques de la spectrophotométrie d'absorption moléculaire UV-visible concernent les molécules en solution; elles peuvent être qualitatives ou (et) quantitatives. Dans les deux cas, elles font appel à la loi de Beer-Lambert qui établit la relation existante entre intensité transmise I et intensité incidente I_0 .

Il a été démontré que :

$$I = I_0 e^{-KCL}$$

I = intensité transmise

I_0 = intensité incidente

K = constante de proportionnalité

C = constante de la solution en soluté absorbable

L = épaisseur de la solution traversée par le flux lumineux

Le phénomène d'absorption ne peut être évalué que par le rapport entre intensité incidente I_0 et intensité transmise I du faisceau transmis dans la même direction.

L'absorbance (A) ou densité optique se définit par :

$$A = \log_{10} (I_0/I) = \epsilon Cl$$

où $\epsilon = K/2,303$

et où ϵ est le coefficient d'extinction de la molécule, qui s'exprime de façon différente selon les unités choisies pour exprimer la concentration.

2.1.2. Aspect qualitatif

Les modifications, au niveau moléculaire, mises en jeu dans le domaine UV-visible correspondent à des transitions électroniques des électrons de liaison, permettant ainsi la caractérisation de la molécule elle-même et non des atomes qui la constituent. Il s'agit de transition d'électrons entre orbitales moléculaires [26].

Les groupements responsables de l'absorption UV-visible (chromophores) sont des groupements fonctionnels dans lesquels les électrons sont délocalisés (doubles liaisons conjuguées, noyaux aromatiques...).

2.1.3. Spectre UV-visible d'une molécule

Le spectre UV-visible d'une molécule en solution se définit comme la variation de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde (λ) de la lumière incidente. Un spectre est enregistré à partir d'une solution de concentration connue dans un solvant déterminé, disposé dans une cuve d'épaisseur calibrée. Une molécule pourra être caractérisée en spectrophotométrie d'absorption moléculaire UV-visible par la description de son spectre $A=f(\lambda)$, en précisant les maxima et minima d'absorption, et le coefficient d'extinction moléculaire aux longueurs d'ondes correspondantes, ainsi que le solvant [24].

En effet, par sa polarité, le solvant influence la valeur de l'énergie nécessaire à la transition électronique ; ce qui a pour conséquence d'induire un déplacement des λ_{\max} et une modification des valeurs d' ϵ (exemple : glucose 5%).

Les principaux groupes chimiques actifs dans l'UV proche correspondent aux chromophores fondamentaux :

- éthylénique, acétylénique
- carbonyle, carboxylique et dérivés de ces acides (chlorure d'acide, anhydride, amide, ester)
- dérivés nitrés et azodérivés.

La présence de plusieurs chromophores isolés absorbants à la même longueur d'onde, augmente proportionnellement l'intensité d'absorption par simple effet d'additivité.

Par contre les modifications importantes des caractéristiques spectrales (ϵ et λ) résultent des effets de conjugaison, d'addition de solvant.

2.1.4. Intérêt analytique des spectres d'absorption UV-visible

Le spectre d'absorption UV-visible permet de caractériser une molécule. Il est, par conséquent, un des critères d'identification de la molécule. Toutefois, l'absorption dans l'UV-visible permet plutôt de caractériser des groupements fonctionnels, et non une molécule dans son ensemble. Ainsi, la spectrophotométrie d'absorption moléculaire UV-visible ne permet pas d'identifier de façon absolue une molécule, et les spectres des molécules d'une même famille chimique sont très proches donc difficiles à différencier (exemple : les anthracyclines).

2.1.5. Aspect quantitatif

La loi de Beer Lambert décrite précédemment se prête à l'analyse quantitative dans la mesure où le signal mesuré A (Absorbance) est proportionnel à la concentration en soluté absorbant de la solution.

Validité de la loi de Beer Lambert :

Cette relation de proportionnalité n'est vraie que dans certaines conditions :

- lumière monochromatique
- concentration pas trop élevée
- absence de fluorescence et diffusion négligeables (hétérogénéité)
- la substance ne doit pas donner lieu à des réactions chimiques sous l'effet du rayonnement incident
- la substance ne doit pas donner lieu à des associations variables avec le solvant [26]

Par ailleurs, lorsque plusieurs substances absorbantes sont présentes en solution, on observe une additivité des phénomènes.

2.1.6. Méthodes de quantification

Pour tout dosage, le procédé d'étalonnage choisi doit essentiellement tenir compte d'un « effet de matrice » potentiel du milieu à doser.

En effet, le milieu peut modifier le signal mesuré, ou contenir des substances absorbantes parasites, qui compte tenu de l'additivité de la loi de Beer Lambert, sont mesurés simultanément.

Si le milieu à doser ne modifie pas le signal mesuré, un étalonnage simple peut être réalisé :

La gamme d'étalonnage :

- elle consiste à préparer une série de dilutions d'une solution étalon "mère", à mesurer l'absorbance de chacune de ces solutions étalons "filles", puis à tracer la courbe d'étalonnage $A = f(c)$. L'absorbance de la solution à doser est mesurée dans les mêmes conditions, puis reportée sur la courbe d'étalonnage; on fait ainsi une détermination graphique de la concentration de la solution à doser (la gamme doit encadrer la valeur probable de la solution à doser) (Figure 3).
- elle permet de vérifier la linéarité, et tient compte des éventuelles erreurs de manipulation (tracé d'une droite statistique).

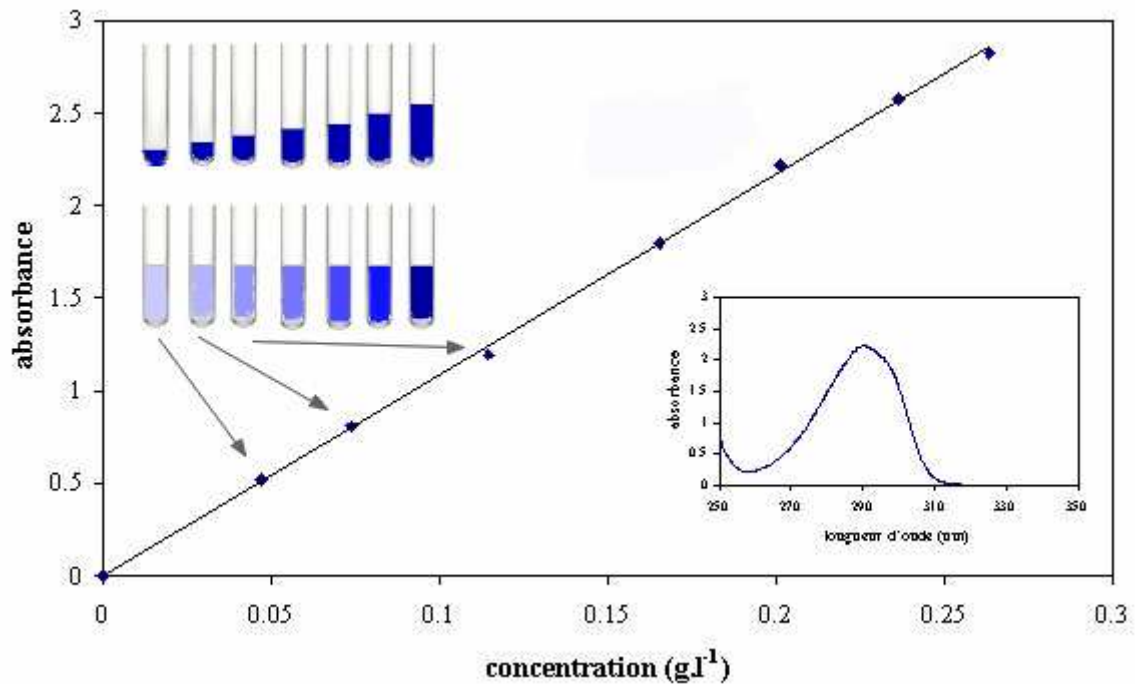


Figure 3 : Principe d'une gamme d'étalonnage

Si le milieu à doser modifie le signal mesuré, deux cas différents peuvent se présenter, auxquels correspondront deux procédés d'étalonnage différents.

Les éléments du milieu modifiant le signal sont connus, leur concentration est connue et suffisamment constante. On prépare alors des solutions étalons artificielles comportant les dits éléments aux concentrations attendues.

Les éléments du milieu modifiant le signal sont inconnus, on a recours à la méthode des « ajouts dosés ».

Dans ce cas, on introduit un volume constant de la solution à doser dans tous les tubes, puis des quantités croissantes d'un étalon connu de l'élément à doser, de façon telle que le milieu soit homogène, et que le volume final soit constant dans tous les tubes. L'absorbance mesurée varie alors avec la surcharge ajoutée (Figure 4).

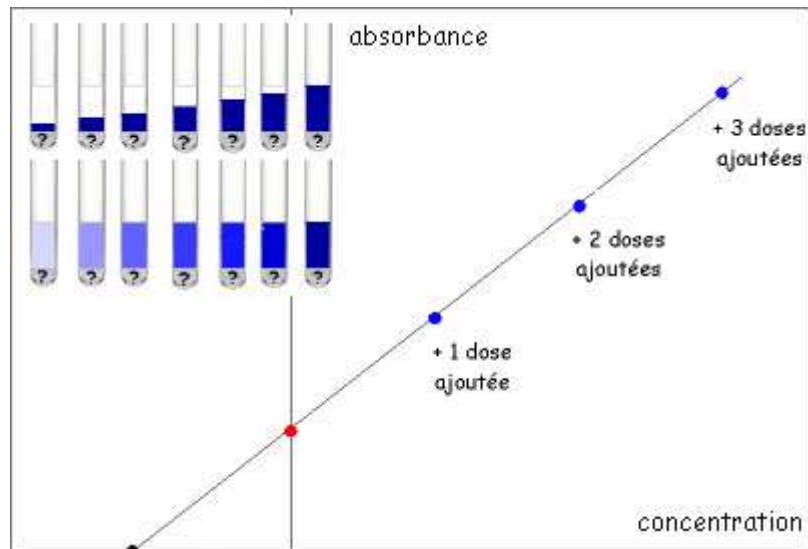


Figure 4 : Principe d'un étalonnage par ajouts dosés

2.1.7. Choix de la longueur d'onde

La longueur d'onde choisie pour les mesures quantitatives est théoriquement celle pour laquelle l'absorbance (A) est maximum c'est-à-dire aussi ϵ est maximum, ce qui correspond au maximum de sensibilité (à cette longueur d'onde, A varie beaucoup plus en fonction de la concentration). D'autre part, autour de cette longueur d'onde, ϵ varie peu ; ainsi, bien qu'on n'ait pas un faisceau rigoureusement monochromatique en pratique, la loi de Beer –Lambert s'applique quand même.

2.1.8. Appareillage

Un appareillage classique comporte 5 éléments principaux :

- une source de rayonnement continu
- un système de sélection en longueur d'onde ou en fréquence (filtres absorbants, prismes en verre ou en quartz, réseaux plans ou concaves comportant une série de traits rectilignes parallèles équidistants gravés à la surface)
- un compartiment pour l'échantillon (cuve en verre ou en quartz)
- un récepteur (transforme la radiation en courant électrique)
- un appareil de mesure éventuellement précédé d'un amplificateur

Nous ne détaillerons ici que le système du spectrophotomètre UV-visible utilisé par le Multispec® : le spectromètre UV/Visible à barrettes de diodes.

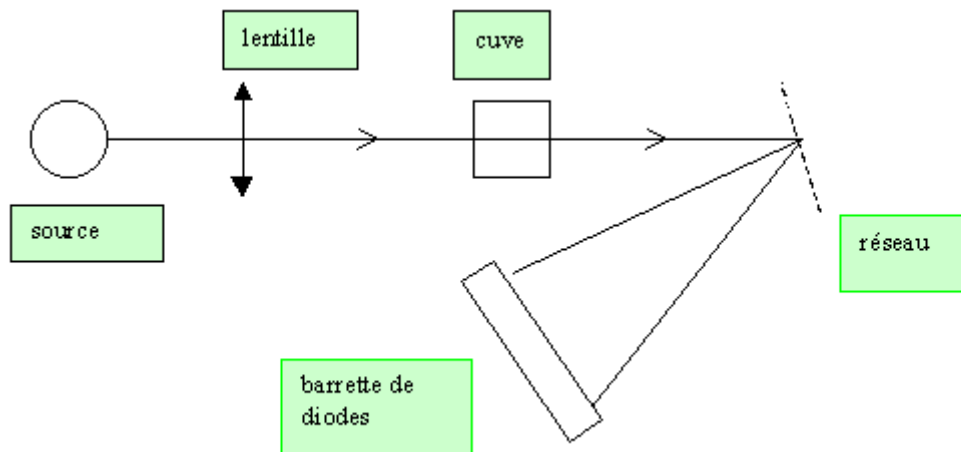


Figure 5 : Spectrophotomètre monofaisceau-multicanal ou à barrette de diodes (d'après [26])

Ce type d'appareil ne comporte pas de monochromateur.

La lumière polychromatique (blanche) de la source est envoyée sur la cuve qui en transmet une partie vers un réseau.

Le réseau disperse cette lumière en différentes longueurs d'onde.

Chaque photosite ou photodiode du capteur ne reçoit qu'un très petit intervalle de longueur d'onde sur lequel il mesure la puissance des photons et convertit l'énergie en courant électrique.

L'intérêt d'un tel dispositif est que la mesure de la puissance transmise se fait instantanément sur l'ensemble du spectre de longueurs d'onde.

2.2. Spectrométrie moléculaire IR

2.2.1. Définition

La spectrométrie infrarouge (IR) s'utilise principalement pour l'analyse qualitative d'une molécule. Elle permet de mettre en évidence la présence d'une liaison particulière. La région du spectre IR s'étend de 0,75 à 300 μm , mais la majorité des applications se situe entre 2,5 et 15 μm soit en nombre d'onde de 4000 cm^{-1} à 670 cm^{-1} .

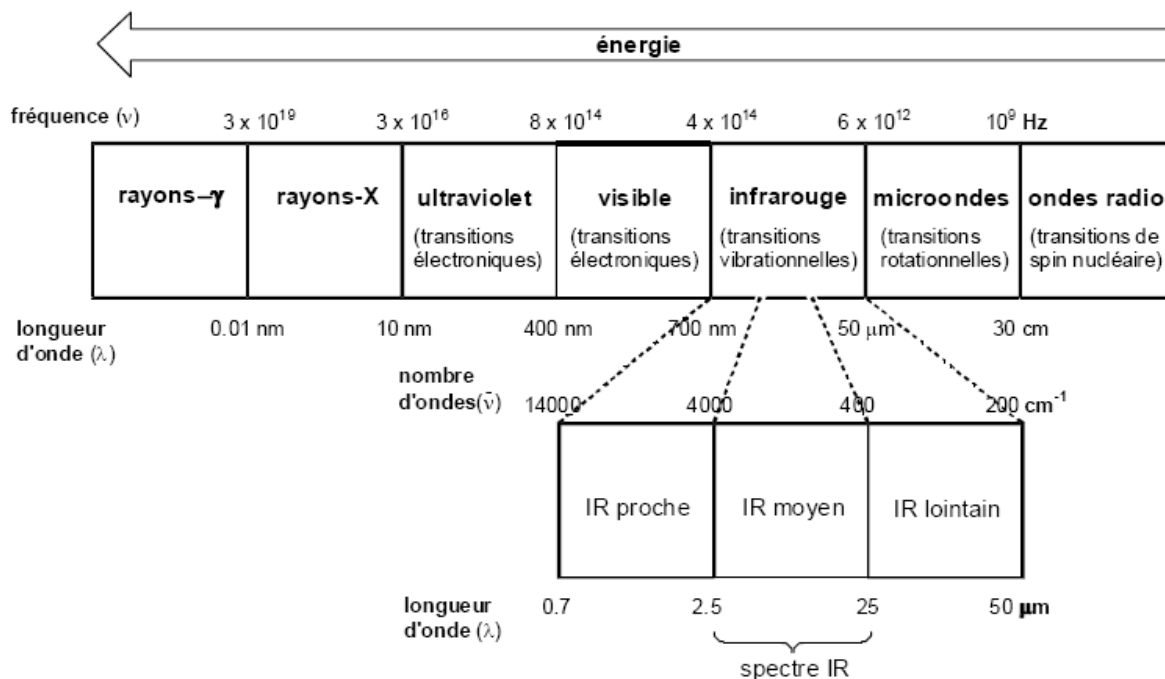


Figure 6 : Spectre électromagnétique de la lumière et domaine IR (d'après [25])

On se situe dans le domaine des grandes longueurs d'onde donc l'énergie individuelle des photons (hc/λ) est petite.

Dans l'IR lointain (hc/λ très petite) : un photon incident sur une molécule n'aura qu'un effet très faible sur celle-ci : on aura des modifications des énergies de rotation de la molécule qui sont quantifiées.

Dans l'IR moyen et proche (hc/λ un peu plus élevée) : un photon incident modifiera les énergies de rotation et en plus de vibration. Ces énergies de vibration sont également quantifiées.

En effet, lorsque la molécule absorbe de l'énergie sous la forme d'un rayonnement IR, l'amplitude de ces vibrations est augmentée, le retour à l'état normal libère de la chaleur.

Plusieurs modes de vibrations sont possibles pour un groupe d'atomes donnés. A chacun correspond une fréquence caractéristique, mais seuls les mouvements qui entraînent une variation du moment dipolaire électrique, donnent lieu à des bandes d'absorption IR.

L'absorption du rayonnement IR par les composés organiques correspond à deux types principaux de vibrations atomiques :

- modification des énergies d'oscillations des longueurs de liaisons = interactions de valence Elles se trouvent dans la zone du spectre IR de 4000 cm^{-1} à 1000 cm^{-1} .

- modification des énergies d'oscillations des angles entre les liaisons = interactions de déformation.
- Ces vibrations constituent la région du spectre dite "empreinte digitale" (1600 à 600 cm^{-1}). Les vibrations de **déformations** plus faibles que celles de valence sont nombreuses et beaucoup plus sensibles à l'environnement car elles ont besoin pour se produire d'un volume plus important et risquent donc d'être entravées par la présence d'atomes voisins.

2.2.2. Appareillage

Il existe 2 sortes de spectromètre IR: le spectromètre à balayage et le spectromètre à transformée de Fourier.

Un spectromètre IR à **balayage** est composé des éléments suivants :

- une source
- l'échantillon
- un système dispersif
- un détecteur

Un spectromètre IR à **transformée de Fourier (IRTF)** est composé des éléments suivants :

- une source
- un interféromètre de Michelson
- l'échantillon
- un détecteur

Spectrophotomètre à transformée de Fourier (IRFT)

L'interféromètre comprend un diviseur de faisceau (ou séparatrice), un miroir fixe et un miroir mobile.

La Figure 7 présente le schéma de principe et les constituants de l'interféromètre :

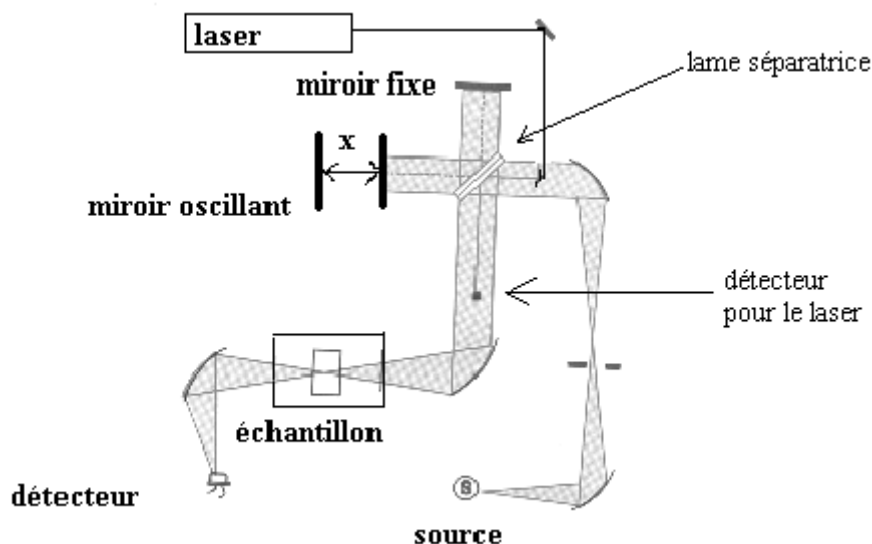


Figure 7 : Schéma du spectrophotomètre à transformée de Fourier (IRTF) (d'après [26])

La source émet un rayonnement polychromatique qui est envoyé dans un interféromètre de Michelson. Ce dernier est constitué d'une lame séparatrice qui permet d'envoyer une partie du faisceau vers un miroir fixe tandis que l'autre partie est envoyée vers un miroir mobile oscillant.

Les deux faisceaux sont réfléchis à la surface des deux miroirs et se recombinent sur le diviseur créant alors des interférences constructives ou destructives suivant la position du miroir mobile par rapport au miroir fixe. Le faisceau résultant passe ensuite à travers l'échantillon où il se produit une absorption sélective. L'énergie qui atteint le détecteur est donc la somme d'énergie des deux faisceaux. Le signal transmis au cours du temps par le détecteur est traduit sous forme d'interférogramme. Cet interférogramme est ensuite traité par transformée de FOURIER. C'est un processus mathématique permettant de décomposer un signal complexe, fonction du temps mais pas forcément périodique, en une somme de signaux simples de fréquences connues donc périodiques.

Contrairement aux appareils à balayage à double faisceau, où le spectre de l'échantillon est obtenu directement par différence entre les 2 trajets optiques (échantillon et milieu ambiant), en IRTF il est nécessaire de soustraire le spectre du milieu ambiant (*background*).

2.2.3. Intérêt analytique du spectre IR

La spectrométrie infrarouge (IR) s'utilise principalement pour l'analyse qualitative d'une molécule.

L'intérêt du couplage de la spectrophotométrie UV-visible et IR dans le Multispec® permet d'améliorer la spécificité de l'identification des molécules par le spectre IR. Même si la majeure partie des analyses quantitatives sont réalisées dans l'UV-visible, la loi de Beer-Lambert est également applicable en quantification dans l'IR.

III. Intérêts et problématiques du contrôle analytique

3.1. Le cytotoxique reconstitué : une préparation à risque

L'activité de reconstitution relève, sur le plan pharmaceutique et législatif, de la production magistrale, et elle peut donc être exempte de contrôle analytique du produit fini.

Cependant la préparation magistrale qu'est le cytotoxique reconstitué possède sur le plan pharmaceutique un caractère unique qui la rend hautement spécifique : l'index thérapeutique particulièrement étroit de ces médicaments, et les posologies (mg/m²) qui induisent des doses, donc des préparations, très individualisées.

Ainsi, au regard des recommandations [2], et dans un contexte d'évolution constante de la qualité entourant la production d'un grand nombre de préparations, toujours différentes entre elles par leur dosage, la nature du principe actif et leur conditionnement, le contrôle analytique de l'opération de reconstitution s'impose de plus en plus.

3.2. Critères d'une méthode de contrôle analytique idéale

Le problème que pose en général le contrôle d'une préparation magistrale est la nécessité théorique de contrôler chaque unité produite, et ceci sans la détruire. Le choix de la stratégie analytique se pose donc (quelle méthodologie et quelle instrumentation mettre en œuvre). D'autant plus, que pour être vraiment intéressant sur le plan de la sécurisation du circuit du médicament (le bon médicament à la bonne dose), la méthode choisie doit être suffisamment rapide pour permettre une validation de la préparation avant dispensation aux services de soins et avant l'administration au patient.

Il faut répondre à cette problématique organisationnelle tout en y ajoutant les particularités qui sont propres à la préparation de médicaments anticancéreux. En effet, le domaine d'analyse concerne :

- des concentrations qui peuvent être très élevées en un seul principe actif
- un panel d'une quarantaine de molécules à doser dont les concentrations peuvent parfois varier d'un facteur de 1 à 50 (pour le 5- fluorouracile par exemple)
- des matrices très simples qui sont les véhicules de perfusion (glucose 5%, NaCl 0,9%,...)
- une très grande variété de caractéristiques physico-chimiques (pKa, log P, caractère acido-basique, propriété d'absorbance...)
- une quarantaine de molécules à doser chaque jour, avec la nécessité pour une validation à priori, de pouvoir passer de l'une à l'autre rapidement, en s'affranchissant de « campagne d'échantillonnage par molécule ».
- la nécessité de s'affranchir le plus possible d'étapes de dilutions préalables au dosage :
 - * pour avoir une méthode rapide,
 - * dans le souci de protection de l'environnement vis-à-vis du risque chimique
 - * pour éviter une difficulté supplémentaire en termes de validation de la méthode et de risque d'erreur de résultats

En résumé, la technique doit être rapide et facile en routine, non destructrice, sans étapes de traitement préalable de l'échantillon, et doit être applicable à toutes les molécules utilisées en production.

Il faut ajouter à ces caractéristiques, le coût (achat de l'appareil, temps de développement et consommables) et une certaine facilité en mettre en place, tant du côté du développement que de son utilisation quotidienne.

Une équipe de Lyon [28] a réalisé une analyse comparative des méthodes analytiques de dosage de préparation d'anticancéreux (HPLC, HPTLC, IRTF). Il en résulte que c'est l'IRTF qui est la technique la plus adaptée aux problématiques citées précédemment.

3.3. Validation d'une méthode d'identification et de dosage

3.3.1. Principaux référentiels

Il existe plusieurs référentiels pour la validation d'une méthode analytique, et comme le souligne J.M. Roussel [29], « selon le référentiel utilisé, un même terme peut cacher des définitions relativement différentes ».

Les principaux référentiels sont :

- Les normes ISO (international standardization organisation) : la norme ISO 3534-1 et la norme ISO 5725 [29]
- Les guidelines PIC/S [30]
- Les guidelines de l'EMA (ICH Topic Q2) [31]

3.3.2. Critères de validation

Pour la quantification d'un produit actif dans un produit fini, pour un test de dissolution, les caractéristiques à évaluer sont :

- la justesse (Accuracy)

Elle exprime l'étroitesse de l'accord entre la valeur moyenne obtenue sur une grande série de résultats et la valeur acceptée comme référence, ou la capacité à se rapprocher le plus possible de la valeur cible.

- la fidélité (Précision)

Elle exprime l'étroitesse de l'accord entre les valeurs obtenues dans une série d'échantillons (aliquotes) issus d'une même solution mère.

Elle peut être exprimée par le coefficient de variation (CV) qui doit être inférieur à 5%.
($CV = 100 \times \text{écart-type} / \text{moyenne}$)

Elle regroupe :

- La répétabilité : elle exprime la fidélité dans les mêmes conditions opératoires à un intervalle de temps court. (variabilité intra-série)
- La précision intermédiaire : elle exprime la variabilité intra-laboratoire, à des jours différents, opérateurs différents, équipements différents.
- La reproductibilité : elle exprime la variabilité inter-laboratoires.

La norme ISO 3534-1 précise que le terme d'exactitude, lorsqu'il est appliqué à une série de résultats, met en jeu une combinaison d'éléments aléatoires et d'erreurs systématiques, c'est-à-dire une combinaison de la justesse et de la fidélité de la méthode.

- la robustesse

C'est la capacité d'une méthode à ne pas être affectée par de faibles variations introduites délibérément.

- la linéarité et ses bornes

Ce sont les concentrations minimales et maximales entre lesquels on observe une réponse proportionnelle entre le signal et la concentration. Elle est exprimée par le coefficient de régression de la droite ; celui-ci doit être supérieur à 0,995.

- la sélectivité

C'est la capacité de la méthode à pouvoir identifier de manière certaine l'analyte, sans confusion avec d'autres molécules (autres principes actifs ressemblants, métabolites, composants de la matrice...).

L'appareil acquis dans notre établissement, le Multispec® (Microdom, France) allie la spectrométrie UV-visible et la spectrométrie IRTF. Ce couplage permet une meilleure spécificité dans la reconnaissance des molécules (notamment l'identification des anticorps monoclonaux). La plupart des quantifications se fait dans des domaines de longueurs d'onde de l'UV. C'est une technique d'analyse rapide des échantillons sans traitement préalable.

Le Multispec® peut être utilisé dès la livraison pour le dosage des préparations. Cependant, nous avons fait le choix de développer notre propre méthode, de réaliser et valider nos étalonnages à partir des médicaments et des concentrations utilisées dans nos préparations.

Nous avons donc réalisé une revue de la littérature afin de déterminer les critères de validations de nos étalonnages. Les recommandations que nous avons trouvées restent très théoriques, et nous avons sollicité nos confrères expérimentés afin de recueillir leurs conseils et s'inspirer de leur méthodologie.

DEUXIEME PARTIE

*Mise en place du système Multispec® de
Microdom à l'UPCC*

I. Présentation du Multispec® (Microdom)

La technique Multispec® a été choisie pour les critères suivants :

- utilisation de l'infra-rouge, qui permet une meilleure sélectivité de l'identification et le traitement des anticorps monoclonaux
- l'absence de prétraitement de l'échantillon par dilution
- un temps d'analyse rapide (moins d'une minute)

Dans la présentation qui va suivre, l'attention sera portée sur le vocabulaire et les définitions des termes utilisés. En effet si certains mots ont un sens commun (ex : méthode, gamme), dans Multispec® leur définition est très importante, et leur utilisation fait référence à une signification très particulière. Dans un souci de clarté, lorsque les mots seront employés au sens de la technique Multispec®, ils seront suivis de l'extension du fichier utilisé dans le logiciel. Ainsi ils seront dissociés de leur signification commune.

2.1. Objectifs de la technique Multispec®

L'analyse de l'échantillon permet de répondre à 3 questions :

Quelle est la molécule ? Quel est le solvant ? IDENTIFICATION

Quelle est sa concentration ? QUANTIFICATION

Les caractéristiques techniques de l'appareil seront développées dans la partie « Matériel et Méthode ».

2.2. Définitions dans Multispec®

Spectre (.spc) :

« Image » qui résulte de la décomposition de la lumière et qui correspond à la faculté d'une substance (due à sa formule chimique) d'absorber la lumière différemment selon les longueurs d'ondes.

La reconnaissance d'un échantillon se fait sur l'allure globale du spectre, les pentes du tracé prises pas à pas (pas = intervalle entre deux longueurs d'ondes).

Nous distinguerons d'un spectre quelconque, les spectres de références qui sont les spectres utilisés pour les étalonnages et la librairie.

Gamme d'étalonnage = gamme spectrale (.gam) :

Groupe de spectres liés pour une même fonction de quantification, concernant une molécule dans un vecteur, à plusieurs concentrations (utilisation du spectre dans les régions spectrales où la concentration varie).

Gamme de recherche = bibliothèque (.lbs) :

Groupe de spectres liés pour une même fonction d'identification, concernant plusieurs molécules dans un ou plusieurs vecteurs, à plusieurs concentrations.

Étalonnage en quantification (.eta) :

Application de paramètres mathématiques à la gamme spectrale pour une fonction de calcul de concentration.

Étalonnage en recherche = librairie (.lib) :

Application des paramètres mathématiques à la bibliothèque (gamme de recherche) pour une fonction d'identification.

Méthode (.MDB) :

Une librairie, pour l'identification, est associée à des étalonnages, pour la quantification, la discrimination permet le passage de la reconnaissance du spectre au dosage associé.

2.3. Principe de fonctionnement d'une méthode.MDB

Le principe de fonctionnement d'une méthode est basé sur 3 grandes étapes qui permettent, après l'enregistrement du spectre de l'échantillon :

1. La sélection du spectre de référence qui ressemble le plus à celui de l'échantillon (parmi la bibliothèque de spectres de référence) = Identification et indice de ressemblance (%)
2. L'aiguillage, c'est-à-dire la sélection de l'étalonnage dans lequel le spectre de référence retenu est utilisé (parmi la bibliothèque d'étalonnage)
3. La quantification de l'échantillon selon la droite de l'étalonnage en question

2.3.1. L'identification

La comparaison à la librairie spectrale est destinée à identifier une molécule sur la base de la corrélacion de son allure spectrale avec celle du spectre de référence le plus proche parmi les spectres sauvegardés dans une bibliothèque. L'identification est possible même

si la concentration de la molécule concernée, et par conséquent le niveau d'absorbance, aux différentes longueurs d'onde, est différente de celle du ou des spectres de référence.

La librairie est une base de données paramétrée pour l'identification.

Le paramétrage repose sur :

- La sélection des régions spectrales spécifiques de chaque molécule dans son véhicule
- Le réglage de la finesse du pas d'analyse (intervalle de longueur d'onde)
- La pondération des variations de l'absorbance dans l'UV-visible et dans l'IR (car très différentes)
- La détermination des valeurs de corrélation (renseignent sur le degré de certitude de l'identification) limites et d'exclusion.

La bibliothèque est la base de données de la librairie, c'est une « gamme de recherche ». Pour atteindre des performances optimales, elle doit comporter des spectres représentatifs de chaque molécule à identifier dans un ou plusieurs vecteurs, à plusieurs concentrations.

La base de données (bibliothèque) relie tous les spectres et associe à chacun d'eux des renseignements propres : molécule, vecteur associé, groupe de concentration (indifférent, haute ou basse).

L'ensemble des spectres, sans renseignements ni liens, sont rangés dans un dossier spécialement dédié « spectres recherches ».

La spécificité de la méthode réside dans le fait que l'on ne sélectionne pas les spectres qui concernent la molécule recherchée mais que l'on laisse la méthode rechercher en « aveugle » le spectre le plus ressemblant parmi toutes les molécules de la base de données.

2.3.2. La quantification

La quantification se fait par l'intermédiaire de la droite d'étalonnage de chaque molécule dans son solvant, selon la loi de Beer Lambert (l'absorbance est fonction de la concentration). On enregistre d'abord une « gamme spectrale » qui regroupe les spectres utilisés issus des étalons pour en faire les points de la droite. Et ensuite on sélectionne la (les) bande(s) spectrales auxquels les absorbances seront mesurée(s) pour la quantification. Enfin, on applique la méthode des moindres carrés, pour calculer l'équation de la droite et le coefficient de corrélation, et définir les paramètres de « l'étalonnage ».

Ainsi, l'étalonnage est une base de données paramétrée pour la quantification. Les paramètres sont appliqués à la gamme spectrale qui est la base de données de l'étalonnage.

2.3.3. L'aiguillage entre les deux étapes

Pour permettre le passage de l'étape d'identification à l'étape de quantification, il faut créer un lien entre le spectre de référence ayant la meilleure corrélation et son étalonnage correspondant. Pour cela, on crée une « méthode ».

La méthode comprend la librairie et tous les étalonnages.

Ce qui crée le lien c'est la caractérisation identique en terme de nature du vecteur (chlorure de sodium 0,9%, Glucose 5%,...) et de concentrations (gamme de concentrations haute, basse ou indifférent) :

- de chacun des spectres dans la librairie
- de chacun des étalonnages dans la méthode.

Ce qui fait fonctionner le lien c'est le respect du rangement et la stricte identité des spectres dans les gammes spectrales (des étalonnages) et dans la bibliothèque (de la librairie).

2.4. Utilisation du Multispec®

L'utilisation du Multispec® repose sur deux modules du logiciel :

- Multispec® Analyse :

C'est le module d'acquisition des spectres, soit pour la réalisation des gammes d'étalonnages pour le développement du dosage de nouvelles molécules, soit pour l'analyse d'échantillons en routine.

Il est interfacé avec l'appareil (passeur d'échantillons et cellules optiques).

C'est également le module de création des « méthodes ».

C'est enfin le module utilisé pour les tests de qualification, et de contrôles qualité.

- Multispec® Librairie et Quantification :

C'est le module qui permet de visualiser et de comparer les spectres, de développer les étalonnages et la librairie.

La description de la technique présentée ci-dessus résulte en majeure partie du travail d'appropriation que nous avons réalisé pendant les trois mois suivants l'installation de l'appareil. En effet, certaines notions et définitions ne figurent pas dans le manuel utilisateur livré par Microdom.

II. Etapes préalables à la mise en place du Multispec® à l'UPCC

Suite à l'installation de l'appareil, nous nous sommes familiarisés avec son fonctionnement. Nous avons pu bénéficier du partage d'expérience de l'équipe d'Angers qui dispose d'un recul de deux ans sur l'utilisation de la technique. Parallèlement à l'aspect analytique, nous avons rédigé une feuille de route, pour organiser notre travail, lister toutes les étapes du projet à prévoir et suivre leur état d'avancement.

2.1. Formation initiale et appropriation de l'outil

Une formation initiale d'une journée sur site a eu lieu lors de la livraison et de l'installation de l'appareil par l'équipe technique de Microdom (septembre 2008).

Il s'agissait d'une présentation de l'appareillage et de son entretien, et d'une démonstration des fonctions principales des deux modules « Multispec® Analyse » et « Multispec® Quantification et Librairie ». L'appareil est livré avec un manuel utilisateur.

Au-delà de cette présentation, un travail d'appropriation et de compréhension des détails du fonctionnement du logiciel a été nécessaire.

En effet, l'architecture du système étant fondamentale pour son bon fonctionnement, il faut prendre possession étape par étape : de chaque type de fichiers, de sa fonction, de l'application avec laquelle il s'ouvre, de ses liens avec d'autres fichiers, et les conséquences dynamiques sur l'activité de lecture et d'analyse d'échantillons.

Après la découverte et la description des fichiers, des essais de gammes d'étalonnages et de création de librairie ont été réalisés. L'analyse des dysfonctionnements et des erreurs de système engendrées au début des essais a permis d'affiner la compréhension des liens dynamiques expliqués précédemment.

Ce travail s'est déroulé sur deux mois, en parallèle de l'activité de production de l'unité de préparation.

Le résultat de ce travail d'appropriation sera présenté au paragraphe « III. Module de formation ».

2.2. Recueil d'expériences

Nous avons sollicité nos confrères de Nancy (Mr le Dr J.Vigneron) et d'Angers (Mr le Dr P. Leynia et Mme le Dr C.Devys) afin de pouvoir bénéficier de leurs expériences tant sur le

plan analytique que sur le plan organisationnel. En effet, l'introduction du dosage analytique en routine induit des changements d'organisation.

La première équipe a été retenue pour sa proximité, et pour l'expertise de son pharmacien sur les techniques analytiques. La seconde équipe a été ciblée car elle est à l'origine du développement du Multispec® en partenariat avec Microdom, et possède une expérience et un recul riche en enseignement.

Nous avons pu recueillir des informations :

- sur les problèmes analytiques majeurs liés soit à certaines molécules ou famille de molécules, soit plus spécifiquement au Multispec® (Angers).
- sur les modalités techniques de validation des gammes d'étalonnage (Nancy)
- sur la stratégie de développement et de montée en charge de cette nouvelle activité,
- sur la gestion spécifique de l'assurance qualité.

La présentation de l'activité, des locaux, du circuit des préparations, ainsi que des contraintes de chaque établissement visité a permis de replacer l'activité d'analyse dans son contexte général, et de pouvoir comparer et réfléchir à ce qui serait transposable ou non dans notre propre contexte.

2.2.1. Implantation de la technique analytique dans le circuit de la préparation

Le Tableau I présente les données d'activité et les modalités de fonctionnement des deux sites visités.

Tableau I : compilation du recueil d'expérience, et du mode de fonctionnement des PUI du Centre Paul Papin d'Angers, et de l'Hôpital d'adultes de Brabois CHU de Nancy.

	C. Paul Papin Angers	Hôp. Brabois CHU Nancy	Hôp. Bon Secours CHR Metz-Thionville
Nb de prép./jour	Jusqu'à 200		Jusqu'à 100
Purge des tubulures par le véhicule de perfusion	non	oui	oui
Equipement	2 HFLV ²	1 HFLV	2 isolateurs
Technique analytique	Multispec	FIA ³	Multispec
Réalisation du dosage	Par les préparateurs qui manipulent	Par un technicien de laboratoire	Par un interne, pour le développement
Localisation de l'appareil	En ZAC	Hors ZAC	ZAC pour le développement

² HFLV : hotte à flux d'air laminaire vertical

³ FIA : Flow Injection Analyse

Zone de quarantaine	hotte	Bureau pharmacien	A définir (impossible sous isolateur)
Interprétation des résultats	programme interne interfacé au logiciel de validation des prescriptions	Programme interne non interfacé, avec saisie complémentaire manuelle	A développer
Libération des poches pour dispensation	Préparateurs, sous responsabilité pharmaceutique, après résultats des dosages	Pharmacien, sur rapport d'analyse après dosage	A mettre en place en fonction du circuit retenu
Développement de la technique	Par famille de molécules		A déterminer
Montée en charge de l'activité	A posteriori, sur toute nouvelle gamme validée, avec maintien des contrôles Puis à posteriori sur toutes les molécules avec maintien des contrôles Puis à priori avec allègement des contrôles		A déterminer

Ces deux visites nous ont permis de préparer notre réflexion sur l'évolution du circuit de la préparation, et de nous positionner par rapport à différentes options :

- l'analyse des résultats doit être effectuée par un pharmacien
- la zone de quarantaine ne peut être située sous l'isolateur en raison du risque d'encombrement, ce qui exclu toute possibilité de « réhomogénéisation » et de « reprélèvement » en cas de résultat erroné. Cette zone ne doit ni encombrer la zone de préparation des caisses en direction des services, ni être source d'erreur.
- l'appareil sera maintenu en ZAC pendant la phase de développement.
- Cette localisation sera probablement remise en cause pour le fonctionnement en routine. En effet, si l'appareil est en ZAC, il monopolise un pharmacien dédié exclusivement à cette activité ; si l'appareil est sorti de la ZAC, le pharmacien peut coupler l'activité de dosage avec d'autres activités, mais dans ce cas, le circuit se complique et le temps de mise à disposition risque de s'allonger.

Sur le point particulier de l'interprétation des résultats, les expériences de nos confrères ont guidé notre réflexion sur plusieurs points :

- la nécessité de connaître les volumes de suremplissage des poches utilisées
- la nécessité de connaître le volume des tubulures utilisées pour le prendre en compte dans le calcul du volume réellement contenu dans la poche ; en effet, nous souhaitons continuer à fournir des poches purgées prêtes à poser.

- cependant ces contraintes augmentent avec le nombre de références utilisées ; par conséquent, une réflexion devra être menée pour homogénéiser et diminuer le nombre de références de poches et de perfuseurs utilisés, voire de se diriger vers d'autres dispositifs médicaux.

2.2.2. Apports du recueil d'expérience sur le plan analytique

La lecture des référentiels [30-31] nous a apporté des recommandations générales sur les paramètres à valider pour un dosage analytique, mais il restait des questionnements sur la mise en œuvre pratique de ces textes.

Nous avons bénéficié des recommandations et des acquis des équipes visitées :

- les premières gammes ont été développées dans la famille des sels de platines, en raison de leur simplicité.
- les gammes ont été préparées systématiquement dans du chlorure de sodium 0,9% et du Glucose 5%,
- 3 étalons ont été réalisés par points de gamme d'étalonnage
- le respect du conseil de Mr P.Leynia de développer localement les étalonnages de toutes nos molécules et de construire une méthode propre à notre site.
- les recommandations de Mr J.Vigneron pour la préparation des solutions mères pour les lyophilisats ont été suivies.
- l'enregistrement des astuces et difficultés particulières connues qui nous été expliqués (expl utiliser de préférence le chlorure de sodium pour diluer le cyclophosphamide à cause de la superposition du signal avec le glucose dans l'IR)
- la clarification de certains points précis sur la technique Multispec®, grâce à l'équipe d'Angers
- concernant l'assurance qualité :
 - préparation et congélation d'échantillons d'assurance qualité à analyser systématiquement en début d'activité et en cas d'anomalies de résultats, pour validation avant le passage de l'activité en routine, (avis du CHU de Nancy).
 - interprétation et suivi des résultats du test de banc optique de l'appareil (avis du centre d'Angers).

Cette démarche de recueil d'expériences a permis de préparer l'organisation du développement de l'activité, les procédures successives à mettre en place, parallèlement au développement purement analytique.

2.3. Préparation de l'activité

Une feuille de route a été rédigée, pour lister toutes les étapes du projet à prévoir et suivre l'état d'avancement. La grille est organisée par thématique et a été complétée au fur et à mesure des questions soulevées.

Les Tableau II, III, présentent la grille d'identification des étapes des phases de mise en place, de développement, et un récapitulatif des documents à créer sur l'ensemble des thématiques pour l'assurance qualité.

Tableau II : étapes de mise en place et de développement

Mise en place
<i>appropriation de la technique</i>
recueil d'expériences communication secteur cahier de paillasse diaporama de formation évaluation du diaporama de formation
<i>gammes étalons</i>
liste matériel paillasse, verrerie <i>micropipettes, portoir, vial, tubes hémolyse, fiole jaugée, entonnoir</i> validation des micropipettes liste de matériel pour le Multispec® <i>lampe UV, bidon vidange, vials + bouchons stérilisés</i> organisation du circuit pour la stérilisation des vials et bouchons rédaction de modes opératoires de préparation d'une gamme étalon feuille de calcul pour la validation d'une gamme étalon
<i>interprétation des résultats</i>
- volumes corrigés suremplissage des poches : pesée différentielle plein/vide demande d'information sur le suremplissage des poches Freeflex/lot à Fresenius demande d'information sur le suremplissage des poches Macoperf/lot au CHU Nancy évaluation du volume des tubulures référencées - calculs des concentrations théoriques, réelles, interprétation réalisation d'une feuille de calcul excel.version 1 : validation des concentrations
développement
<i>développement des molécules</i>
gamme médicament en solution (cisplatine) poches tests médicament en solution (cisplatine) contrôle des poches des patients (<i>à postériori</i>), avec maintien des contrôles communication secteur gamme médicament en poudre à reconstituer (gemcitabine) tests reconstitutions de médicament en poudre à reconstituer (gemcitabine)

communication secteur contrôle des poches des patients (<i>à postérieure</i>), avec maintien des contrôles
montée en charge
alternance de campagne des dosages jusqu'à 80% minimum de la production contrôle des poches des patients (<i>à postérieure</i>) par campagne, avec maintien des contrôles communication secteur période test : 80% de la production en temps réel + maintien des contrôles communication secteur modification circuit de préparation passage en routine, allègement des contrôles

Tableau III : récapitulatif des documents pour l'assurance qualité

assurance qualité
formation
diaporama de formation questionnaire de test des connaissances cas pratiques, exercices
procédures
procédure du nouveau circuit de la préparation procédure de dispensation des poches après validation analytique procédure des contrôles qualité journalier, hebdo, mensuel du Multispec® procédure de formation, validation des acquis
modes opératoires
Rédaction d'un mode opératoire de gamme étalon Validation d'une gamme étalon Evaluation du suremplissage des poches macoperf Evaluation du volume d'une tubulure Utilisation du Multispec® Analyse en routine Utilisation du module de validation.xls Export-imports de données vers les macros du module de validation.xls Réalisation d'un prélèvement d'échantillon Validation des résultats journaliers d'assurance qualité Export et suivi des résultats journaliers d'assurance qualité Suivi et analyse de l'activité de contrôle des préparations
base documentaire
feuille de validation de gamme compte rendu journalier d'analyse feuille de suivi mensuel de l'activité de contrôle feuille de suivi annuel de l'activité de contrôle feuille de suivi des résultats journaliers d'assurance qualité

III. Organisation de la formation au sein du secteur UPCC

Un important travail d'appropriation à été nécessaire pour arriver à la maîtrise du système. En effet, le CHR Metz-Thionville ne disposant pas d'un laboratoire de contrôle analytique isolé, nous étions totalement débutants dans cette nouvelle activité de contrôle. Aussi en pareille situation, nous avons trouvé que le manuel d'utilisateur du logiciel fourni par Microdom s'avérait incomplet pour comprendre le fonctionnement du système.

Or en prévision d'une utilisation en routine, les trois pharmaciens du secteur doivent être formés pour pouvoir se remplacer si nécessaire sans perturber ou suspendre l'activité de contrôle.

Ainsi, l'initiative d'un diaporama de formation a donc été prise. Son objectif est de permettre une maîtrise plus aisée et plus rapide du logiciel, à l'aide d'un support mieux adapté. Ce support a été testé en plusieurs étapes lors de la formation des deux pharmaciens du secteur.

3.1. Objectifs

- 1- La formation au Multispec® des pharmaciens du secteur
- 2- L'évaluation du nouveau support de formation. Elle doit permettre d'en montrer la pertinence et l'intérêt, de le compléter ou le modifier encore si besoin.
- 3- La validation d'un module complet de formation comprenant le diaporama pour l'apprentissage, un questionnaire pour l'évaluation des connaissances, et des cas pratiques d'entraînement.

3.2. Matériels

3.2.1 Manuel utilisateur de Microdom

Le manuel a été utilisé pour la découverte et la prise en main du logiciel. Puis, après la création du diaporama de formation, pour vérifier que tous les points obscurs ou insuffisamment développés étaient bien abordés dans le diaporama [32] [33].

3.2.2. Cahier de paillasse

Les notes et diverses questions relevées lors du travail d'appropriation du système ont été consignées dans un cahier de paillasse. Celui-ci a été utilisé pour développer, dans le

diaporama de formation, les points critiques, le détail des étapes difficiles, les risques d'erreurs, et d'alimenter la rubrique « cas pratiques du diaporama ».

3.2.3. Questionnaire d'évaluation des connaissances

Il se compose de 2 parties. La première partie permet de valider les connaissances nécessaires à l'utilisation en routine du Multispec® Analyse (questions 1 à 16 de compréhension et de cas pratiques). La deuxième partie (questions 16 à 27) porte davantage sur l'utilisation du module Multispec® Quantification & Librairie, les définitions de termes techniques, la bonne compréhension de l'architecture et du rangement des différents dossiers et sur les étapes critiques de la création des étalonnages [Annexe 1].

3.2.3. Questionnaire d'évaluation des supports

Un questionnaire d'évaluation en 11 critères des deux types de supports (manuel Microdom et diaporama) a été conçu. Ceux-ci portent essentiellement sur la clarté et l'accessibilité aux informations. La notation va de 1 à 5 (très insuffisant à très satisfaisant).

3.3. Méthodes

3.3.1. Evaluation des connaissances

La formation des deux pharmaciens s'est déroulée comme suit :

- Ils ont reçu dans un premier temps la formation initiale de Microdom® (visite d'une journée sur site), et ont lu le manuel utilisateur Microdom®.
- le questionnaire leur a été soumis (avec accès au manuel)
- les réponses au questionnaire ont été notées sur un barème croissant :
« Non acquis », « faiblement acquis », « moyennement acquis », « acquis »
- le diaporama de formation a été mis à leur disposition
- le questionnaire leur a été soumis à nouveau
- les réponses au 2^{ème} questionnaire ont été notées sur le même barème
- l'évolution des notes aux réponses entre les deux questionnaires ont été comparés
- une réunion de bilan a été organisée. La première partie était dédiée à la correction du questionnaire, aux explications complémentaires. Lors de la deuxième partie, nous avons évalué les deux supports et échangé remarques et commentaires, puis nous avons discuté des améliorations à apporter.

3.3.2. Evaluation des supports

Les questionnaires d'évaluation ont permis de cibler les points problématiques pour la compréhension. Lors de la deuxième partie de la réunion de bilan, les 11 critères d'évaluation des supports ont été notés par les pharmaciens, selon le barème :

« très insatisfaisant : TI », « insatisfaisant : I », « moyennement satisfaisant : MI », « satisfaisant : S », « très satisfaisant : TS ».

Les discussions ont été orientées sur les difficultés rencontrées à la lecture des deux supports, sur les informations manquantes ou mal expliquées.

3.4. Résultats

3.4.1. Questionnaire d'évaluation des connaissances

Le Tableau IV présente l'évolution des acquis des deux pharmaciens en formation sur le Multispec®.

























































Tableau IV : évolution des acquis pour chacun des critères après la formation initiale et après la lecture du diaporama interne

Légende :

- A : acquis
- FA : faiblement acquis
- MA : moyennement acquis
- NA : non acquis

	Formation initiale Manuel Microdom				diaporama			
	NA	PA	MA	A	NA	PA	MA	A
1ère partie : acquisition pour le travail en routine								
système fluide								
fonctions principales de Multispec Analyse®								
fonctions principales de Multispec Quanti&Librairie®								
vérifications du manipulateur à l'allumage de l'appareil								
vérifications par Multispec® à l'allumage de l'appareil								
test des bancs optiques								
définition d'une méthode dans Multispec®								
définition d'une librairie dans Multispec®								
définition d'un étalonnage dans Multispec®								
étapes effectuées par le logiciel lors de d'une analyse								
lien qui permettent le fonctionnement de la méthode								
motifs de dysfonctionnement de la méthode								
connaissance des types de fichiers et navigation								
écran Multispec Analyse, définition des méthodes								
écran Multispec Analyse, analyse								
écran Multispec Analyse, résultat								
archivage des spectres analysés								

2ème partie : acquisition pour le développement

lien et différence entre bibliothèque et librairie		
		
lien et différence entre gamme spectrale et étalonnage		
		
différence entre gamme de recherche et en quanti		
		
différence gamme spectrale et spectre recherche		
		
"discrimination", définition, et fonction		
		
dossiers contenant des spectres		
		
utilisation de la barre d'activité de Quanti&Librairie		
		
spectres utilisés pour 1 étalonnage		
		
spectres utilisés pour 1 librairie		
		
étapes de création d'une méthode		
		
ordre à respecter pour ces étapes, pourquoi		
		
rôle du rangement des fichiers pour le fonctionnement		
		
grandes étapes de la création d'un étalonnage		
		
grandes étapes de la création d'une librairie		
		

Le premier questionnaire a été rempli à l'aide des notes personnelles prises pendant la formation orale et avec accès au manuel Microdom.

Les connaissances sont bonnes dès la formation initiale pour l'utilisation en routine. Le principe de fonctionnement de l'appareil est bien compris, mais quelques insuffisances apparaissent déjà en ce qui concerne le logiciel.

Les connaissances pour travailler en mode « développement » sont clairement insuffisantes à l'issue de la première phase de formation. La quantité importante d'informations délivrées à l'oral est difficile à appréhender en une journée, et beaucoup d'informations sont difficiles à retrouver dans le manuel Microdom®.

La deuxième phase de formation, à l'aide du diaporama, améliore les scores : de 30 à 0 « non acquis », de 11 à 8 « peu acquis », de 5 à 14 « moyennement acquis », de 16 à 40 « acquis ». Mais les connaissances pour le « mode développement » restent à améliorer.

Il résulte de cette formation que, pour le « mode routine » un bon support peut suffire à donner la majeure partie de la formation. Par contre, pour le mode « développement », quelque soit le support, il faut un accompagnement de terrain de type compagnonnage

avec une personne formée pour pouvoir reformuler les concepts complexes, pour repérer les confusions et les corriger. Il faut surtout un temps suffisant pour intégrer toutes les informations et des exercices guidés sur le logiciel pour comprendre et mémoriser tout en pratiquant.

3.4.2. Évaluation des supports

Le Tableau V présente les appréciations données aux deux supports.

Tableau V : notation du Manuel Microdom et du diaporama interne pour chaque critère

Légende : « très insatisfaisant : TI », « insatisfaisant : I », « moyennement satisfaisant : MI », « satisfaisant : S », « très satisfaisant : TS ».

évaluation du support										
	Manuel Microdom					Diaporama				
	TI	I	MS	S	TS	TI	I	MS	S	TS
Lisibilité globale du document			X					X		
Compréhension globale du document			X					X		
Compréhension du fonctionnement de l'appareil				X					X	
Compréhension du fonctionnement du logiciel		X						X		
Compréhension de la gestion des dossiers	X								X	
Accès facile aux différents chapitres			X					X		
Facilité à retrouver une information précise		X						X		
Termes expliqués clairement		X							X	
Fonctions des 2 modules expliquées clairement	X								X	
Signification des icônes facile à retrouver	X								X	
Facilité à suivre une procédure		X						X		
total	3	4	3	1	0			6	5	

Concernant le manuel Microdom, il résulte de la réunion de bilan de formation les points suivants :

- les réponses aux questions de la partie sur l'utilisation en routine proviennent essentiellement des notes prises lors de la formation initiale (orale), mais le manuel est insuffisant.
- le manuel est peu clair surtout pour le développement, inadapté à la formation initiale.

Les commentaires suivants ont été formulés :

- « pas de lien entre les rubriques »,
- « pas de description de la finalité des fonctions »,
- « pas de cheminement logique »,
- « icônes non expliquées dans un lexique »,
- « problème de vocabulaire mal utilisé, mal défini, confusion rapide, et perte des quelques repères de la formation orale »

- « pas de présentation des dossiers »
- « Il manque une présentation générale développée en introduction »

Les appréciations du manuel Microdom donnent 3 critères « très insuffisants », 4 critères « insuffisants », 3 « moyennement satisfaisant », et 1 « satisfaisant ».

Ce manuel est une base intéressante de modes opératoires pour naviguer dans les modules, mais il ne permet pas à un débutant d'appréhender facilement les liens dynamiques et les articulations des 2 modules du logiciel, de prévenir les erreurs types qu'un agent en formation est susceptible de faire, erreurs qui peuvent s'avérer très pénalisantes sur une méthode déjà bien développée.

En ce qui concerne le diaporama, l'amélioration des connaissances et des notations d'appréciation (6 « moyennement satisfaisant », et 5 « satisfaisant ») montrent l'intérêt et la pertinence d'un support de formation complémentaire.

Le diaporama apporte des informations importantes qui ne sont pas présentes dans le manuel Microdom :

- définitions claires des termes, des dossiers, des icônes.
- explications des fonctions des 2 modules
- explications des liens entre les fichiers, du fonctionnement du logiciel

Cependant, cette première version du diaporama n'est pas totalement satisfaisante, les critiques suivantes ont été discutées et améliorées :

- il y a trop de liens hypertextes, et un risque de perdre le fil conducteur de la thématique en cours
- les chapitres sont trop longs et vont rapidement dans du détail de mode opératoire
- il faut créer des niveaux successifs de détails pour chaque chapitre
- le chapitre de présentation des fichiers et des liens de fonctionnement n'est pas suffisamment clair, il nécessite davantage de diapositives avec des schémas conceptuels

Le point critique de la formation est très clairement la compréhension de ce qu'est une méthode : des aiguillages, les liens et risques de confusions entre gammes spectrales, étalonnages, bibliothèque, librairie, les fichiers utiles à chacun et les fichiers utiles autant à l'identification qu'à la quantification.

3.5. Le diaporama de formation

Le diaporama a évolué suite à l'évaluation. C'est cette nouvelle version qui est présentée ici.

Le fichier unique en s'enrichissant est devenu trop volumineux, il a été totalement réorganisé en plusieurs parties distinctes.

Il s'agit d'un dossier complet, comprenant 3 sous-dossiers :

- 1 sous-dossier « utilitaire » avec le masque de fond et les icônes du diaporama

- 1 sous-dossier « blocs de formation » comprenant 6 diaporamas.ppt correspondant aux 6 chapitres de la formation.
- 1 sous-dossier « démarrer » comprenant une note d'utilisation et le diaporama d'accueil de la formation.

Il suffit d'ouvrir uniquement ce diaporama d'accueil pour accéder aux 6 autres, par des liens hypertextes. La navigation est ainsi plus fluide et plus rapide.

Les 6 blocs de formation permettent un retour au diaporama d'accueil via la 1^{ère} diapositive de titre. A la fin de chacun d'eux, on retrouve les significations des icones, les définitions, et le plan détaillé de l'ensemble de la formation.

3.5.1. Première partie : « Accueil »

Elle compte 12 diapositives traitant des objectifs du module de formation, expliquant les icones de navigation, des généralités sur les points à vigilance particulière, le sommaire principal avec les liens hypertextes vers les chapitres (Figure 8), le plan général des 6 chapitres de la formation.

Cette partie comprenait dans la première version le principe général du Multispec®, le fonctionnement général du Multispec®, les liens fonctionnels du système (en 7 diapositives). Ces notions, insuffisamment développées et manquant encore de clarté, font l'objet d'un chapitre à part entière dans la nouvelle version.

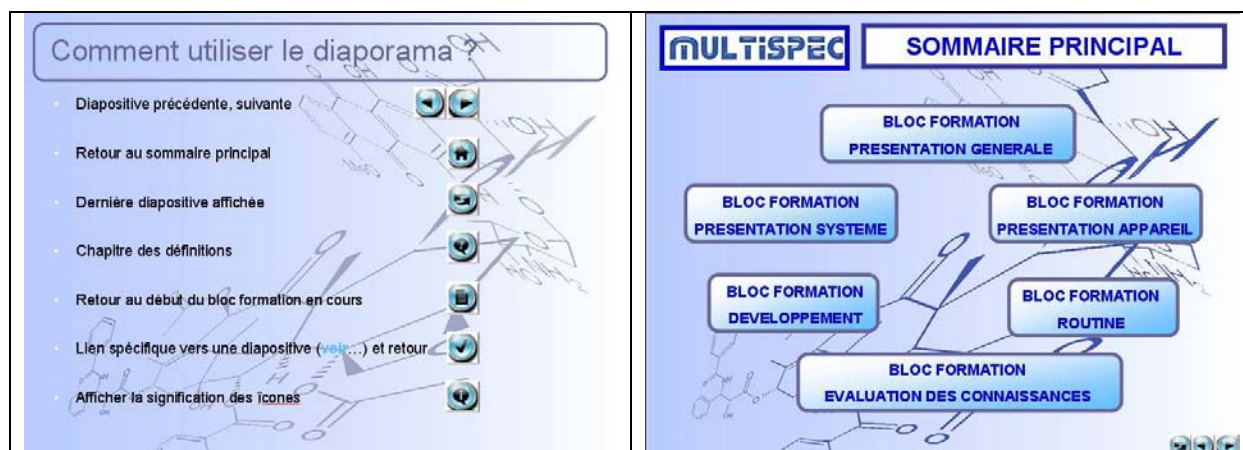


Figure 8 : Diapositives extraites du chapitre d'accueil, signification des icones et sommaire principal

Les liens : l'utilisateur peut naviguer vers la diapositive précédente, suivante (selon les numéros), la dernière diapositive affichée (historiquement). Il peut retourner au sommaire principal à partir de la diapositive titre de chaque chapitre, accéder en permanence aux définitions, au début du bloc formation en cours.

3.5.2. Bloc formation : « présentation générale »

Ce chapitre présente les objectifs de l'analyse par la technique Multispec®, les 2 modules de formation Multispec® Analyse et Multispec® Quantification&Librairie, leurs fonctions, la signification des symboles des barres d'activité, la présentation des principaux écrans utilisés pour chaque module, les fichiers les plus utilisés et leur rangement (Figure 9 et 10).

BLOC PRESENTATION GENERALE	
Principe général	
Fonctionnement général	
Multispec Analyse	Sélection, création de la méthode Saisie des échantillons, départ analyse, tableau de résultats d'analyse
Multispec Quanti&Librairie	Ouvrir 1 gamme spectrale, en recherche ou en quantification Ouvrir une région spectrale, pour la quanti. d'1 molécule ou recherche Paramètres de l'étalonnage Rappel d'un étalonnage Analyse et création d'1 région spectrale Lire un spectre ou une série de spectres
Dossiers C:\Multispec	Analyse Comparaison spectres Étalonnage Gammes Spectrales Librairie Méthodes Régions spectrales Résultats Spectres recherche Tests

Figure 9 : Sommaire du chapitre de présentation générale

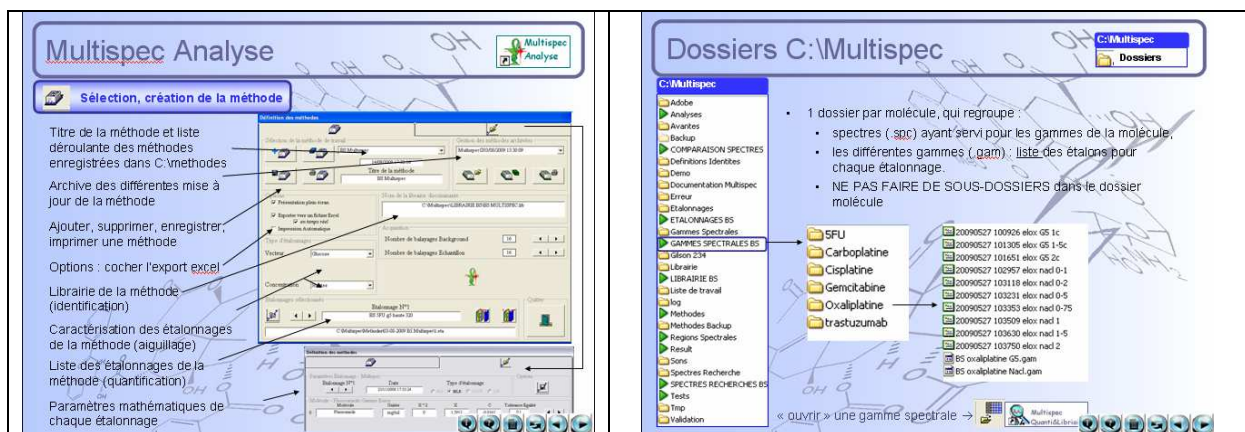


Figure 10 : Diapositives extraites du chapitre de présentation générale


Cette partie est totalement nouvelle par rapport au manuel d'utilisateur de Microdom. Son contenu était présent dans la première version du diaporama, mais il était dispersé tout au long du cheminement, et n'était pas regroupé en un bloc à part entière.

Le questionnaire d'évaluation des connaissances a montré qu'il était nécessaire de formaliser à l'écrit la démonstration des principaux écrans de fonctions des modules faite lors de la formation initiale.

En ce qui concerne la présentation des dossiers et de leur contenu, elle n'est pas faite lors de la formation initiale Microdom. Pourtant le formateur insiste bien sur la nécessité d'un juste rangement des fichiers pour la fonctionnalité du système. Cette présentation était donc importante pour la compréhension ultérieure du chapitre sur le fonctionnement du système. Elle est aussi fortement utile pour savoir où aller chercher chaque type de fichiers et avec quelle application l'ouvrir.

3.5.3. Bloc formation : « présentation système »

Ce chapitre est certainement le plus important. Il débute par les définitions des termes techniques utilisés par le système Multispec® (Figure 11), ce qui était totalement absent du manuel Microdom. En effet, ces notions y sont définies au fur et à mesure qu'elles se présentent dans le texte, mais nous les avons jugées obscures, sources de confusions et cela générerait également une perte du fil conducteur.

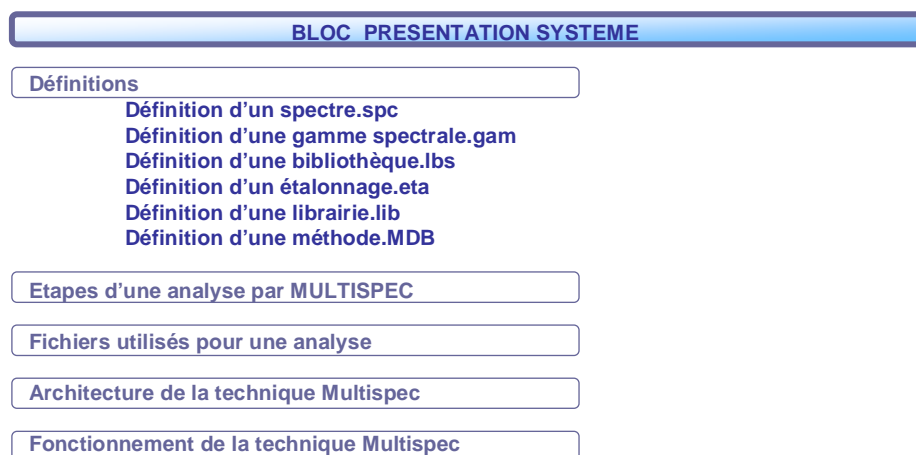

The image shows a table of contents for a chapter titled 'BLOC PRESENTATION SYSTEME'. The title is in a blue header bar. Below it, there are five sections, each in a light blue box with a dark blue border. The first section, 'Définitions', lists five sub-items: 'Définition d'un spectre.spc', 'Définition d'une gamme spectrale.gam', 'Définition d'une bibliothèque.lbs', 'Définition d'un étalonnage.eta', and 'Définition d'une librairie.lib'. The other four sections are 'Etapas d'une analyse par MULTISPEC', 'Fichiers utilisés pour une analyse', 'Architecture de la technique Multispec', and 'Fonctionnement de la technique Multispec'.

BLOC PRESENTATION SYSTEME	
Définitions	Définition d'un spectre.spc Définition d'une gamme spectrale.gam Définition d'une bibliothèque.lbs Définition d'un étalonnage.eta Définition d'une librairie.lib Définition d'une méthode.MDB
Etapas d'une analyse par MULTISPEC	
Fichiers utilisés pour une analyse	
Architecture de la technique Multispec	
Fonctionnement de la technique Multispec	

Figure 11 : Sommaire du chapitre de présentation du système

Les diapositives suivantes ont été les plus longues et les plus complexes à concevoir. Sous forme de schémas, il s'agit d'expliquer le fonctionnement de la technique, les fichiers sollicités, les liens entre ces fichiers, les différents niveaux d'imbrications, les cheminements parallèles et les différences afin d'apporter la meilleure compréhension possible et d'éviter les confusions (exemple : différence entre « bibliothèque » et « librairie », entre « gamme spectrale » et « étalonnage », entre « gamme spectrale » et « spectres recherches », et les liens entre ces fichiers).

Ces notions sont délivrées lors de la formation orale, mais ne se retrouvent pas dans le manuel Microdom. Elles étaient présentées dans la 1^{ère} version du diaporama, mais à l'issue de la 2^{ème} évaluation des connaissances et lors de la réunion de bilan, il

apparaissait qu'elles manquaient encore de clarté, et que ces notions étaient encore mal comprises. D'autres schémas plus clairs, avec davantage d'étapes intermédiaires ont été réalisés.

L'animation et l'apparition progressive des notions aident à la compréhension. Les 4 diapositives suivantes (Figure 13) sont la base de la formation.

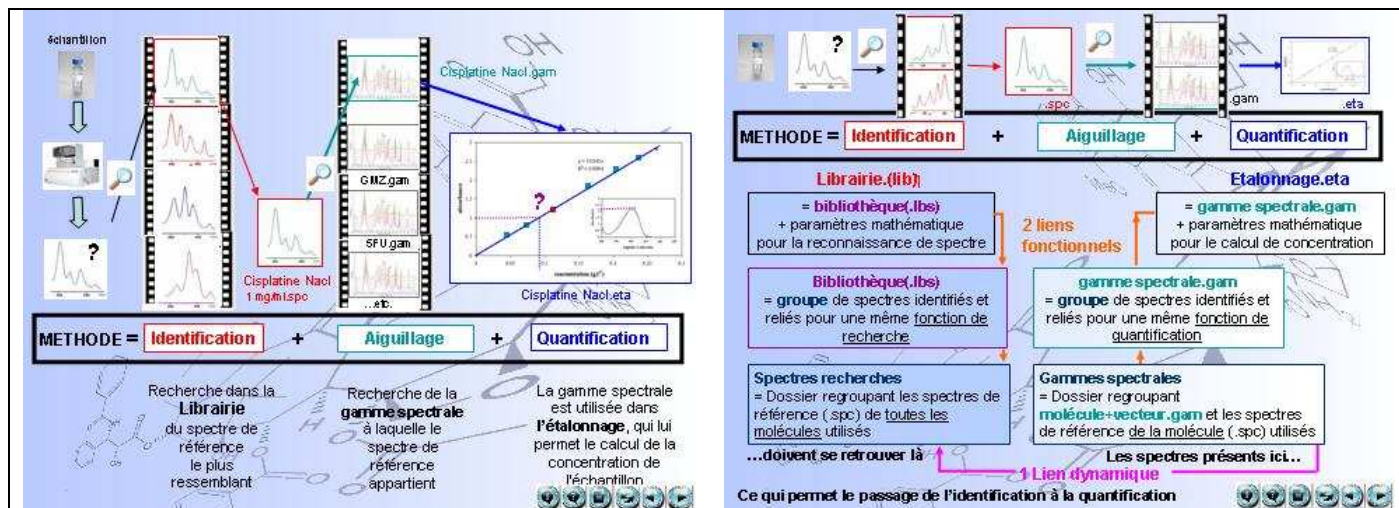


Figure 12 : Diapositives extraites du chapitre de présentation du système

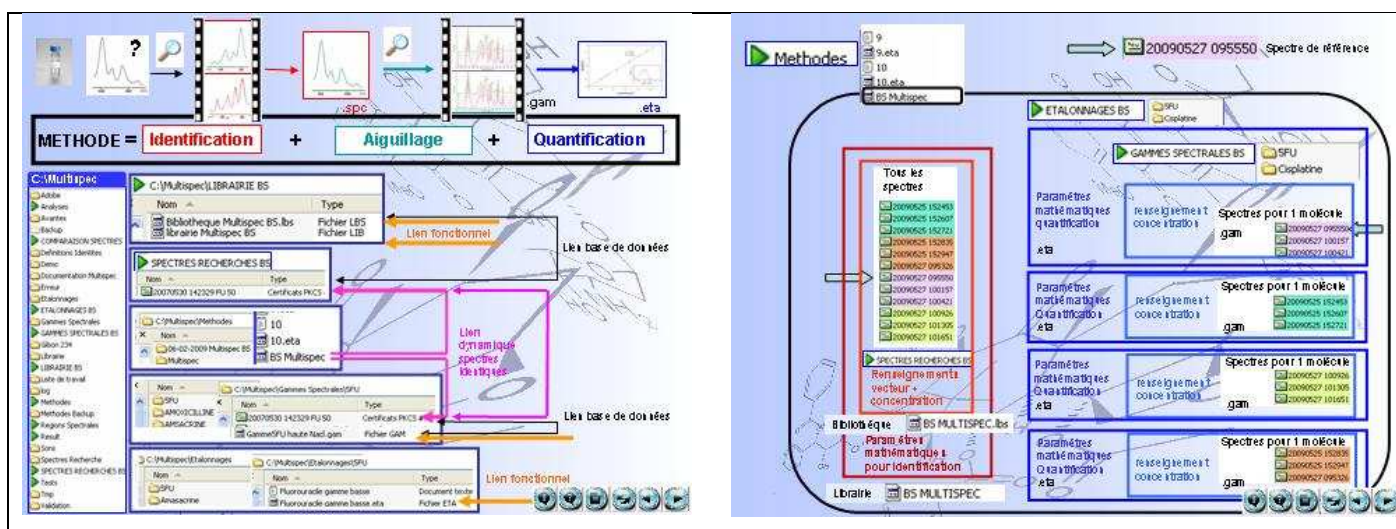


Figure 13 : Diapositives extraites du chapitre de présentation du système

3.5.4. Bloc formation : « Développement »

Le chapitre de développement comporte trois grandes parties : la création d'un étalonnage, la création d'une librairie, et la création d'une méthode.

Cette partie est traitée dans le manuel Microdom mais directement à un niveau de détail qui relève du mode opératoire. Dans la première version du diaporama, ce mode opératoire était plus avec davantage de copies d'écran, de détails et d'explications

pratiques. Mais la compréhension du cheminement complet pour arriver à ce détail opératoire était difficile.

Aussi, l'évaluation des deux supports a mis en évidence 2 améliorations à apporter :

- le volume important de cette partie rend la navigation nébuleuse
- le fait d'aller de suite dans les détails fait perdre le fil conducteur, et le lecteur en formation a du mal à situer où il en est sur la globalité du processus.

Les réponses que nous avons apportées à ces 2 remarques sont les suivantes :

- le découpage du diaporama en plusieurs fichiers comportant chacun moins de diapositives
- la présentation du processus dans son ensemble et pour une progression de l'apprentissage par paliers, l'ajout de niveaux intermédiaires de détails introduits en liens successifs (Figure 14).

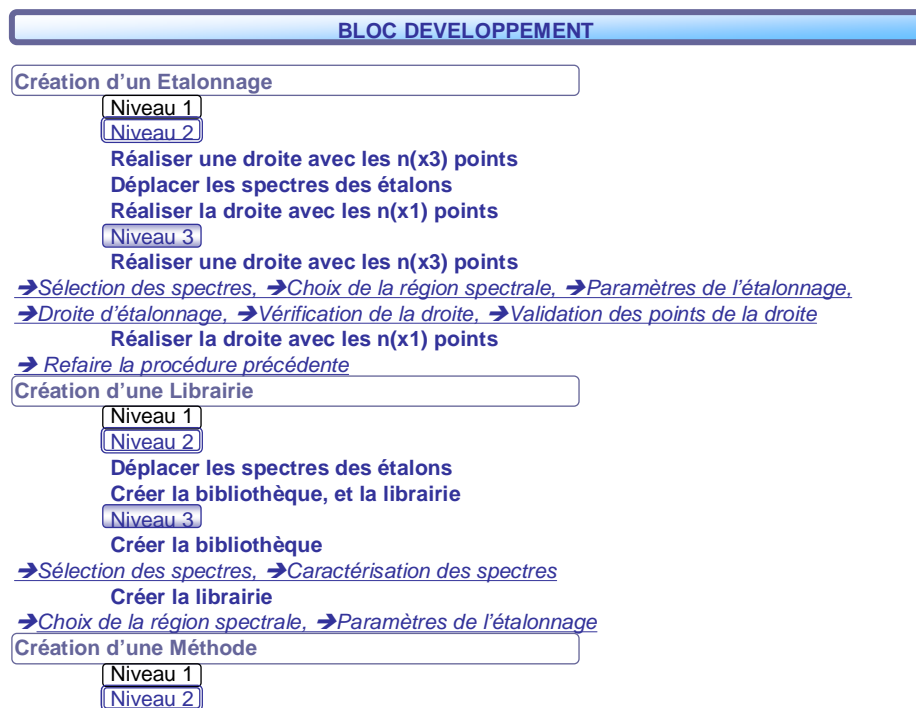


Figure 14 : sommaire du chapitre de formation à l'activité de développement

Entre chaque niveau, le lecteur repasse par une diapositive de plan interactif. Il peut ainsi selon sa préférence, lire transversalement tous les niveaux 1 par exemple, ou lire une partie complète en augmentant les détails de 1 à 3.

Le niveau 1 (1 diapositive) présente les grandes étapes successives de l'ensemble du processus (Figure 15). Le niveau 2 (3 à 4 diapositives) détaille la succession d'actions de chaque étape. Le niveau 3, explique chaque action avec des copies d'écran et des commentaires (Figure 16).

Ce chapitre comporte en définitive 82 diapositives : 28 diapositives de titres qui permettent la navigation et un rappel de l'avancement du lecteur dans le processus, et 14 diapositives de définitions et de rappels du sommaire.

BLOC DEVELOPPEMENT

Création d'un Etalonnage
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Création d'une Librairie
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Création d'une Méthode
Niveau 1 Niveau 2

Acquisition des spectres → **Analyses**

- Pour chaque molécule dans un vecteur
- Créer la gamme spectrale gam
- Créer l'étalonnage.eta
- Créer la bibliothèque.lib
- Créer la Librairie.lib
- Aller chercher la librairie.lib dans
- Ajouter les étalonnages.eta dans
- Renseigner les champs
- vecteur
- concentration
- comme dans la bibliothèque
- Enregistrer la méthode.MDB dans

Figure 15 : Diapositives extraites du chapitre Développement : plan interactif et diapositive de niveau 1

Réaliser une droite avec les n(x3) points

dans

- **Sélection des spectres**: Cocher Utiliser les spectres dans Analyses
- **Choix de la région spectrale**: Choisir la région.mth de la molécule étudiée
- **Paramètres de l'étalonnage**: Choix des paramètres mathématiques à appliquer au groupe de spectres pour calculer la droite
- **Droite d'étalonnage**: Supprimer, pour chaque concentration, les 2 moins bons points
- **Vérification de la droite**: Validation croisée
- **validation des points de la droite**: Noter sur un papier les noms des meilleurs étalons

Réaliser une droite avec les n(x3) points

→ **Sélection des spectres**

- 2ème onglet
- Double cliquer dans la ligne blanche
- Aller chercher les spectres étalons dans Analyses /acquisition gamme, (sélectionner et « ouvrir »)
- Les titres étalons des échantillons (vert) apparaissent (noms entrés lors de l'analyse)
- Renseigner en face (colonne blanche) la concentration correspondante
- Sortir sans sauvegarder la gamme

Figure 16 : Diapositives extraites du chapitre Développement : diapositives de niveaux 2 et 3

3.5.5. Bloc formation : « présentation appareil »

La présentation de l'appareil, du circuit fluide, des vérifications journalières, est bien expliquée lors de la formation initiale par Microdom. Les vérifications d'assurance qualité et de maintenance sont présentes dans le manuel Microdom, mais manquent de détails concrets, chiffrés, et il n'y a pas de rappel écrit sur les différents éléments de l'appareil. Ce court chapitre est un rappel écrit qui vient compléter le module de formation (Figure 17). Mais il doit être accompagné d'une présentation visuelle de l'appareil en fonctionnement.

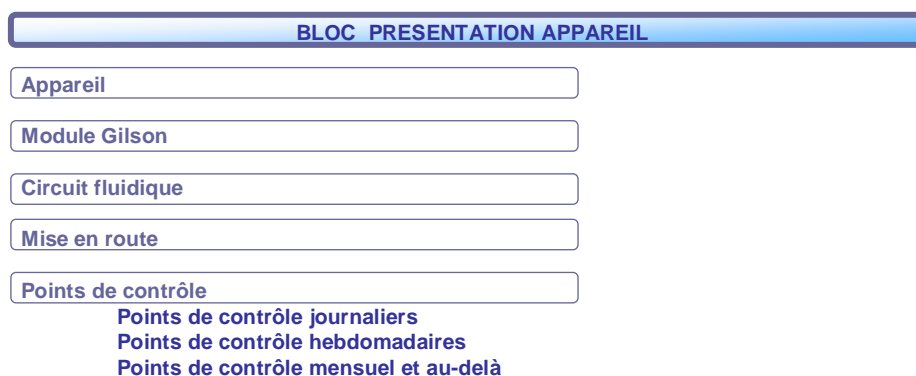


Figure 17 : Sommaire du chapitre de formation sur l'appareil Multispec

3.5.6. Bloc formation : « présentation routine »

Ce chapitre doit permettre au manipulateur débutant de faire des analyses en routine de façon autonome, en suivant les indications suivantes (Figure 18).

La mise en route de l'appareil, la saisie d'une séquence d'analyse sont présentées lors de la formation initiale à l'oral. L'explication sur le test de banc optique manque dans le manuel Microdom

L'exportation et l'interprétation des résultats sont des étapes d'organisation interne avec des programmes internes (classeur Excel®, cf. 3^{ème} partie), et sont amenés à être mis à jour en fonction de l'évolution des programmes et de l'organisation du circuit de la préparation.

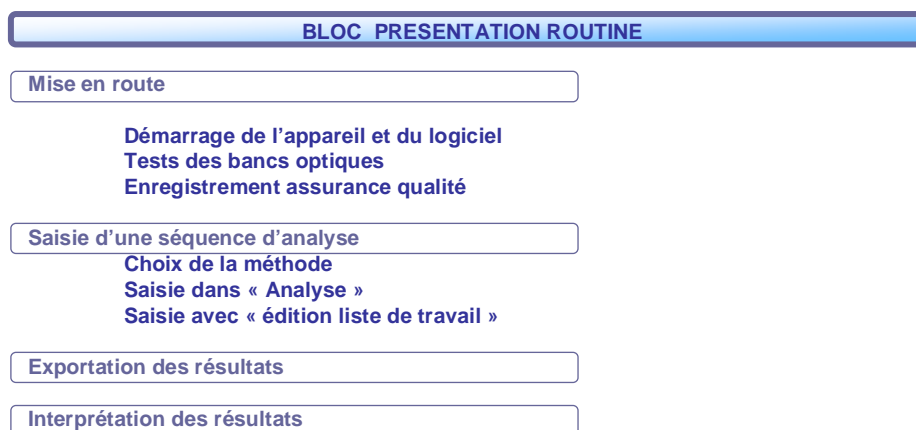


Figure 18 : Sommaire du chapitre de formation sur l'activité de routine

3.5.7. Bloc évaluation des connaissances

Cette partie reprend le questionnaire d'évaluation soumis aux deux pharmaciens en formation sous format papier. Il est ajouté au diaporama pour compléter le module de formation et pour avoir une présentation uniforme.

Elle dissocie la validation des acquis sur l'activité de routine et de développement qui ne demandent pas les mêmes niveaux de connaissances (Figure 19). Chaque diapositive de question est suivie directement de sa réponse.

Dans la troisième partie, l'exercice principal consiste essentiellement en la reprise du processus de création d'étalonnage en développement mais avec un exemple précis (cisplatine). Il pourra être enrichi avec un exemple de molécule avec gamme haute et gamme basse, et création d'une nouvelle région spectrale (cytarabine).

Les cas pratiques sont des exemples d'erreurs observées et des réponses trouvées (essentiellement en routine).

Ce bloc est encore en construction et pourra être enrichi au fur et à mesure de la pratique.

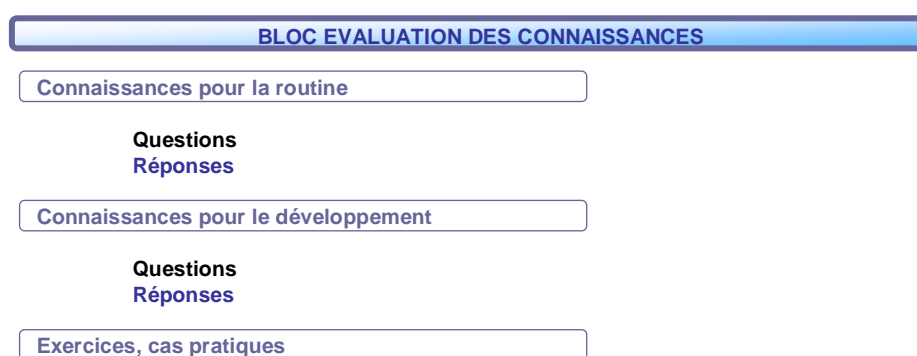


Figure 19 : Sommaire du chapitre d'évaluation des connaissances

3.6. Discussion

Le point critique de la formation est la compréhension de ce que représente une méthode : les aiguillages, les liens et les risques de confusions entre gammes spectrales, étalonnages, bibliothèque, librairie, les fichiers propres à chacun et les fichiers utiles autant à l'identification qu'à la quantification.

Le manuel Microdom est un bon recueil de modes opératoires, mais il nous est apparu insuffisant pour les équipes débutantes en contrôle analytique. Il manque une grande partie d'introduction, et une présentation plus générale des processus d'analyse d'une part et de développement d'autre part.

Le diaporama vient combler ces carences.

L'élément nouveau majeur par rapport au manuel Microdom est le bloc de présentation du système, absent du manuel et il s'avère indispensable.

Les diapositives de schémas conceptuels pour la compréhension d'une méthode ont été les plus travaillées, les animations aident beaucoup à faire des parallèles entre les notions qui se ressemblent (base de données, puis application de paramètres

mathématiques en identification comme en quantification) mais en veillant à ne pas les confondre.

Les ajouts essentiels à la bonne appropriation, sont les définitions des termes techniques, la présentation des dossiers C:\Multispec, et les 3 niveaux successifs de détails dans les modes opératoires du bloc de développement.

Le nouveau diaporama est très volumineux, mais le découpage en blocs de formation permet de séquencer l'apprentissage : les nombreuses diapositives titres permettent au lecteur de situer régulièrement son avancement dans le programme de formation.

Au niveau de l'évaluation des connaissances et des supports, nous devons souligner la présence d'un biais. En effet, les questions ont été rédigées par rapport aux problèmes rencontrés lors de l'appropriation de la technique. Ces problèmes étaient révélateurs des carences du manuel Microdom, donc les questions sont orientées.

Cependant, l'évaluation des connaissances a pour but de valider les acquis par la formation, et donc il était important de vérifier que les points complexes étaient compris. Ceux-ci nécessitaient plus d'explications, comme le montre l'amélioration des résultats aux tests de connaissances.

Le diaporama a été conçu à partir du constat des difficultés rencontrées lors de la première appropriation. Il est donc orienté pour un manipulateur novice, alors que le manuel Microdom est davantage destiné à un manipulateur déjà expérimenté qui connaît le système et qui sait précisément quelle information il recherche.

Le diaporama constitue un complément de formation initiale à soumettre aux débutants en parallèle du livret d'utilisateur Microdom qui se rapproche plus d'un recueil de modes opératoires.

Dans tous les cas, le diaporama viendra compléter une formation orale mais ne peut totalement s'y substituer.

TROISIEME PARTIE

Développement de l'activité de contrôle des préparations de cytostatiques à l'UPCC

I. Introduction

Une fois le fonctionnement du système Multispec® maîtrisé, nous avons pu organiser le développement analytique et la validation des molécules nécessaires à la réalisation des premiers dosages des préparations d'anticancéreux du secteur UPCC (Tableau VI).

Nous détaillerons la méthodologie adoptée pour la réalisation des premières gammes étalons, deux exemples de protocole de réalisation de ces dernières, à partir d'un médicament en solution prête à l'emploi, et d'un médicament en poudre à reconstituer.

Nous envisagerons la planification de la montée en charge de l'activité d'analyse vers l'objectif final qui est le contrôle libératoire des préparations.

Nous présenterons les résultats obtenus, nous discuterons des problèmes rencontrés au cours du développement, des limites de la méthode, des modifications du circuit des préparations qui ont dû être envisagées.

Tableau VI : étapes de développement

développement
développement des molécules
gamme médicament en solution (cisplatine) poches tests médicament en solution (cisplatine) contrôle des poches des patients (<i>à postériori</i>), avec maintien des contrôles communication secteur gamme médicament en poudre à reconstituer (gemcitabine) tests reconstitutions de médicament en poudre à reconstituer (gemcitabine) communication secteur contrôle des poches des patients (<i>à postériori</i>), avec maintien des contrôles
montée en charge
alternance de campagne de dosages jusqu'à 80% minimum de la production contrôle des poches des patients (<i>à postériori</i>) par campagne, avec maintien des contrôles communication secteur période test : 80% de la production en temps réel + maintien des contrôles communication secteur modification circuit de préparation passage en routine, allègement des contrôles
interprétation des résultats
feuille de calcul excel.version 1 : validation des concentrations feuille de calcul excel.version 2 : validation de l'identification + concentrations <i>avec saisie des infos / fiche fab, imports manuels des résultats Multispec®</i> feuille de calcul excel.version 3 : automatisée au maximum plus réseau <i>avec macros d'imports chimio et Multispec®</i> demande d'imports supplémentaires et modifiés à Computer Engineering® coopération pour implantation des macros rattachement au réseau du poste informatique relié à l'appareil rattachement au réseau électrique secours du poste informatique relié à l'appareil

II. Matériels et méthode

1.1. Matériels pour la réalisation des gammes étalons

1.1.1. Multispec®

Le système Multispec® (Microdom SA, Taverny, France) est constitué d'un spectromètre IRTF Avatar 380 de la société Thermo Nicolet, couplé à un spectromètre UV-Visible. Les deux cellules à circulation thermostatée à 25°C sont alimentées par un passeur d'échantillon automatique, Autoinjector 234 Gilson (capacité 65 flacons de 1,5 ml à septum). Le système est piloté par l'application, Multispec Analyse® [32] développée pour l'environnement windows-XP.

1.1.2. Logiciel Chimio®

Le logiciel Chimio® (Computer Engineering, France) possède des fonctions qui nous ont permis d'établir la liste des molécules à développer prioritairement : nous avons procédé à l'édition de requêtes statistiques de consommations, et à l'édition de l'ordonnancier.

1.1.3. Isolateur

Nous avons utilisé l'isolateur rigide en dépression (A.R.FL. France) du secteur UPCC habituellement utilisé pour la préparation des gélules d'anticancéreux. L'objectif était de réaliser les étalons dilués dans des conditions satisfaisantes de protection et de dispersion vis-à-vis du risque chimique.

1.1.4. Micropipette

Pour la réalisation des gammes étalon, nous avons commandé deux micropipettes Nichipet EX CE 1000, (100-1000 µl) et (1-10 ml) de Nichiryo Co. Nous les avons qualifiées par un test de 30 pesées successives pour les prises de volumes suivants : 100 µl, 500 µl et 1000 µl, et 1 ml, 5 ml, 10 ml.

1.1.5. Petit matériel

Nous avons rassemblé tout le matériel nécessaire aux manipulations de dilution, soit auprès du laboratoire de biologie de l'établissement, soit par des commandes spécifiques :

- vials d'analyse en verre de 1,5 ml fournis par Microdom, et portoir polypropylène,
- pointes pour micropipette de 100 µl à 1000µl stériles et avec filtre,
- tubes à centrifuger coniques en polypropylène, de 50 ml et 14 ml,

- flacons en verre teintés de 30 ml
- tube à hémolyse en verre 6ml
- fiole jaugée 20 ml et 50 ml

1.1.6. Produits

Pour chaque molécule étudiée, nous avons travaillé avec les flacons de spécialité utilisés pour la fabrication :

- Fluorouracil Teva® 5g
- Carboplatine Faulding® 600mg
- Cisplatine Teva® 50mg
- Oxaliplatine : Eloxatine® Sanofi 50mg
- Gemcitabine Mylan® 1000 mg
- Cytarabine : Aracytine Pfizer® 2000mg
- Etoposide Teva® 200mg
- Doxorubicine Teva® 50mg
- Paclitaxel : Taxol® Bristol Myers Squibb 300mg
- Cyclophosphamide : Endoxan® Baxter 1000mg
- Vincristine Faulding® 2mg
- Docétaxel: Taxotère® Aventis 20mg
- Trastuzumab : Herceptin® 150mg (Roche)
- Rituximab : Mabthéra® 100mg (Roche)
- Glucose Lavoisier® 250 ml
- Chlorure de Sodium Lavoisier® 250 ml

1.1.7. Grille Excel de transfert et d'interprétation des résultats

Une grille.xls (Microsoft® 2003) a été créée pour effectuer les calculs de volume corrigé des poches, de concentrations corrigées qui en découlent, afin de pouvoir les comparer avec les résultats obtenus avec le Multispec® et interpréter l'analyse.

Cette feuille a évolué avec les besoins progressifs engendrés par les réflexions et décisions successives.

Elle sera présentée dans les résultats.

1.2. Méthodes

1.2.1. Travaux préparatoires

✓ Hierarchisation des molécules à développer

Une analyse rétrospective de l'activité de préparation a été réalisée sur une période de 3 mois jugée suffisamment représentative (01/08/08 au 15/11/08) à partir de l'ordonnancier extrait du logiciel Chimio®. Ceci nous a permis d'identifier les molécules les plus souvent préparées, les concentrations minimales et maximales réalisées, les différents volumes et les types de contenants.

Parallèlement à cette analyse, un travail de recensement des besoins des Hôpitaux du bassin mosellan en matière de contrôle des préparations a été réalisé par une étudiante en pharmacie en vue d'une offre de sous-traitance des contrôles. Ceci nous a permis de réajuster la liste des molécules à développer en conséquence.

A partir de cette double analyse nous avons pu faire ressortir :

- La liste des molécules à développer en priorité en fonction de notre propre activité et des résultats de l'enquête mentionnée ci-dessus.
- Les bornes des gammes de concentrations nécessaires à couvrir, et la concentration cible (la plus souvent réalisée) à situer en milieu de gamme.

✓ Calcul du volume exact d'une poche purgée

Nous avons évalué le suremplissage des poches Macoperf® (Macopharma) (chlorure de sodium 100ml, 250ml, 500ml, soit 3 lots) par une méthode de pesée différentielle.

Les poches sont pesées pleines, puis purgées. La manipulation consiste à clamber la tubulure (pour bloquer l'écoulement après le remplissage de la chambre compte-gouttes) et à aspirer le volume [tubulure + chambre à demi remplie] à la seringue. Puis la poche est totalement vidée, puis pesée vide.

Les données suivantes sont relevées :

- ⇒ poids de la poche pleine (sans emballage) (mg)
- ⇒ volume de purge (ml)
- ⇒ poids de la poche vide (mg)
- ⇒ volume de la poche (ml, avec une densité égale à 1)
= poids de la poche pleine – poids de la poche vide
- ⇒ suremplissage (ml) = 100 - volume de la poche
- ⇒ volume de la poche après purge = volume de la poche - volume de purge

Nous avons également mesuré le volume de purge pour les poches avec tubulures montées (type Macoperf®) et les différents types de tubulure utilisés (VS10, MS 70,...) pour nos préparations.

Cette étape est nécessaire pour connaître le volume réellement contenu dans la poche de solvant au moment où le principe actif est injecté afin de pouvoir calculer la concentration corrigée et pouvoir interpréter les résultats d'analyse issus de Multispec®.

Pour l'évaluation du suremplissage des poches Freeflex® (Fresenius) nous nous sommes adressés au fournisseur qui a pu nous fournir des certificats d'analyse avec cette information pour la plupart des lots demandés.

1.2.2. Gammes d'étalonnage

Chaque étalon est réalisé en triple exemplaire, et chaque gamme est réalisée à la fois dans du glucose 5% et dans du chlorure de sodium 0,9% [22].

Toutes les manipulations sont effectuées sous un isolateur en dépression, permettant de garantir la protection de l'environnement et du manipulateur sans être contraint par la stérilité de l'enceinte.

✓ Préparation d'une gamme d'étalonnage d'un médicament en solution (prête à l'emploi)

Dans la mesure du possible la gamme est réalisée directement avec la solution commerciale sans dilution intermédiaire, mais quand les concentrations cibles ne le permettent pas, une solution mère est réalisée à l'aide de la micropipette 1-10 ml.

La préparation des étalons, dilutions successives de la solution mère, se fait à l'aide de la micropipette 100-1000µl, pour obtenir un volume total de 1 ml.

✓ Préparation d'une gamme d'étalonnage d'un médicament à reconstituer (poudre)

La poudre n'est pas reconstituée dans les conditions d'utilisation en vue de son administration au patient (à l'aide d'une seringue) mais selon la méthode suivante :

1. Le flacon est décapsulé et débouché,
2. Une petite quantité du solvant recommandé est versée pour dissoudre la poudre,
3. Le flacon est rebouché pour permettre d'agiter la solution
4. La totalité du volume est prélevé à la seringue et versé dans une fiole jaugée
5. Un volume de solvant est versé dans le flacon,
6. Le flacon est rebouché pour permettre d'agiter la solution à nouveau et bien récupérer toute la poudre,

7. Le volume est transféré dans la fiole jaugée
8. l'opération (7) est renouvelée plusieurs fois
9. le volume de la fiole est ajusté jusqu'au trait de jauge
10. Le fiole est bouchée et agitée.

Les manipulations successives seront effectuées de façon très précautionneuse avec les molécules fragiles telles que sont les anticorps monoclonaux.

On obtient ainsi une solution mère. Les étapes suivantes sont identiques à celles observées pour les produits prêts à l'emploi.

✓ Validation d'une gamme

La validation de l'équation de la droite d'étalonnage dans Multispec® :

Le coefficient de corrélation calculé de la droite d'étalonnage doit être supérieur ou égal à 0,9999.

La validation croisée est basée sur un système itératif, et évalue la qualité de l'équation de la droite. Elle est exprimée par le rapport [écart-type de prédiction/ écart-type des écarts (Se)]. Pour la validation de la gamme, celui-ci doit être inférieur à 2.

La validation de la gamme d'étalonnage

La concentration cible utilisée est située en milieu de gamme.

Une solution mère est réalisée puis on en extrait dix aliquots qui sont analysés.

L'opération est réalisée trois fois, dans la mesure du possible sur trois flacons de spécialité différents (voire de n° de lot différents), sur trois jours différents.

Pour les produits peu consommés ou trop coûteux, les aliquots de validation sont réalisés avec le même flacon de spécialité que pour la gamme d'étalonnage. S'ils sont peu stables, les 3 séries sont réalisées dans la même journée.

Pour chaque série, sont calculés :

- La concentration moyenne de la série (\bar{x}_1)
- L'écart-type de la moyenne de la série (s_1)
- La justesse (valeur absolue de la différence entre la concentration théorique et la concentration obtenue)
- La répétabilité : coefficient de variation ($CVr = s_1 \times 100 / \bar{x}_1$)

Pour chaque gamme sont calculés :

- La concentration moyenne des 3 séries (\bar{x}_3)
- L'écart-type de la moyenne des 3 séries (s_3)
- La moyenne de la justesse des 3 séries
- La reproductibilité : coefficient de variation intermédiaire ($CVi = s_3 \times 100 / \bar{x}_3$)

2.1.3. Estimation des biais liés aux manipulations

✓ Purge de la tubulure

La technique de purge est protocolisée, cependant nous avons voulu vérifier quelle pouvait être l'incidence de la pratique individuelle des manipulations. Aussi, après la validation de la première gamme, nous avons réalisé un test sur une période de 5 jours. Son but était de valider et d'uniformiser si nécessaire la technique de purge de la tubulure (chambre compte-gouttes à demi-remplie, clamp avant l'écoulement à l'extrémité distale de la tubulure), et de vérifier la technique d'homogénéisation de la poche et ainsi que celle du prélèvement de l'échantillon.

Nous avons choisi le cisplatine comme molécule de référence, car le développement de sa gamme était simple et peu coûteux, et les préparations réalisées à partir de la solution de cisplatine sont rapides et faciles.

Nous avons retenu 60 poches Macoperf PVC NaCl 0,9% 100ml du même lot.

Nous avons tout d'abord, évalué le volume de suremplissage et le volume de purge des poches du lot utilisé (30 poches). Puis Le test consistait à faire réaliser la même préparation (cisplatine 30mg, soit 30ml dans une poche de 100 ml de NaCl 0,9% PVC Macoperf) plusieurs fois dans la même journée aux deux manipulateurs en poste de préparation.

Chacun des 2 manipulateurs en poste ont réalisé 3 poches-tests insérées dans l'activité quotidienne. Puis nous avons réalisé les dosages de ces poches-tests.

Celles-ci ont été conservées au réfrigérateur après l'analyse, afin de pouvoir expliquer d'éventuels écarts (remplissage de la chambre compte-gouttes, bulles dans la tubulure) et pouvoir refaire un prélèvement par exemple après réhomogénéisation.

2.1.4. Dosage des préparations destinées aux patients

Les dosages sont d'abord réalisés à *posteriori*, à la fin de l'activité, tout en maintenant l'ensemble des mesures de contrôle habituelles en cours de fabrication (double lecture des volumes, contrôle des reliquats) et sans modifier le circuit des préparations.

Au fur et à mesure de la validation des gammes d'étalonnage, et afin de ne pas surcharger l'activité de préparation, une planification des molécules analysées est réalisée sous forme de « campagnes ».

Exemple :

Nous avons commencé en juin 2009 par le Cisplatine puis en juillet nous avons enchaîné par carboplatine / oxaliplatine / 5FU, suivi en août par trastuzumab / gemcitabine / doxorubicine. En septembre, la série suivante sera rituximab / vincristine/ docetaxel / étoposide.

III. Résultats

Nous présenterons l'outil d'interprétation des résultats des dosages que nous avons créé sur Excel® (Microsoft®).

3.1. Classeur « Validation.xls »

La version finale, destinée à l'utilisation en routine, est un classeur sous Excel (.xls) comprenant 8 feuilles.

Une version est conservée vierge, et une copie est effectuée chaque mois avant d'être complétée. Elle est renommée sous le format « Validation mois année.xls »

Le classeur comprend :

- 1 feuille de résultats d'analyse : 1 par semaine
- 2 feuilles utilitaires intitulées « poches » et « tubulures » qui servent à créer des matrices de calculs et renseigner le plus automatiquement possible la feuille de résultats. Ce sont des bases de données, associant d'une part les poches utilisées du lot en cours, à leur volume de suremplissage propre et d'autre part les tubulures à leur volume propre.
- 1 feuille intitulée « recap » qui permet de récapituler les résultats des 4 semaines, pour en extraire des statistiques d'activité.
- 1 feuille intitulée « analyse » qui regroupe les statistiques de l'activité mensuelle : nombre de dosages/molécule et répartition des pourcentages d'écart d'analyse.

La feuille de résultats d'analyse est découpée en 3 grandes parties.

Elle utilise de nombreuses formules, et elle est conçue pour être alimentée en temps réel avec les informations extraites du logiciel Chimio® et du module Multispec® grâce à un système de macros dans Excel®.

Comme toutes les préparations ne sont pas dosées (diffuseurs, seringues), il y a un excédent de lignes de préparation issues de Chimio® par rapport à Multispec®. Par conséquent, l'import de Chimio® est filtré, et seules les lignes correspondant à un n° d'ordonnancier dans Multispec® sont importées de Chimio®.

3.1.1. Première partie « récapitulatif imprimable »

Cette 1^{ère} partie (colonnes A à P) (Figure 19) est la partie principale qui compile toutes les informations nécessaires à la validation de la préparation. Son format est calibré pour l'impression sur une page au format paysage.

Elle se compose de 2 colonnes d'identification du prélèvement, 6 colonnes concernant l'identification de la molécule et de son vecteur (solvant de perfusion), 6 colonnes pour la quantification, avec l'intégration du volume corrigé et le calcul de la concentration théorique, l'écart entre celle-ci et le résultat obtenu par le Multispec®.

La majeure partie des cases se remplit automatiquement grâce à des formules d'identité avec les cases d'import des données Chimio® (.txt ou .xls) et des données Multispec® (.txt ou .xls) et avec des formules de calculs. Seules les cases de conformité d'identification et de « ok dispensation » sont à renseigner à l'aide de listes déroulantes incluant les choix « conforme ; non-conforme » et « dispensée ; détruite ».

PRELEVEMENT		IDENTIFICATION MOLECULE				QUANTIFICATION					VALIDATION	
Date	N°ordon	Molécule	Vecteur	Valeur Rech.	conformité identification	dose (mg)	vol. corrigé (ml)	conc. Th (mg/ml)	Analyse (mg/ml)	écart (%)	conformité dosage	OK Disp
00/01/00	0	0	V	0	V	0	0	0	0,0000	#####	#/VALEUR!	
00/01/00	0	0	V	0	V	0	0	0	0,0000	#####	#/VALEUR!	

Figure 20 : Partie récapitulatif imprimable du tableau de résultat

3.1.2. Partie utilitaire de calcul

Cette partie (Figure 21) est celle qui doit être renseignée au regard de la fiche de fabrication.

Actuellement, la quantité de renseignements à saisir est tributaire des imports supplémentaires que nous avons demandés à Computeur Engineering.

A l'avenir, l'information sur le type de poche utilisée sera importée de Chimio®, une matrice créée avec la feuille utilitaire « poche », permettra de renseigner automatiquement le volume de suremplissage correspondant.

Le « volume qsp » (colonne S), correspond au volume inscrit sur l'étiquette de la poche. Il correspond au calcul suivant = volume de la poche - volume de solvant éventuellement retiré + volume de principe actif.

Le choix de la tubulure est saisi à partir d'une liste déroulante, et par le même système de matrice avec la feuille utilitaire « tubulure », le volume correspondant se renseigne automatiquement.

	Q	R	S	T	U
1					
2					
3					
4					
5					
6	INFORMATION PREPARATION				
8	poche	surrempl. poche	volume (qsp)	choix tubulure	volume tubulure
10	0	#N/A			#N/A
11	0	#N/A			#N/A

Figure 21 : Partie utilitaire de calcul

3.1.3. Partie « imports »

La dernière partie (Figure 22 et Figure 23) est composée des imports d'informations depuis Multispec® et Chimio®.

Certains imports de l'ordonnancier de Chimio® nécessitent une traduction. En effet, par exemple : « 250.00mg » est inexploitable en l'état. Aussi, par plusieurs formules successives, il sera traduit en « 250,00 » qui sera reliée à la colonne de la dose (1^{ère} partie) et qui sera utilisable à ce format dans des formules de calculs. Ces imports alimentent la 1^{ère} partie automatiquement.

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	IMPORT MULTISPEC								
9	Date	Heure	Identite Molécul	Recherch	Molécule	Vecteu	Concen	Valeur	Re
10									
11									

Figure 22 : Import des résultats d'analyse obtenus avec Multispec®

	AE	AH	AM	AN	AO	AR	AS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	IMPORT CHIMIO				REFORMULATION IMPORT		
9	N°	Date	Produit	Dose	Solvant vecteur	dose	vecteur
10						#/ALEURI	#/A
11						#/ALEURI	#/A

Figure 23 : Imports des informations extraites de l'ordonnancier de Chimio®

3.2. Validation des gammes d'étalonnage

A ce jour, les étalonnages de 12 molécules sont validés.

Pour chaque molécule, un tableau compile résume les résultats de validations des gammes d'étalonnage qui ont été réalisées à ce jour.

Il présente pour chaque molécule dans son solvant :

- La concentration théorique (Conc. Th) utilisée pour les tests de validation, en général, elle se situe en milieu de gamme
- la longueur d'onde (λ) utilisée pour la quantification (la plupart du temps, celle de Multispec®)
- la linéarité de la gamme (bornes de concentration)
- les paramètres mathématiques expliqués ci-dessous et Figure 24.
- la répétabilité CVr
- la reproductibilité CVi
- la justesse

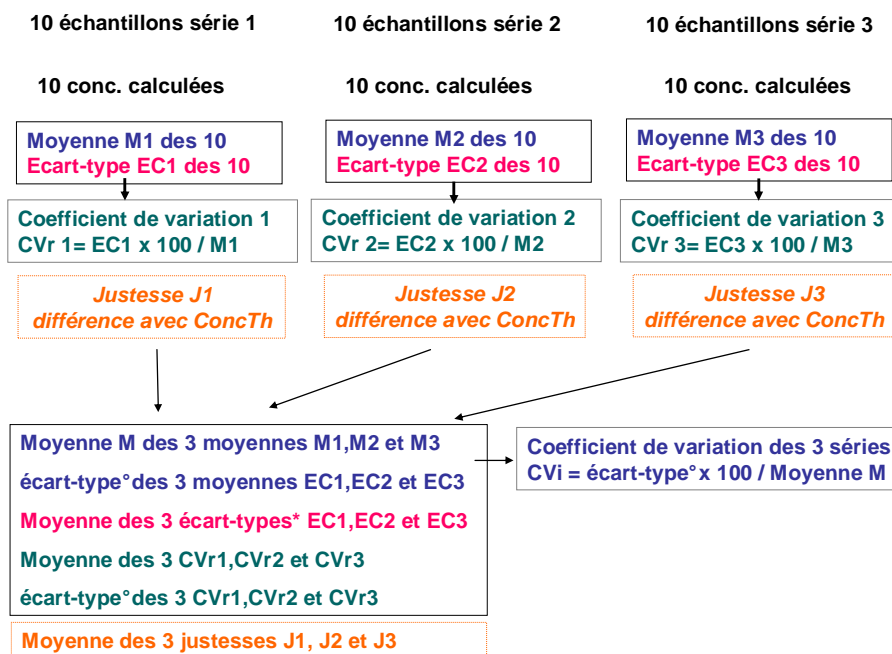


Figure 24 : Explication des calculs de validation d'une gamme d'étalonnage

Le tableau présenté en annexe 2) récapitule les résultats expliqués ci-dessous pour les 12 molécules :

- Conc. calculée Moyenne des 3 moyennes de la concentration des 3 séries
- écart-type° écart-type de la concentration moyenne obtenue sur les 3 séries, dispersion de la moyenne
- Ecart-type* moyenne des 3 écart-types de chacune des 3 séries, moyenne des dispersions
- Répétabilité CVr Moyenne des coefficients de variation des 3 séries (CV= écart-type x 100 / moyenne)
- Reproductibilité CVi Coefficient de variation entre les 3 séries (= écart-type° de la moyenne des 3 séries x 100 / moyenne des 3 séries)
- justesse capacité à se rapprocher le plus possible de la valeur cible : à ...mg/ml près

5-Fluorouracil

3 étalonnages ont été réalisés sur le modèle des étalonnages Multispec® : 1 étalonnage appelé gamme basse et associant des échantillons dans du glucose 5% et du NaCl 0,9%, et 2 gammes hautes, l'une dans du G5% et l'autre dans du NaCl 0,9% (Tableau VII).

Tableau VII : étalonnages de 5-Fluorouracil

5FU G5/NaCl – basse						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1 mg/ml	320 nm	0,4 à 2 mg/ml			99,02%	98,40%

5FU G5-haute						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
5 mg/ml	320 nm	2 à 12 mg/ml			99,05%	96,07%
5FU NaCl-haute						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
5 mg/ml	320 nm	2 à 12 mg/ml			98,72%	97,78%

Carboplatine

2 gammes spectrales ont été réalisées : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais seul l'étalonnage dans le glucose 5% a été réalisé en raison de l'incompatibilité du carboplatine dans le NaCl 0,9%. L'utilité de la gamme spectrale dans le NaCl 0,9% est uniquement pour détecter une erreur de solvant (Tableau VIII).

Tableau VIII : étalonnage de carboplatine

Carboplatine – G5%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
2,5 mg/ml	230 nm	0,2 à 5mg/ml			99,20%	96,59%

Oxaliplatine

2 étalonnages ont été réalisés : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais la validation a été faite avec 3 séries dans le G5% uniquement car c'est celui utilisé pour les préparations (1 seule série dans le NaCl%, car compatible mais non utilisé) (Tableau IX).

Tableau IX : étalonnages d'oxaliplatine

Oxaliplatine –G5						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1mg/ml	218 nm	0,1 à 2mg/ml			98,54%	97,56%
Oxaliplatine –NaCl						
Conc. Théor.	détection	linéarité	1 série de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1mg/ml	218 nm	0,1 à 2mg/ml			98,94%	x

Cisplatine

2 gammes spectrales ont été réalisées : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais seul l'étalonnage dans le NaCl 0,9% a été réalisé (incompatibilité du G5%, utilité uniquement pour détecter une erreur de solvant) (Tableau X).

Tableau X : étalonnage de cisplatine

Cisplatine-NaCl 0,9%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,2mg/ml	210 nm	0,05 à 0,4mg/ml		répétabilité (CVr)	98,88%	98,26%

Etoposide

2 étalonnages ont été réalisés : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais la validation a été faite avec 3 séries dans le NaCl uniquement car c'est celui utilisé pour les préparations (1 seule série dans le G5%, car compatible mais non utilisé) (Tableau XI).

Tableau XI : étalonnages d'étoposide

Etoposide –NaCl						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,3mg/ml	285nm	0,05 à 1mg/ml		répétabilité (CVr)	99,47%	99,73%
Etoposide –G5						
Conc. Théor.	détection	linéarité	1 série de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,3mg/ml	285nm	0,05 à 1mg/ml		répétabilité (CVr)	99,61%	x

Paclitaxel

2 étalonnages ont été réalisés : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais la validation a été faite avec 3 séries dans le NaCl uniquement car c'est celui utilisé dans nos pratiques pour les préparations (1 seule série dans le G5%, car compatible mais non utilisé) (Tableau XII)

Tableau XII : étalonnages de paclitaxel

Paclitaxel –NaCl						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,5mg/ml	250nm	0,1 à 1mg/ml		répétabilité (CVr)	99,68%	97,56%
Paclitaxel –G5						
Conc. Théor.	détection	linéarité	1 série de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,5mg/ml	250nm	0,1 à 1mg/ml		répétabilité (CVr)	99,60%	x

Gemcitabine

2 gammes spectrales ont été réalisées : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais seul l'étalonnage dans le NaCl 0,9% a été réalisé (G5% : incompatibilité) (Tableau XIII).

Tableau XIII : étalonnage de gemcitabine

Gemcitabine- NaCl 0,9%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
5mg/ml	302nm	1 à 10mg/ml			98,79%	99,85%

Trastuzumab

2 gammes spectrales ont été réalisées : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais seul l'étalonnage dans le NaCl 0,9% a été réalisé (incompatibilité du G5%, utilité uniquement pour détecter une erreur de solvant) (Tableau XIV).

Tableau XIV : étalonnage de trastuzumab

Trastuzumab- NaCl 0,9%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1,5mg/ml	220nm	0,3 à 3mg/ml			99,31%	99,76%

Doxorubicine

2 étalonnages ont été réalisés : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais la validation a été faite avec 3 séries dans le G5% uniquement car c'est celui utilisé pour les préparations (1 seule série dans le NaCl 0,9%, car compatible mais non utilisé) (Tableau XV).

Tableau XV : étalonnages de doxorubicine

Doxorubicine -G5						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1mg/ml	300nm	0,1 à 2mg/ml			98,58%	98,58%
Doxorubicine -NaCl						
Conc. Théor.	détection	linéarité	1 série de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1mg/ml	300nm	0,1 à 2mg/ml			99,09%	x

Cyclophosphamide

2 étalonnages ont été réalisés : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais la validation a été faite avec 3 séries dans le NaCl uniquement car c'est celui utilisé pour les préparations (1 seule série dans le G5%, car interférences dans l'IR) (Tableau XVI).

Tableau XVI : étalonnages de cyclophosphamide

Cyclophosphamide –NaCl						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
4mg/ml	208nm	1 à 10mg/ml			98,96%	99,57%
Cyclophosphamide –G5						
Conc. Théor.	détection	linéarité	1 série de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
4mg/ml	208nm	1 à 10mg/ml			99,22%	x

Rituximab

2 gammes spectrales ont été réalisées : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais seul l'étalonnage dans le NaCl 0,9% a été réalisé (incompatibilité du G5%, utilisé uniquement pour détecter une erreur de solvant) (Tableau XVII).

Tableau XVII : étalonnage de rituximab

Rituximab- NaCl 0,9%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1,3 mg/ml	235nm	0,5 à 4mg/ml			99,37%	99,66%

Vincristine

2 gammes spectrales ont été réalisées : dans du Glucose 5% et du NaCl 0,9%, mais seul l'étalonnage dans le NaCl 0,9% a été réalisé car c'est celui utilisé pour les préparations (pas de série dans le G5% car non utilisé) (Tableau XVIII).

Tableau XVIII : étalonnage de vincristine

Vincristine – NaCl 0,9%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,02mg/ml	215nm	0,001 à 0,04mg/ml			98,00%	95,69%

Docetaxel

1 étalonnage a été réalisé : dans du Glucose 5% uniquement car c'est celui utilisé pour les préparations (une seule série dans le G5%, et pas de série dans le NaCl 0,9%, car non utilisé et coûteux) (Tableau XIX).

Tableau XIX : étalonnage de docétaxel

Docétaxel – G5%						
Conc. Théor.	détection	linéarité	1 série de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
0,5mg/ml	233nm	0,1 à 1mg/ml			99,39%	x

Cytarabine

3 gammes spectrales ont été réalisées : 1 dans du NaCl 0,9% pour permettre l'identification du solvant mais sans créer l'étalonnage correspondant, et 2 dans le G5%, en distinguant 2 types d'étalonnages, un de concentration dite « haute » et un de concentration dite « basse », en modifiant la longueur d'onde de détection (Tableau XX).

Tableau XX : étalonnages de cytarabine

Cytarabine –G5 haute						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
10mg/ml	298nm	2 à 17mg/ml			99,06%	98,81%
Cytarabine –G5 basse						
Conc. Théor.	détection	linéarité	3 séries de 10 échantillons	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
1mg/ml	270nm	0,1 à 2			98,89%	98,89%

Par rapport aux étalonnages Multispec®, nous avons réalisé quelques modifications.

A propos du 5-fluorouracil, nous avons modifié la longueur d'onde pour la quantification. En effet pour la gamme haute dans l'IR, nous avons rencontré des problèmes de justesse. La longueur d'onde correspondant au pic d'absorbance dans l'UV donnait un signal saturé. Par conséquent, nous avons dû créer une nouvelle région spectrale (320nm) qui correspond au début du pic, et utilisable pour les deux gammes (concentration haute et basse). Il s'avère que les problèmes de justesse étaient liés à un volume de solution insuffisant arrivé au niveau du faisceau IR (les étalons ont été réalisés avec un volume total de 1 ml et le prélèvement pour l'analyse en IR nécessite 1,2ml). Nous avons gardé la région spectrale à 320nm, car les valeurs de validation sont équivalentes.

Pour la cytarabine, la borne inférieure de la gamme spectrale de Multispec® ne couvre pas certaines concentrations utilisées dans nos préparations. En créant l'étalonnage correspondant à notre borne inférieure nous nous sommes rendus compte que la longueur d'onde pour la quantification de la cytarabine n'est bien adaptée que pour les concentrations comprise entre 2 et 20 mg/ml. Nous avons donc créé une

nouvelle région spectrale (270nm), et réalisé des étalonnages de type concentrations hautes et basses.

Concernant les résultats de validation, tous nos coefficients de variation CVr sont inférieurs à 2% (bonne répétabilité) et les CVi sont inférieurs à 5% (bonne reproductibilité). Pour la justesse, l'écart entre la concentration calculée et la concentration théorique varie de 0,13% à 3,96%. Cependant, cet écart est de 8,5% pour la vincristine, mais la valeur cible étant très faible (0,02mg/ml), une bonne justesse et une bonne répétabilité sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Nous allons procéder à de nouveaux tests avec une longueur d'onde à 240nm pour améliorer la justesse.

La justesse de l'étalonnage pour le paclitaxel dans le glucose 5% n'est que de 9,4%. Mais les tests de validation ont été réalisés sur une seule série. Ce résultat n'a pas de conséquences pratiques car cet étalonnage a pour objectif de pouvoir détecter une erreur de solvant.

A l'heure actuelle, avec 14 molécules validées et sur la base de la période d'activité de préparation de 3 mois (01/08/08 au 15/11/08) on peut dire que :

- 77% de la production est candidate au dosage (exceptée les préparations conditionnées en seringues ou en diffuseurs, et excepté l'inflximab, le ganciclovir, ou l'amphotéricine liposomale par exemple que nous préparons également)
- sur la production de poches, avec les 12 molécules validées, nous pouvons envisager d'en doser 72%.

3.3. Etude des biais liés aux manipulations

3.3.1. Evaluation du volume de suremplissage des poches utilisées pour les poches-test de cisplatine

Nous avons procédé par pesée différentielle sur 30 poches Macoperf PVC de chlorure de sodium 0,9% de 100 ml). Le Tableau XXI présente les résultats obtenus.

Tableau XXI : évaluation du volume de suremplissage et du volume de purge.

lot 09C10C	poids plein (mg)	volume purgé (ml)	poids vide (mg)	volume poches (ml)	Suremplissage (ml)	Volume de poche après purge (ml)
moyenne	149,12	15,12	39,99	109,13	9,13	94,01
ecart- type	1,12	0,42	0,47	1,17	1,17	1,20

Le suremplissage de ce lot de poche est de 9 ml. Nous pouvons souligner les faibles écart-types notamment pour le poids de la poche vide. Nous pouvons envisager par la suite, de procéder par une méthode non destructive, en conservant cette donnée, et en l'appliquant à d'autres lots.

Par ailleurs, le faible écart-type obtenu pour la mesure du volume de purge, montre qu'il est possible d'obtenir, avec le bon geste, un volume répétable donc fiable.

3.3.2. Evaluation du biais lié à la technique de purge

Nous avons dosé 30 poches-test de cisplatine :

- de 30 mg dans 1 poche Macoperf PVC de chlorure de sodium 0,9% de 100 ml.
- Soit 30 mg dans un volume de 124 ml, qui correspond au calcul suivant :
= volume de la poche (lot 09C10C, soit 109 ml) - volume de purge (soit 15ml) + volume de cisplatine (soit 30ml)

La valeur théorique cible était donc 0,2419 mg/ml. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau XXII. Les lignes en caractères gras et italique correspondent à un deuxième dosage réalisé suite au 1^{er} résultat erroné.

Tableau XXII : résultats des dosages de poches-test de cisplatine

n°poche	manipulateur	Concentration théorique	Concentration corrigée	concentration. calculée	% écart
HN1,11	HN	0,2300	0,2419	0,2360	2,4390
CT1,11	CT	0,2300	0,2419	0,2439	-0,8268
HN2,11	HN	0,2300	0,2419	0,2429	-0,4134
CT2,11	CT	0,2300	0,2419	0,2408	0,4547
HN3,11	HN	0,2300	0,2419	0,2350	2,8524
CT3,11	CT	0,2300	0,2419	0,2463	-1,8189
AC1,11	AC	0,2300	0,2419	0,2396	0,9508
AC2,11	AC	0,2300	0,2419	0,2489	-2,8938
AC3,11	AC	0,2300	0,2419	0,2439	-0,8268
AC3,11+frigo	AC	0,2300	0,2419	0,2445	-1,0748
VN1,11	VN	0,2300	0,2419	0,2469	-2,0670
VN2,11	VN	0,2300	0,2419	0,2475	-2,3150
VN3,11	VN	0,2300	0,2419	0,2387	1,3229
CT1,12	CT	0,2300	0,2419	0,2422	-0,1240
SB1,12	SB	0,2300	0,2419	0,2368	2,1083
CT2,12	CT	0,2300	0,2419	0,2467	-1,9843
SB2,12	SB	0,2300	0,2419	0,2410	0,3721

n°poche	manipulateur	Concentration théorique	Concentration corrigée	concentration. calculée	% écart
CT3,12	CT	0,2300	0,2419	0,2443	-0,9921
SB3,12	SB	0,2300	0,2419	0,2447	-1,1575
HN2,13	HN	0,2300	0,2419	0,2412	0,2894
JF3,13	JF	0,2300	0,2419	0,2387	1,3229
HN3,13	HN	0,2300	0,2419	0,2616	-8,1439
HN3,13B	HN	0,2300	0,2419	0,2429	-0,4134
OC1,14	OC	0,2300	0,2419	0,2425	-0,2480
JF1,14	JF	0,2300	0,2419	0,2398	0,8681
OC2,14	OC	0,2300	0,2419	0,2423	-0,1654
JF2,14	JF	0,2300	0,2419	0,2336	3,4312
OC3,14	OC	0,2300	0,2419	0,3080	-27,3253
OC3,14B	OC	0,2300	0,2419	0,2491	-2,9764
JF3,14	JF	0,2300	0,2419	0,2418	0,0413
JF1,15	JF	0,2300	0,2419	0,2365	2,2323
JF2,15	JF	0,2300	0,2419	0,2383	1,4882
JF3,15	JF	0,2300	0,2419	0,2365	2,2323
HN1,15	HN	0,2300	0,2419	0,2715	-12,2365
HN1,15B	HN	0,2300	0,2419	0,2393	1,0748
HN2,15	HN	0,2300	0,2419	0,2460	-1,6949
HN3,15	HN	0,2300	0,2419	0,2373	1,9016

La moyenne de la concentration des 30 poches réalisées est de 0,2417 mg/ml. L'écart minimum observé entre la valeur théorique et la valeur calculée était de 0,0413%, et l'écart maximum de 3,43%.

Sur ces 30 poches, 3 présentaient un écart plus important au premier dosage. Elles ont été réhomogénéisées et un second prélèvement a été analysé. Les écarts ont évolué de +8,14% à +0,41%, de +27% à +2,97% et de +12,23 à +1,07%, confirmant un problème d'homogénéisation lors de la préparation.

La justesse et la reproductibilité des résultats permettent de conclure que les techniques de purge et de prélèvement sont maîtrisés et que l'impact du manipulateur est négligeable. Nous avons inséré les poches-test dans l'activité de préparation pour avoir au maximum des conditions de préparations représentatives de la réalité. Cependant, il faut souligner que lors de ce premier test, les manipulateurs ont probablement porté une attention plus particulière lors de la préparation de ces poches-tests et au prélèvement. Nous pouvons nous attendre à des écarts de dosage un peu plus importants avec le passage du dosage en routine.

Comme l'ont souligné nos confrères [3], dans notre test, l'homogénéisation est également la cause majeure des écarts de dosage.

3.4. Dosage des préparations destinées aux patients

Les dosages des poches de perfusion destinées aux patients ont été réalisés à *posteriori*, en dehors du temps de préparation et sans conséquence sur la libération de la préparation ni sur le délai de dispensation.

Plusieurs « campagnes » ont été réalisées, au fur et à mesure de la validation des étalonnages. Les premières molécules étaient substituées chaque mois par de nouvelles, pour ne pas surcharger l'activité (Figure 25).

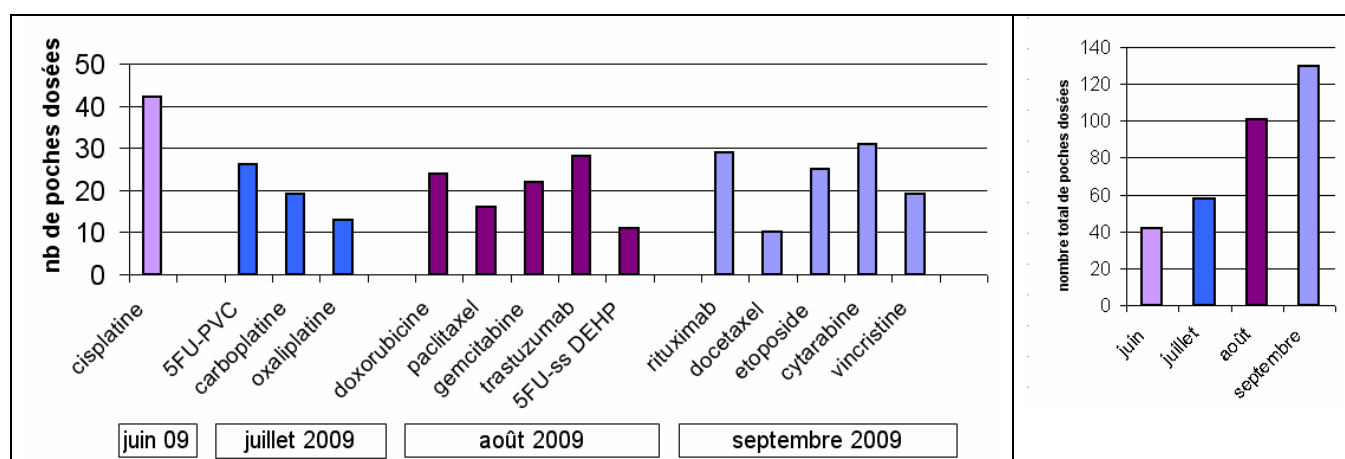


Figure 25 : organisation des campagnes de dosages entre juin et septembre 2009

3.4.1. Cisplatine

Durant le mois de juin 2009, 44 poches ont été dosées.

L'identification de la molécule et du vecteur a été conforme dans 100% des cas.

Les écarts de concentration entre la valeur théorique et la valeur calculée suivent la répartition suivante :

Tableau XXIII : répartition des écarts de dosage des poches de cisplatine

	Nombre de dosage
entre 0 et 5% d'écart	42
entre 5 et 10% d'écart	2
entre 10 et 15% d'écart	0
non-conformité (>15%)	0

3.4.2. Carboplatine / oxaliplatine / 5-Fluorouracil (5FU)

Pendant le mois de juillet 2009, 58 poches ont été dosées.

A cette période, la grille de recueil et d'interprétation des résultats développés sous Excel® n'en était qu'à la première version et ne comportait que les informations (volume de suremplissage et volume de purge) concernant les poches PVC (type Macoperf®). Par conséquent, seules les préparations de 5FU dans les poches Macoperf PVC ont été dosées. Ceci ne représentait qu'une partie (environ 50%) des poches de 5FU fabriquées. Ce choix a également permis une montée en charge moins conséquente, en pleine période de congés annuels.

Des poches de 5FU dans des poches sans DEHP (type Freeflex®) ont été dosées le mois suivant, une fois la grille Excel® modifiée et complétée.

L'identification de la molécule et du vecteur a été conforme dans 100% des cas.

Les écarts de concentration entre la valeur théorique et la valeur calculée suivent la répartition suivante :

Tableau XXIV : répartition des écarts de dosage des poches de carboplatine / oxaliplatine / 5FU

	5FU	carboplatine	oxaliplatine	total
Nombre de dosage	26	19	13	58
entre 0 et 5% d'écart	4	16	0	20
entre 5 et 10% d'écart	18	0	10	28
entre 10 et 15% d'écart	3	2	3	8
non-conformité (>15%)	1	1	0	2

Les 2 résultats non conformes concernent une poche de 5FU (à 16,45%), et une poche de carboplatine (à 33%). A cette phase de notre étude, et s'agissant d'une analyse à *posteriori*, aucune étape de quarantaine avant la libération des préparations n'était mise en place. Nous n'avons donc pas pu réaliser de second prélèvement sur ces poches.

Mais les contrôles en cours de fabrication (contrôles visuels de volumes) et en fin d'activité (contrôle des reliquats de flacons) étaient conformes les jours de préparation de ces poches.

Par conséquent, les causes d'erreurs évoquées (résultats trop concentrés) ont été une purge excessive (arrêt tardif de l'écoulement à la roulette, élimination de bulle d'air) ou une mauvaise homogénéisation. Ce pourrait être, également, un mauvais rinçage de l'aiguille avant le prélèvement, ou une erreur de prélèvement sans changer l'aiguille et la seringue.

Ces résultats montrent que plus de 82% des dosages ont un écart inférieur à 10%. Les résultats sont meilleurs avec le carboplatine et équivalents pour le 5FU et l'oxaliplatine.

3.4.3. Doxorubicine / paclitaxel / gemcitabine / trastuzumab

L'extension des dosages à ces molécules a nécessité un travail préalable pour l'interprétation des résultats. En effet, le paclitaxel nécessite des dispositifs sans DEHP, et donc il a fallu :

- obtenir le volume de suremplissage des poches Freeflex® correspondantes (Informations obtenues pour les lots en cours auprès du laboratoire Fresenius®)
- mesurer le volume des perfuseurs utilisés : Fresenius® MS70, VS10, CodanSet®, Lifecare 5000 Pump Set Hospira®, Intrafix® SafeSet BBraun.
- faire évoluer le fichier Excel® d'interprétation des résultats, afin de pouvoir sélectionner le type de poche et le type de tubulure utilisés pour chaque préparation, et le volume correspondant pour le calcul de la concentration théorique cible.

Durant le mois d'août 2009, 101 poches ont été dosées (Tableau XXV).

L'évaluation des volumes de suremplissage des poches Freeflex® nous a permis d'inclure le dosage des poches de 5FU préparées avec ce type de contenant en complément des dosages précédemment réalisés en poches PVC (juillet 2009).

L'identification a posé problème pour le trastuzumab dans 5 cas : il s'agit d'une confusion avec le rituximab. Cette difficulté est connue ; les anticorps monoclonaux, dosables grâce à une reconnaissance dans l'IR, ont des spectres très proches.

Les écarts de concentration entre la valeur théorique et la valeur calculée se répartissent de la manière suivante :

Tableau XXV : répartition des écarts de dosage des poches de doxorubicine / paclitaxel / gemcitabine / trastuzumab/5FU

	doxorubicine	paclitaxel	gemcitabine	trastuzumab	5FU	total
Nombre de dosage	24	16	22	28	11	101
entre 0 et 5% d'écart	12	8	11	18	11	60
entre 5 et 10% d'écart	12	6	3	4	0	25
entre 10 et 15% d'écart	0	2	0	1	0	3
non-conformité (>15%)	0	0	8	5	0	13

Les cinq résultats non-conformes du trastuzumab sont dûs à une identification erronée. Cependant, il est possible dans le Multispec® de « forcer » l'identification, c'est-à-dire, d'orienter volontairement la reconnaissance vers la molécule souhaitée (sélection de la molécule dans une liste déroulante). Ensuite, le calcul de la concentration est réinitialisé à partir de ce choix.

Les résultats du dosage après identification forcée sont conformes (< 5% d'écarts).

Les huit résultats non-conformes de la gemcitabine, ont été enregistrés, dans les 3 derniers jours de la campagne. L'identification était conforme, mais la concentration calculée a chuté de 5mg/ml en moyenne à environ 3mg/ml puis 1,5 mg/ml.

La gemcitabine présente deux pics d'absorption, un à 1070nm (IR) et un à 305nm.

En visualisant les spectres des dosages non-conformes et en les comparant aux dosages conformes du début de campagne, ou aux spectres de référence, il apparaissait nettement que le niveau d'absorbance était bien inférieur dans l'IR tout en gardant l'allure spectrale (identification correcte), et en étant superposable dans l'UV-visible. Aucun problème similaire n'était présent pour les autres molécules analysées (dosage dans l'UV-visible).

Par conséquent, nous avons posé l'hypothèse d'un problème d'acquisition du spectre dans l'IR.

Après quelques tests sur le Multispec®, nous avons pu confirmer l'anomalie dans le domaine de l'infrarouge. En effet, un phénomène d'accumulation de morceaux des septums des vials d'analyse avait bouché la cellule IR. Le passage normal de la solution d'échantillon était entravé, d'où la baisse du signal. La cellule IR a été remplacée, et cinq dosages supplémentaires de gemcitabine ont été réalisés. Les écarts observés pour les cinq échantillons étaient inférieurs à 5%. Les confusions entre trastuzumab et rituximab étaient également liées à l'endommagement la cellule IR et à l'écrasement du tracé dans ce domaine spectral (domaine qui permet de différencier les anticorps monoclonaux les uns des autres). Nous n'avons plus rencontré cette erreur par la suite.

3.4.5. Bilan des dosages

Les résultats des dosages effectués sur ces trois premiers mois de mise en place de la technique Multispec®, donnent de bons résultats.

Contrairement à l'expérience du Centre Paul Papin d'Angers, pour qui la mise en place de cette technique avait permis de réfléchir aux pratiques et d'observer une courbe d'apprentissage [20][22], les résultats que nous avons obtenus ont plutôt tendance à confirmer nos pratiques.

Des erreurs de dosages ne sont apparues qu'au troisième mois de « campagne » de test.

Il y a plusieurs explications à cela :

1. Le démarrage a été programmé avec des molécules simples, c'est-à-dire des solutions prêtes à l'emploi, non visqueuses, sans excipient complexe, appartenant à des familles de molécules sans caractéristiques de forte ressemblance spectrale. Puis il y a une augmentation de la complexité des molécules analysées au fur et à mesure des campagnes.
2. L'enrichissement progressif de la librairie de la méthode avec de plus en plus de molécules (notamment de molécules ayant des allures spectrales proches)

augmente le risque d'identification erronée. Des difficultés sont à prévoir avec la famille des antracyclines une fois complète et avec les vinca-alkaloïdes.

3. Le nombre d'échantillons analysés a augmenté à chaque campagne, ce qui augmente aussi la probabilité d'avoir des non-conformités.
4. Le nombre de prélèvements augmentant et la fréquence devenant quotidienne, les manipulateurs se sont habitués, et ont peut être progressivement porté une moindre attention à ces nouveaux gestes. Les résultats reflètent alors davantage la réalité de la préparation.
5. Cette phase de test de notre étude a pour but de faire émerger des erreurs d'identification, de dosage, afin de pouvoir les analyser, en rechercher les origines et apporter un maximum de solution avant d'introduire le contrôle analytique dans le processus de préparation en routine.

Bilan

Discussion

Conclusion

Etat d'avancement de la mise en place de la technique au sein de l'UPCC

Un an après la livraison de l'appareil Multispec®, nous pouvons dresser un premier bilan. Sur le plan analytique, avec 12 molécules validées, nous pouvons envisager de doser 72% des poches de perfusions préparées à l'UPCC. Sur le plan de l'organisation du secteur, les premiers mois de test de dosages ont mis en évidence des contraintes qu'il faut intégrer de la meilleure façon possible à l'activité actuelle du secteur.

Le Tableau XXVI présente la feuille de route établie au démarrage de la phase test afin d'évaluer l'état d'avancement de notre travail. De nouveaux questionnements ont émergé pendant cette période et y sont consignés.

Tableau XXVI : feuille de route de ma mise en place de l'activité de dosage au sein de l'UPCC

Mise en place			
<i>Appropriation de la technique</i>	à faire	en cours	Fait
Recueil d'expériences			Janv-09
Communication interne au secteur			Janv-09
Cahier de paillasse			Nov-fev 09
Diaporama de formation			Fev-avril 09
Evaluation du diaporama de formation			Juil-09
<i>Gammes étalons</i>	à faire	en cours	Fait
Liste matériel paillasse, verrerie <i>Micropipettes, portoir, vial, tubes hémolyse, fiole jaugée, entonnoir</i>			Nov-08
Validation des micropipettes			Janv-09
Liste matériel pour le Multispec® <i>Lampe uv, bidon vidange, vials + bouchons stérilisés</i>			Janv-09
Organisation du circuit pour la stérilisation des vials et bouchons			Janv-09
Rédaction de modes opératoires de préparation d'une gamme étalon			Dec-09
<i>Interprétation des résultats</i>	à faire	en cours	Fait
----- - volumes corrigés -----			
Suremplissage des poches macoperf : pesée différentielle plein/vide (destructrice)			Mai-09
Demande d'information sur le suremplissage des poches freeflex/lot (fresenus)			Août-09
Demande d'information sur le suremplissage des poches macoperf/lot (chunancy)			Août-09
Evaluation du volume des tubulures référencées a l'UPCC			Août-09
----- - calculs des concentrations théoriques, réelles, interprétation -----			
Réalisation d'une feuille de calcul excel.version 1 : validation des concentrations			Juin-09

développement

Développement des molécules	à faire	en cours	fait
Gamme médicament en solution (cisplatine)			mai-09
Poches tests médicament en solution (cisplatine)			mai-09
Contrôle des poches des patients (<i>à postériori</i>), avec maintien des contrôles Cisplatine		x	juin-09
Carboplatine / oxaliplatine / 5-fluorouracil (5fu)			juil-09
Doxorubicine / paclitaxel / gemcitabine / trastuzumab			août-09
Rituximab / etoposide / docetaxel / cytarabine			sept-09
Communication interne au secteur			juil-09
Gamme médicament en poudre à reconstituer (gemcitabine)			juil-09
Tests reconstitutions de médicament en poudre à reconstituer (gemcitabine)			août-09
Communication interne au secteur			sept-09
Gamme de médicament restant à valider	x		
Montée en charge	à faire	en cours	fait
Alternance de « campagne » de dosage jusqu'à 80% de la production		x	
Contrôle des poches des patients (<i>à postériori</i>) par campagne, et maintien des contrôles		x	
Communication interne au secteur		x	
Période test : 80% de la production en temps réel + maintien des contrôles	fin 2009-début 2010		
Communication interne au secteur	x		
Modification circuit de préparation	x		
Passage en routine, allègement des contrôles	x		
Interprétation des résultats	à faire	en cours	fait
Feuille de calcul excel.version 1 : validation des concentrations			juin-09
Feuille de calcul excel.version 2 : validation de l'identification + concentrations <i>Avec saisie des infos / fiche fab, imports manuels des résultats Multispec</i>			juil-09
Feuille de calcul excel.version 3 : automatisée au maximum <i>Avec macros d'imports chimio et Multispec</i>		x	
Demande d'imports supplémentaires et modifiés à Computer Engineering		x	
Coopération pour implantation des macros		x	
Rattachement au réseau du poste informatique relié à l'appareil			août-09
Rattachement au réseau électrique secouru de l'ordinateur et de l'appareil			août-09
Mettre en place l'organisation de l'évaluation du suremplissage en routine			
Mesurer le poids d'une poche vide (pour chaque référence)	x		
Pesée différentielle non destructrice des nouveaux lots de poches entrant	x		

Modification de l'organisation du secteur

Gestion du stock	à faire	en cours	fait
Standardisation des références de poches utilisées : choix de celles à supprimer, à conserver, à ajouter	x		
Standardisation des références de tubulures : (supprimer, conserver, ajouter)	x		
Modification des modalités de commandes des poches		x	
Organisation du stockage avant pesée différentielle du lot	x		
Organisation du stockage avec le depositaire de proximité (spécifique CHR)	x		

Fiches de fabrications	à faire	en cours	fait
Correction des fiches de fabrication avec les nouvelles références de poches, et de tubulures	x		
Correction des fiches de fabrication intégrant les changements de solvant de perfusion (expl NaCl 0,9% au lieu de G5% pour le cyclophosphamide)	x		
Circuit de la préparation	à faire	en cours	fait
Zone de quarantaine	à définir		
Emplacement de l'appareil pour le contrôle analytique en routine	à redéfinir pour le passage en routine		
Circuit des dossiers patients			
Circuit des échantillons, rôle de chacun à chaque étape			
Assurance qualité			

Formation au contrôle analytique	à faire	en cours	fait
Diaporama de formation (version2)			août-09
Questionnaire de test des connaissances			août-09
Cas pratiques, exercices	à enrichir		
Procédures liées au contrôle analytique			
Organisation du nouveau circuit de la préparation	à définir		
Dispensation des poches après validation analytique	à définir		
Contrôles qualité journalier, hebdo, mensuel du Multispec®		x	
Formation initiale, validation des acquis, formation continue, évaluation		x	
Modes opératoires du contrôle analytique	à faire	en cours	fait
Préparation d'une gamme étalon	x		
Validation d'une gamme étalon	x		
Mesure du suremplissage des poches référencées			mai-09
<i>Pesée différentielle plein/vide (technique destructrice)</i>			
Mesure du suremplissage des poches référencées (technique non destructive)	x		
Mesure du volume d'une tubulure	x		
Utilisation du Multispec® Analyse en routine		diaporama	
Utilisation du module de validation.xls	x		
Export-imports de données vers les macros du module de validation.xls	x		
Réalisation d'un prélèvement d'échantillon			mai-09
Validation des résultats journaliers d'assurance qualité		x	
Export, interprétation et suivi des résultats journaliers d'assurance qualité		x	
Bilan de l'activité de contrôle des préparations		x	
Fiches d'enregistrement	à faire	en cours	fait
Feuille de calcul Excel® pour la validation d'une gamme			juil-09
Fiche de validation de gamme		x	
Compte rendu journalier d'analyse			juil-09
Fiche de suivi mensuel de l'activité de contrôle			août-09
Fiche de suivi annuel de l'activité de contrôle			août-09
Fiche de suivi des résultats journaliers d'assurance qualité			mai-09

Nous avons relevé le temps que demandent les étapes liées à l'activité de dosage, au stade actuel de notre travail (Tableau XXVII). Nous n'avons pas pris en compte les temps qu'induisent l'étape de prélèvement d'échantillon, la préparation de matériel supplémentaire pour le contrôle, le tri des échantillons à la sortie de l'isolateur en attendant leur dosage.

Nous avons séparé les différents temps en deux parties : ceux liés à l'activité de développement et ceux liés à l'activité de routine.

Tableau XXVII : relevé des durées des différentes étapes de l'activité de dosage

<i>Activité de développement</i>	Temps (minutes)
Rédaction d'un protocole de gamme	
• Compilation des données Chimio® et Multispec®	15 min
• Rédaction et calculs	15 min
Réalisation d'1 gamme étalon	
• Préparation du matériel	8 min
• Solution mère à partir d'un lyophilisat	20 min
• 7 à 8 points x3	30 min
Acquisition des spectres	
• Démarrage du système	10 min
• 28 à 32 spectres	1min30/ ech
Multispec® quantification&librairie	
• étalonnage	12 min
• librairie	5 min
• remplacement et test de la méthode	5 min
Validation gamme	
• Répétition x 10 (x3)	10 min (x3)
• Acquisition des spectres	15 min (x3)
• Calculs mathématiques	10 min
Contrôle AQ	3 min
Rinçage	4 min
Sauvegarde	5 min
Total	4h20min
<i>Activité de routine (pour 10 échantillons)</i>	Temps (minutes)
Démarrage du système	4 min
Contrôles AQ journaliers	
• Test banc optique, puis interprétation	10 min
• Echantillon AQ	5 min
Tri des vials et saisie de l'échantillon à analyser (pour 10)	5 min
Acquisition du spectre (pour 10)	15 min
Interprétation du résultat (pour 10)	7 min
Rinçage	4 min
Sauvegarde	5 min
Total journalier (pour 10)	50 min
Contrôles AQ hebdo	
• Liquide triton, nettoyage de l'aiguille et du portoir	10 min
• Suivi de l'activité	5 min
Contrôles AQ mensuel	
• Test traçage et répétabilité	30 min
• Suivi de l'activité	30 min
• Préparation d'échantillons AQ	30 min
Total mensuel	2h15min

Discussion

Choix de la création d'une méthode UPCC dans le Multispec®.

✓ Nous avons fait l'acquisition d'un appareil de dosage Multispec® de Microdom livré « clé en main ». En effet, il est fourni avec une base de travail suffisamment riche (librairie et étalonnages correspondants) pour pouvoir démarrer d'emblée l'activité de contrôle terminal des préparations. De plus, il est possible de s'affranchir de la validation des performances de l'appareil en profitant de l'expérience des équipes qui les ont déjà testées [23]. Cela n'a pas été notre choix.

✓ Lors de notre recueil d'expériences, l'équipe d'Angers, qui a développé la base de données du Multispec® avec Microdom, avait insisté sur l'importance de créer sa propre base de données. L'argument majeur en faveur de cette option est de constituer une base adaptée à son activité : avoir dans sa bibliothèque les spectres correspondant à ses références de médicaments. En effet, les spécialités génériques varient d'un établissement à l'autre, et ne correspondent pas exactement aux données fournies dans la base de molécules de Microdom. De plus, cela permet d'avoir des domaines de linéarité calqués sur les préparations que nous réalisons. Par exemple, nous avons eu besoin d'étendre le domaine de linéarité de la cytarabine à des concentrations plus basses pour couvrir toutes nos préparations.

Nous avons donc suivi ces conseils et décidé de créer et valider notre base de molécules. Avec une année de recul, nous pouvons ajouter un argument supplémentaire à ce choix. Le fait de développer notre propre méthode nous a permis de prendre totalement possession de la technique et du logiciel. Ceci est un atout supplémentaire lors de l'interprétation de résultats erronés de dosage. Cette connaissance du système permet de savoir identifier les causes probables, d'en écarter certaines autres, ou de connaître quelles sont les vérifications ou les tests rapides à réaliser pour confirmer nos hypothèses.

Nous avons donc réalisé et validé notre librairie et nos étalonnages (méthode BS.MDB). La validation des étalonnages sur les premières molécules donnent des résultats équivalents aux autres équipes (répétabilité, reproductibilité) [11] [22-23].

Bilan d'avancement de notre feuille de route.

Le bilan que nous dressons, un an après l'acquisition de l'appareil, est le suivant : notre feuille de route a bien évolué. La technique est mise en place, le développement est bien avancé et se poursuit. Une étape de modification de l'organisation du secteur s'est

imposée au fur et à mesure du développement et de la montée en charge des dosages, qui ont fait émerger de nombreux questionnements. Concernant les documents du manuel d'assurance qualité, les fiches d'enregistrement ont été rédigées, il nous reste la plupart des modes opératoires à rédiger, et la totalité des procédures qui dépendent des décisions qui seront prises et de leurs impacts sur le processus de fabrication. La formation liée à cette nouvelle activité est validée.

✓ La phase de mise en place est terminée.

En effet, la technique analytique est bien maîtrisée par l'interne en charge de cette activité. Parallèlement, des questions d'organisation ont été soulevées dès cette étape.

❶ La compréhension et la maîtrise du système Multispec® a représenté une partie importante dans le travail de mise en place de cette nouvelle activité de contrôle analytique. La rédaction du diaporama de formation a nécessité environ 80 heures de travail réparties entre les 2 versions.

- La première version du diaporama a été l'occasion de formuler toutes les difficultés et de faire le point sur les questions soulevées lors de l'appropriation du système afin d'y répondre de façon la plus pédagogique possible. Ce premier travail a été réalisé à une période où l'activité du secteur de préparation ne permettait pas la libération de temps pharmacien pour la réalisation de gammes d'étalonnage.

- Parallèlement, le but du diaporama était de permettre aux pharmaciens de se former plus rapidement et avec moins de difficultés. Comme l'a montré notre évaluation des connaissances, la formation Microdom (présentation initiale sur site et manuels utilisateurs) s'avère efficace pour l'activité de routine mais insuffisante pour l'activité de développement. Or, cette activité de développement doit être maîtrisée y compris par les analystes de routine, car en cas de résultats erronés, il faut pouvoir rechercher les causes de dysfonctionnement et apporter les corrections adéquates.

- L'évaluation de la formation des deux pharmaciens du secteur a montré que le diaporama constituait un bénéfice certain (amélioration des réponses entre le premier et le deuxième test). La première version du diaporama manquait de clarté sur certains points : la lisibilité ainsi que la navigation ont été pointées comme devant être améliorées. Cependant, la deuxième version du diaporama a demandé un investissement supplémentaire, car il a été nécessaire de modifier complètement son architecture pour l'éclater en 6 modules (blocs) distincts. L'utilisation de ces 6 diaporamas, reliés par des liens hypertextes à un bloc d'accueil permet de répartir la taille globale du document (riche en images) sans en altérer la lisibilité. De plus, cette formule permet d'apporter des modifications et des ajouts avec une répercussion minimale sur les liens hypertextes entre les blocs de formation et le bloc d'accueil.

L'utilisation du format diaporama (Power Point®, Microsoft), permet d'expliquer des notions complexes à l'aide de schémas, de phrases courtes et synthétiques. Les animations permettent d'orienter la lecture des schémas complexes et imbriqués. Cela nous a facilité tant la rédaction de ce document de formation que l'acquisition des connaissances.

② Lors du démarrage des dosages des premières poches de perfusions, il nous est rapidement apparu qu'une autre partie importante du travail était l'interprétation des résultats.

Celle-ci nécessite en effet d'intégrer pour ces préparations prêtes à l'emploi (dispensées purgées avec du solvant) à la fois le volume de purge des perfuseurs et le volume de suremplissage des poches. Ceci est indispensable pour obtenir la valeur de la concentration théorique qui nécessite de calculer le volume corrigé.

La contrainte majeure réside dans le volume de suremplissage des poches car celui-ci varie selon les références de poches, d'un fabricant à l'autre et d'un lot de fabrication à l'autre. Cette contrainte a deux impacts : le premier est la difficulté d'intégrer dans le calcul du volume corrigé, toutes ces informations, en temps réel et maintenues à jour; le deuxième impact est donc la nécessité de diminuer au maximum cette quantité d'information en modifiant l'organisation de nos commandes de poches.

- Nous avons créé un outil de travail nécessaire à l'interprétation simple et rapide des résultats de dosage : le classeur de validation sur Excel®, que nous devrions pouvoir rendre totalement automatisé et alimenté en temps réel grâce à des macros d'imports depuis Chimio® et Multispec®. Les seuls imports qui resteront manuels sont les volumes de suremplissage des lots de poches en cours d'utilisation.

Nous nous sommes inspirés du Cytotest [3], base de données réalisée par Mr J.Vigneron (CHU Nancy). Elle permet de créer des formules de préparations (médicament, solvant, type de poche, type de perfuseur) qui sont ensuite renseignées avec le volume de poches, selon le lot sélectionné, puis utilisées pour le calcul du volume corrigé et de la concentration théorique. Cependant, il faut saisir manuellement les informations concernant le patient et la valeur de la concentration obtenue par analyse.

Nous avons voulu exploiter la possibilité d'extraire les résultats d'analyse du Multispec® et des requêtes spécifiques depuis Chimio® (sous format texte.txt ou excel.xls). Ceci réduit la saisie manuelle d'informations, donc le temps nécessaire à l'interprétation des résultats et le risque d'erreur de retranscription.

- Le volume de suremplissage est donc la seule donnée que nous ne pouvons pas automatiser dans notre classeur de validation dans Excel®. Or, le nombre de références différentes utilisées (de poches, tubulures) la fréquence de changement de numéro de lot

selon les différentes livraisons, la cohabitation dans le stock de plusieurs numéros de lots différents pour une même référence, amène à devoir gérer un nombre important d'informations pour le calcul de la concentration théorique en fonction du volume corrigé. Cette contrainte a des conséquences importantes sur l'organisation de l'activité. En effet, il faut évaluer le volume de suremplissage de chaque lot entrant en stock.

Aussi, une réflexion a été menée autour de cette problématique. Plusieurs solutions sont envisageables. L'objectif est de sélectionner celle qui sera la plus simple et qui nécessitera le minimum de temps de mise à jour des données à intégrer dans le calcul.

Une possibilité est de réduire le nombre de références de poches et par exemple de faire un choix parmi les références utilisées au CHR METZ-THIONVILLE entre les poches montées en PVC (de type Macoperf®), les poches trocardables sans PVC (type Freeflex®). La préparation est plus facile et plus rapide avec les poches montées (moins de manipulations lors de la cueillette et de la préparation). Actuellement, cette référence est en rupture de stock provisoire, ce qui nous pousse à rechercher d'autres références de poches voire d'autres types de dispositifs médicaux permettant de faciliter les manipulations et de réduire l'impact du volume de remplissage [34].

Dans cette attente, l'autre possibilité envisagée est de passer des commandes de quantités importantes afin de limiter le nombre de lots différents livrés voire même d'obtenir un seul lot. Cette option sous-entend l'accord d'une immobilisation de stock à un coût donné. La particularité du CHR METZ-THIONVILLE, est de recourir pour les solutés massifs à un prestataire de proximité [35] qui rend cette option envisageable.

Enfin la dernière option envisagée était de se procurer les renseignements de suremplissage directement auprès des laboratoires fournisseurs. Pour la période de test, nous avons obtenu des laboratoires Fresenius® les certificats d'analyse des lots de poches commandées. Nous avons alors constaté que cette information ne figure pas sur les certificats des lots fabriqués hors de France. Par ailleurs dans un souci de mutualisation des informations, nous avons sollicité notre collègue du CHU de Nancy, confronté à la même problématique, afin d'obtenir les données concernant les lots communs. Pour les autres, notre collègue nous a fourni l'historique des mesures du suremplissage de toutes leurs références. Cela nous a permis de calculer une moyenne de suremplissage à partir de 10 lots différents, pour chaque type de poches : poches PVC et sans PVC, poches de chlorure de sodium 0,9% et de glucose 5%, poches de capacités de 100ml, 250ml, 500ml et 1000ml. Cette moyenne nous semblait être une donnée suffisante au regard des objectifs de notre première phase d'essais.

Par contre, pour le passage à l'activité en routine, nous prévoyons de peser 10 poches vides de chaque type de poches, dans la mesure où nous avons montré que le poids d'une poche vide était reproductible. Puis le volume de suremplissage de chaque nouveau lot sera mesuré par pesée différentielle sur 30 poches. Cette procédure nous permet d'être non destructif, rapide, et indépendant des réponses des laboratoires.

✓ La phase de développement est bien avancée.

❶ Sur le plan du développement analytique, les 12 molécules validées actuellement nous permettraient de doser 72% de la production des poches de perfusion. Une dizaine de molécules utilisées régulièrement telles que l'ifosfamide, la fludarabine, le bévacizumab restent à valider. Pour les autres molécules (exemple temsirolimus) plus épisodiquement préparées nous utiliserons directement les données présentes dans la base Multispec®. Le rapport entre le temps et le coût nécessaire à la réalisation de nouveaux étalonnages et le nombre prévisible de dosages réalisés en routine n'est pas en faveur du développement de ces molécules.

- Les résultats des 200 dosages effectués de juin à août sont plutôt encourageants. En effet, excepté les résultats non-conformes attribués à l'occlusion de la cellule infrarouge (13), nous avons relevé deux résultats trop concentrés, soit 1% de non-conformité (écart > 15%). Ces chiffres sont cependant à nuancer, car pendant cette phase de tests, la concentration théorique était calculée à partir d'un volume corrigé extrapolé. En effet, le volume de suremplissage utilisé était issu d'une moyenne calculée sur 10 lots différents de la même référence. Or en routine nous avons prévu de calculer le volume corrigé précis à partir du suremplissage mesuré du lot de poche utilisé pour la préparation de la perfusion.

De plus, durant ces premiers mois de tests, les préparateurs ont pu être beaucoup plus concentrés sur leurs pratiques, sachant que les préparations seraient dosées. Avec l'augmentation du nombre de prélèvements quotidiens, les manipulateurs vont de plus en plus être habitués, et vont peut être progressivement porté une moindre attention à ces nouveaux gestes.

Les résultats des mois à venir seront peut être un peu moins bons dans un premier temps mais reflèteront davantage la réalité de la préparation. Ils seront alors, comme pour d'autres équipes, à l'origine d'une réévaluation de nos pratiques.

❷ Sur le plan organisationnel, cette phase de test et de montée en charge nous a permis d'envisager l'impact de l'implantation du contrôle analytique sur l'ensemble de l'activité du secteur UPCC.

- Une fois ces premières orientations validées (standardisation des références de poches et de tubulures, modification des fiches de fabrication dans Chimio®) nous pourrons réévaluer l'impact résiduel du contrôle analytique sur le processus de préparation, et notamment quant à l'augmentation du délai de mise à disposition des préparations. Ceci guidera notre choix d'organisation sur la place définitive du Multispec® dans notre processus de fabrication, et sur les modifications du circuit de la préparation à mettre en place en conséquence.

✓ Des modifications de l'organisation du secteur UPCC sont à prévoir

- Ces trois mois de période test ont été riches de discussions et d'enseignements quant à l'impact de l'activité de contrôle terminal des perfusions sur leur délai de mise à disposition et sur l'ensemble du processus de fabrication.

Les modalités de prélèvements tels qu'elles étaient prévues au départ engendrent trop de manipulations et sont trop longues comparativement au temps de préparation. Afin d'éviter la dispersion des corps et des bouchons des vials sous l'isolateur, ceux-ci sont vissés jusqu'à leur utilisation ce qui génère une étape supplémentaire lors de l'injection de l'échantillon dans le vial. Ensuite, celui-ci est identifié à l'aide d'une pastille puis conditionné en sachet zippé étiqueté. L'étiquette porte les informations nécessaires à l'interprétation des résultats de l'analyse. Ceci a permis de ne pas modifier le circuit des dossiers patients jusqu'à présent.

Pour faciliter et raccourcir l'étape de prélèvement, nous avons envisagé plusieurs solutions :

- tout d'abord, d'utiliser des poches avec site de prélèvement sans aiguille afin de supprimer le recours à une nouvelle aiguille.
 - Ensuite, d'introduire un portoir à vials stérilisable pour y positionner les vials les rendant ainsi plus facile à prendre.
 - Enfin, d'introduire des boîtes stérilisables permettant un meilleur rangement des corps et des bouchons des vials après l'ouverture du sachet de stérilisation sous l'isolateur. Nous pourrions alors supprimer les étapes intermédiaires inutiles de vissage/dévisage.
- A terme, une fois le circuit de mise en quarantaine défini, le conditionnement/étiquetage du vial dans un sachet zippé individuel pourra être supprimé.

Lorsque nous avons évoqué la standardisation des références de poches, nous avons émis l'hypothèse de recourir à d'autres dispositifs médicaux permettant le rinçage de la tubulure en fin de perfusion. Ceci permet d'administrer la totalité de la dose au patient, et diminue le risque d'exposition du personnel infirmier aux cytotoxiques. Certains de ces dispositifs permettent de livrer une poche purgée de son solvant de perfusion sans retirer ce volume de la poche destinée à contenir le médicament. Ceci permettrait de simplifier le calcul du volume corrigé puisque le volume de purge n'interviendrait plus. Mais il faut également prendre en compte, dans le choix d'un nouveau dispositif, les conséquences sur les manipulations demandées aux infirmières pour la pose de la perfusion. Il est important de ne pas réduire la qualité globale du service rendu aux unités de soins.

Quelles que soient les modifications qui pourront être apportées, notre objectif principal est de ne pas augmenter le délai de mise à disposition des préparations. Il faut donc privilégier les modifications qui permettent de compenser le temps de prélèvement et

d'analyse, mais sans diminuer la qualité de la préparation ou du service rendu aux unités de soins.

D'autres pistes d'organisation devront être explorées tant sur le plan de la préparation proprement dite que sur le type de contrôles réalisés.

Conclusion

La mise en place d'une technique analytique de contrôle des préparations demande un investissement important tant d'un point de vue matériel qu'humain. Son passage en routine demande de mobiliser, pour une production moyenne de 60 préparations, environ trois heures de contrôle analytique. Au sein d'un établissement ne disposant pas de laboratoire de contrôle analytique, cette activité repose directement sur l'équipe pharmaceutique. Celle-ci est composée de pharmaciens assistants ou d'internes destinés à être remplacés régulièrement compte tenu de leur formation ou de leur évolution de carrière. Le module de formation créé particulièrement à l'attention de pharmaciens débutants en contrôle analytique s'avère donc être un outil précieux.

Nous avons pu remarquer l'importance de notre feuille de route, qui nous a permis de tenir des délais fixés et d'avancer régulièrement. Tout au long de la mise en place et du développement, chaque nouvelle étape accomplie engendre de nouveaux questionnements et des prises de décisions qui ont un impact sur l'organisation du secteur UPCC. Les périodes de test successives nous ont permis d'avancer pas à pas sans surcharger le travail de routine. Cela nous a également permis d'habituer l'équipe de préparateurs à l'idée d'un nouveau mode de fonctionnement, de les préparer progressivement à la montée en charge de cette activité et de les concerter régulièrement au fur et à mesure des difficultés rencontrées (technique et temps de prélèvement). Nous n'avons pas encore observé de difficultés spécifiquement liées à la technique de préparation et les résultats des dosages des périodes tests confirment, plus qu'ils ne remettent en cause, la qualité de nos pratiques. Néanmoins, le développement est encore en cours, et a commencé avec des molécules simples.

La validation des étalonnages est maintenant parfaitement maîtrisée et la partie développement des molécules devrait largement s'intensifier. Par contre, il reste un travail important de réflexion sur l'évolution du circuit de la préparation, du circuit des dossiers, ainsi que sur l'organisation de l'analyse des échantillons et de la libération des préparations. Cette nouvelle organisation doit permettre l'amélioration de la qualité par le contrôle final des préparations, sans diminuer la qualité de toutes les autres activités déjà en place. Elle ne doit pas augmenter le délai de mise à disposition des perfusions pour les patients.

Compte tenu de ces prérequis, la mise en place du contrôle analytique en routine va dépendre des choix d'organisation qu'il sera possible de faire en collaboration avec nos équipes médicales et administratives.

Bibliographie

[1] Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Code de la Santé Publique. Article L. 5126-5. Rôle des pharmaciens de pharmacie intérieure.
www.legifrance.gouv.fr
Consulté le 05.10.09

[2] Agence Française de Sécurité Sanitaires et des Produits de Santé (AFSSAPS). Bonnes Pratiques de Préparations. (03.12.2007).
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/a5d6ae4b3d5fdee013ca463462b7b296.pdf
Consulté le 05.10.09

[3] P. Hild, F. Lagarce, P. Leynia de la Jarrige et J. Vigneron. Contrôle qualité des préparations d'anticancéreux. Atelier GERPAC Octobre 2008.

[4] Le Garlantézec et Al. Choix et mise en place d'un contrôle pondéral libérateur au sein d'une unité hospitalière centralisée de préparation des cytotoxiques. Pharm Hosp 2008, (43), 172, P 19-27)

[5] Le Garlantézec P. Contrôle pondéral pour la libération de préparations cytotoxiques : intérêt après 2 mois de mise en place. Communications. Cinquièmes journées Nationales SFPO. 2005

[6] F. Basuyau, P. Brunelle. Comparaison de deux mesures physiques rapides pour le contrôle de la dose des préparations injectables de médicaments anticancéreux avant administration : application au 5-fluorouracile. Journal de Pharmacie Clinique. Volume 19, Numéro 1, 5-9, Mars 2000.

[7] Computer Aided Therapy for Oncology. Cato®. Site internet
<http://www.cato.eu/fr/was-ist-cato.html>
Consulté le 05.10.09

[8] Caquelin JB., Heluin Y., Plivard C., Lecordier J. Création d'un outil informatique d'exploitation des pesées de préparations de cytostatiques. Communication Congrès Hopipharm. Mai 2009.

[9] S. Collin, M. Camus, M. Alboussiere, F. Brion. Contrôle d'uniformité de teneur des préparations injectables de cytarabine. Pharm Hosp. 2008, vol. 43, n°172, pp29-34

[10] S. Watt, D. Antier, V. Jacques, J. Grassin. Validation et mise en place d'un nouveau programme de contrôle-qualité des cytotoxiques reconstitués en unité centralisée. Journal de Pharmacie Clinique. Volume 21, Numéro 3, 179-82, Septembre 2002

[11] Harvard L., Bonan B., Huen J.M., Roche Y., Prognon P. Le contrôle de qualité en unité centralisée de reconstitution des cytotoxiques : mythe ou réalité ? STP Pharma Pratiques 2005 ; 15 : 148-160

[12] Chaumais MC, Louvet C., Mequinion C., Baptiste M., Behroune M., Bonan B., Prognon P., Havard L. Identification et dosage des alcaloïdes de la pervenche par chromatographie haute performance liquide rapide. Communication Congrès Hopipharm. Mai 2009.

[13] Paci A., Mercier L., Bourget P. Identification and quantitation of antineoplastic compounds in chemotherapeutic infusion bags by use of HPTLC : application to the vincalcaloids. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2003 ; 30 : 1603-1610

[14] Bourget P., Perello L., Demirdjian S. Place et spectre fonctionnel de l'HPTLC dans un programme d'assurance qualité pharmaceutique hospitalier. *Pathol biol* 2001 ; 49 : 86-95

[15] Gravel E., Bourget P., Mercier L., Paci A. Fluorescence detection combined with either HPLC or HTPLC for pharmaceutical quality control in a hospital chemotherapy production unit : application to camptothecin derivatives. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* 2005 ; 39 : 581-586

[16] Bouligand J., Paci A., Mercier L., Vassal G., Bourget P. High-performance thin-layer chromatography with a derivatization procedure, a suitable method for the identification and the quantification of busulfan in various pharmaceutical products. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* 2004 ; 34 : 525-530

[17] S. BLAIN. Analyse par injection en flux continu (FIA). Université d'Aix-Marseille II. Référence P1510. mars 2006
<http://www.techniques-ingenieur.fr/page/p1510v2niv10003/applications-a-l-analyse.html>
Consulté le 05.10.09

[18] Ripoché N., Baumgartner P., Audeval C., Rochard S. Feasibility study of extemporaneous control of cytotoxic preparations : tests with an innovating spectrometer coupling UV/visible and IR detections. *EJHP Practice*, vol 15, 28-31, 2009/1.

[19] Guermazi H., Vazquez R., Guerrault-Moro MN., Brossard D., Crauste-Manciet S. Utilisation d'un nouvel appareil de d'identification et de dosage, Multispec® Microdom, pour les contrôles qualités des préparations hospitalières. Communication Congrès Hopipharm. Mai 2009.

[20] Bazin C., Moreau E., Carvalho M., Astier A., Paul M. Optimisation de la gestuelle pour une meilleure homogénéité des poches de chimiothérapies : intérêt d'un traceur coloré comme le bleu de méthylène. Congrès su Syndicat National des praticiens hospitaliers et des praticiens hospitaliers universitaires. SNPHPU 2009.
<http://www.snphpu.com/posters.asp?PoNum=Po00000201>
Consulté le 05.10.09

[21] Bazin C., Avril J., Astier A., Paul M. Iatrogenie ou pharmacovigilance ? Le pharmacien arbitre. Congrès. 30èmes Journées d'Etude de Pharmacie Hospitalière - 11/2008
http://www.aphif.eu/13_Bazin_JE2008.pdf
Consulté le 05.10.09

[22] Leynia de la Jarrige P. Devys C. Centre Paul Papin. Angers. Outils analytiques et contrôle de qualité. Congrès Société Française de Pharmacie Oncologique SFPO 2008
<http://www.sfpo.com/cms/images/stories/congres-10oct2008/Leynia.swf>
Consulté le 05.10.09

[23] Lelièvre B., Devys C., Laurent M., Daouphars M., Basuyau F., Leynia de la Jarrige P. Mise en place d'un contrôle qualitatif et quantitatif en temps réel des préparations de chimiothérapies. Congrès Société Française de Pharmacie Oncologique SFPO 2007.
<http://www.holosmedia.com/img/LivreCongresSFPO2007Def3.pdf>
Consulté le 05.10.09

[24] M. Le moniteur de l'internat. Tome 1. Toxicologie Sciences Mathématiques, Physiques et chimiques. Ed : Wolters Kluwer. 2005

- [25] Richard Giasson. Cours de chimie de l'université de Montréal. Spectroscopie infrarouge.
<http://www.chimie.umontreal.ca/CHM1312/partie2.pdf>
Consulté le 05.10.09
- [26] Lafont R. Université Pierre et Marie Curie - UFR de Biologie. Méthodes physiques de séparation et d'analyse et méthodes de dosage des biomolécules C-Techniques spectroscopiques.
<http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/lafont/spectro/C1.html>
Consulté le 05.10.09
- [27] Méthodes Spectrophotométriques.
<http://www.educnet.education.fr/rnchimie/phys/spectro/cours/spectro.htm>
Consulté le 05.10.09
- [28] Renzullo C., Paillet C., Pivot C. Analyse comparative des méthodes analytiques de dosage des préparations d'anticancéreux en unité de reconstitution centralisée. Congrès Société Française de Pharmacie Oncologique SFPO 2007.
<http://www.holosmedia.com/img/LivreCongresSFPO2007Def3.pdf>
Consulté le 05.10.09
- [29] Roussel J.M. Existe-t-il un guide universel pour la validation des méthodes d'analyse ? STP Pharma Pratiques – vol 15 – N°4 – juil/août 2005.
- [30] Health Sciences Authority. Guidance notes on analytical method validation. GUIDE-MQA-012A-004. 2004
- [31] European Medicines Agency. ICH Q2 (R1) validation of analytical procedures: text and methodology. CPMP/ICH/381/95.1995
- [32] Société Microdom®. Multispec®. Edition de liste de Travail. Manuel de l'utilisateur. Révision 1.3. 06/2008.
- [33] Société Microdom®. Multispec®. Quantification et Librairie. Manuel de l'utilisateur. Révision 1.3. 06/2008
- [34] El-Kouari F., Roy S., Berhoune M., Desroches M-C., Bellanger A., Fernandez C., Farinotti R. Nouveaux dispositifs pour la protection du personnel: répercussions sur le contrôle de qualité. Congrès Société Française de Pharmacie Oncologique SFPO 2007.
<http://www.holosmedia.com/img/LivreCongresSFPO2007Def3.pdf>
Consulté le 05.10.09
- [35] Gustin B. Approvisionnement des PUI : Priorité à l'innovation. Journées pharmaceutiques SCHERING-PLOUGH. Nice, juin 2009.

Annexes

Annexe 1 : Questionnaire d'évaluation des connaissances du Multispec®

Questionnaire d'évaluation des connaissances du Multispec

Etape 1 : aptitude à l'utilisation en routine :

1- Expliquer le système fluide ?



2- Expliquer les fonctions principales de Multispec Analyse ?

3- Expliquer les fonctions principales de Multispec Quantification&Librairie ?

4- Quelles vérifications doit-on faire à l'allumage du Multispec Analyse ?

5- Quelles vérifications sont réalisées automatiquement par le Multispec Analyse ?

6- Expliquer le test de banc optique, intérêt ?

7- définir du point de vue du logiciel :

- méthode :

- librairie :

- étalonnage :

8- Expliquer le principe de mise en œuvre de la méthode :

Décrire les étapes effectuées par le logiciel lors d'une analyse d'un échantillon


9- expliquer les éléments du logiciel Multispec Analyse qui permettent le fonctionnement de la méthode.

10- expliquer quels sont les points d'attention particulière (risque de dysfonctionnement de la méthode) ? pourquoi ?


11- définir, décrire ces principaux dossiers, ce que l'on y trouve comme fichiers, leur fonction :

- Analyse :
- Comparaison spectres :
- Étalonnage :
- Gammes Spectrales :
- Librairie :
- Méthodes :
- Régions spectrales :
- Spectres recherche :
- tests :

12- Expliquer l'écran suivant

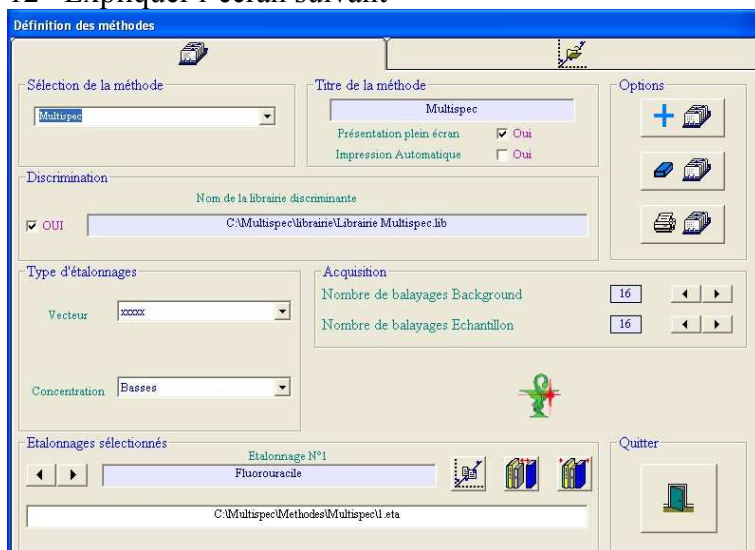


13- Expliquer l'écran suivant

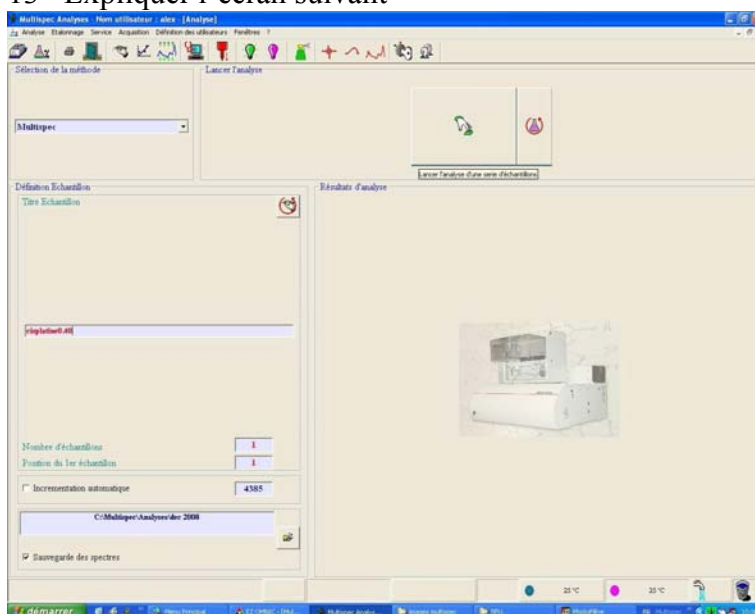

14- Expliquer l'écran suivant

15- Que signifie le code couleur vert ? quel est le risque de confusion ?

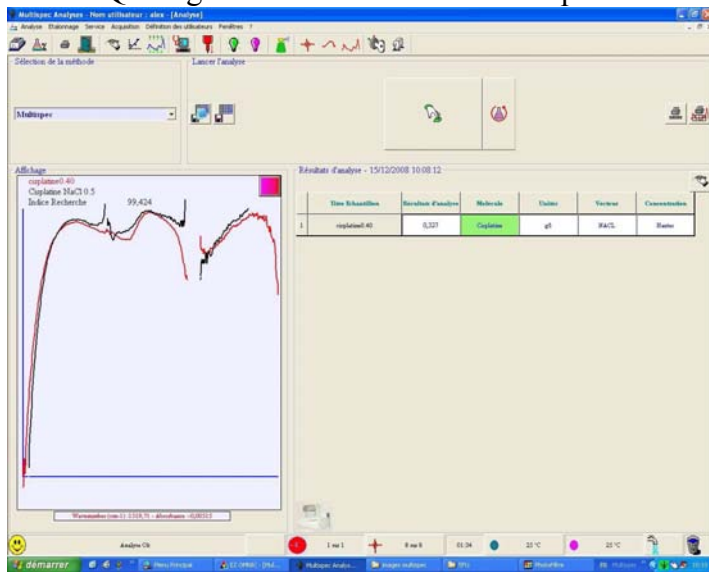

16- Dans quel dossier vont les spectres acquis dans par le Multispec Analyse ?

Etape 2 : aptitude à l'utilisation en développement

17- définir :

- bibliothèque et librairie (lien et différences, fonction)
- gamme spectrale et étalonnage (lien et différences, fonction)
- différence entre gamme spectrale en recherche et gamme spectrale en quantification
- différence de contenu et d'organisation entre les dossiers « gammes spectrales » et « spectres recherches »

18- définir le terme « discrimination » dans MA « méthode » ? quel est son rôle ?

Quel impact selon que la case st cochée ou non ?

19- dans quels dossiers trouve-t-on des spectres ?

Adobe	Dossier de fichiers	02/09/201
Analyses	Dossier de fichiers	12/05/201
Avantes	Dossier de fichiers	12/05/201
Backup	Dossier de fichiers	04/09/201
COMPARAISON SPECTRES	Dossier de fichiers	18/05/201
Definitions Identites	Dossier de fichiers	12/02/201
Demo	Dossier de fichiers	18/05/201
Documentation Multispec	Dossier de fichiers	13/05/201
Erreur	Dossier de fichiers	13/05/201
Etalonnages	Dossier de fichiers	18/05/201
ETALONNAGES BS	Dossier de fichiers	05/03/201
FORMATION	Dossier de fichiers	18/05/201
Gammes Spectrales	Dossier de fichiers	12/05/201
GAMMES SPECTRALES BS	Dossier de fichiers	05/03/201
Gilson 234	Dossier de fichiers	12/05/201
Librairie	Dossier de fichiers	18/05/201
LIBRAIRIE BS	Dossier de fichiers	18/05/201
Liste de travail	Dossier de fichiers	05/05/201
log	Dossier de fichiers	18/05/201
Methodes	Dossier de fichiers	18/05/201
Regions Spectrales	Dossier de fichiers	18/05/201
Result	Dossier de fichiers	18/05/201
Sons	Dossier de fichiers	12/05/201
Spectres Recherche	Dossier de fichiers	18/05/201
SPECTRES RECHERCHES BS	Dossier de fichiers	18/05/201
Tests	Dossier de fichiers	18/05/201
Tmp	Dossier de fichiers	15/05/201
Validation	Dossier de fichiers	12/05/201
A55216.all	331 Ko Extension de l'appli...	15/03/201

20- comment visualiser ? (placer la lettre correspondante sous l'icone)


-a- un spectre ? comparer plusieurs spectres ?

-b- un étalonnage ?

-c- une librairie ?

-d- une gamme spectrale ?

-e- que signifie « e » ? Intérêt ?

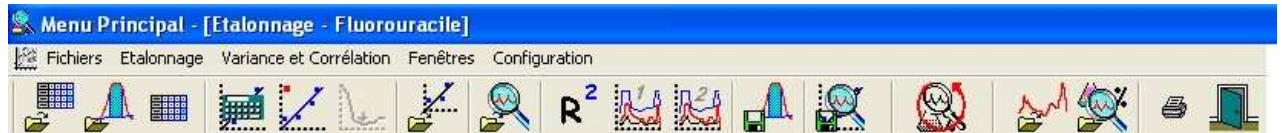

-e-

21- création d'un étalonnage en quantification. Où va-t-on chercher les spectres ?

22- création d'une librairie. Où va-t-on chercher les spectres ?

23- création d'une méthode. En résumé, quelles sont les 3 étapes à suivre ?

24- Y a-t-il un ordre à respecter dans ces 3 étapes ? pourquoi ?

25- Quelles sont les 3 conditions nécessaires au fonctionnement de la méthode dans Multispec Quantification & Librairie (à propos des spectres) ?

26- Expliquer les grandes étapes de la création d'un étalonnage en quantification

27- Expliquer les grandes étapes de la création d'un étalonnage en recherche (librairie)

Annexes

Annexe 2 : Tableau récapitulatif de la validation des gammes d'étalonnages

VALIDATION DES GAMMES D'ETALONNAGES

étalonnage	Conc. Th	détection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
5FU basse NaCl et G5	1 mg/ml	320 nm	0,4 à 2	moyenne M écart-type*	0,986 mg/ml 0,016	0,010	99,02% 0,23	98,40% (%)	0,014mg/ml 1,40%
5FU haute G5	5 mg/ml	320 nm	2 à 12	moyenne M écart-type*	4,911 mg/ml 0,193	0,047	99,05% 0,58	96,07% (%)	0,146mg/ml 2,92%
5FU haute NaCl	5 mg/ml	320 nm	2 à 12	moyenne M écart-type*	4,802 mg/ml 0,106	0,061	98,72% 0,22	97,78% (%)	0,198mg/ml 3,96%
Carboplatine G5	2,5 mg/ml	230 nm	0,2 à 5	moyenne M écart-type*	2,533 mg/ml 0,086	0,020	99,20% 0,27	96,59% (%)	0,069mg/ml 2,76%
Oxaliplatine G5	1mg/ml	218 nm	0,1 à 2	moyenne M écart-type*	0,995 mg/ml 0,024	0,014	98,54% 1,02	97,56% (%)	0,005mg/ml 0,50%
Oxaliplatine NaCl	1mg/ml	218 nm	0,1 à 2	moyenne écart-type*	0,967 mg/ml 0,010	x	98,94% x	x	0,033mg/ml 3,30%
Cisplatine NaCl	0,2mg/ml	210 nm	0,05 à 0,4	moyenne M écart-type*	0,195 mg/ml 0,003	0,002	98,88% 0,717	98,26% (%)	0,005mg/ml 2,50%
Etoposide NaCl	0,3mg/ml	285nm	0,05 à 1	moyenne M écart-type*	0,300 mg/ml 0,001	0,002	99,47% 0,24	99,73% (%)	0,0004mg/ml 0,13%

VALIDATION DES GAMMES D'ETALONNAGES

étalonnage	Conc. Th	détection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Etoposide G5	0,3mg/ml	285nm	0,05 à 1	moyenne	0,303 mg/ml		99,61%	x	0,003mg/ml
				écart-type*	0,001	x	x	1,00%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Paclitaxel NaCl	0,5mg/ml	250nm	0,1 à 1	moyenne M	0,496 mg/ml	0,002	99,68%	97,56%	0,008mg/ml
				écart-type*	0,012		0,02	1,60%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	1 serie de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Paclitaxel G5	0,5mg/ml	250nm	0,1 à 1	moyenne	0,547 mg/ml		99,60%	x	0,047 mg/ml
				écart-type*	0,002		x	9,40%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Gemcitabine NaCl	5mg/ml	302nm	1 à 10	moyenne M	4,958 mg/ml	0,060	98,79%	99,85%	0,042mg/ml
				écart-type*	0,007		0,09	0,84%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Trastuzu mab NaCl	1,5mg/ml	220nm	0,3 à 3	moyenne M	1,517 mg/ml	0,010	99,31%	99,76%	0,017 mg/ml
				écart-type*	0,004		0,09	2,80%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Doxorubicine G5	1mg/ml	300nm	0,1 à 2	moyenne M	1,017 mg/ml	0,015	98,58%	98,58%	0,012mg/ml
				écart-type*	0,014		0,96	1,20%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	1 serie de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Doxorubicine NaCl	1mg/ml	300nm	0,1 à 2	moyenne	1,007 mg/ml		99,09%	x	0,012mg/ml
				écart-type*	0,009	x	x	1,20%	
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CVi)	justesse
Cyclophosphamide NaCl	4mg/ml	208nm	1 à 10	moyenne M	3,967 mg/ml	0,041	98,96%	99,57%	0,032mg/ml
				écart-type*	0,017		0,31	0,80%	

VALIDATION DES GAMMES D'ETALONNAGES

étalonnage	Conc. Th	détection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
Cyclophosphamide G5	6mg/ml	208nm	1 à 10	moyenne	6,079 mg/ml		99,22%	x	0,079mg/ml
				écart-type*	0,048	x	x		1,32%
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
Rituxi mab Nacl	1,3 mg/ml	235nm	0,5 à 4	moyenne M	1,321 mg/ml	0,008	99,37%	99,66%	0,010mg/ml
				écart-type*	0,004		0,13		0,77%
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
Vincristine Nacl	0,02mg/m	215nm	0,001 à 0,0	moyenne M	0,018 mg/ml	0,0004	98,00%	95,69%	0,0017 mg/ml
				écart-type*	0,001		1,20		8,50%
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	1 serie de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
Docetaxel G5	0,5mg/ml	233nm	0,1 à 1	moyenne	0,502 mg/ml		99,39%	x	0,002mg/ml
				écart-type*	0,003	x	x		0,40%
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
Cytarabine Haute G5	10mg/ml	298nm	2 à 17	moyenne M	9,930 mg/ml	0,094	99,06%	98,81%	0,070mg/ml
				écart-type*	0,118		0,48		0,70%
étalonnage	Conc. Th	detection	linéarité	3 séries de 10 ech	conc. calculée	Ecart-type*	répétabilité (CVr)	Reproductibilité (CV)	justesse
Cytarabine basse G5	1mg/ml	270nm	0,1 à 2	moyenne M	1,012 mg/ml	0,011	98,89%	98,89%	0,012mg/ml
				écart-type*	0,002		0,96		1,20%

écart-type* : EC de la concentration moyenne obtenue sur les 3 séries, dispersion de la moyenne

Ecart-type* : moyenne des 3 EC de chacune des 3 séries, moyenne des dispersions

CV : coefficient de variation (EC*100/moy)

justesse : capacité à se rapprocher le plus possible de la valeur cible : à ...mg/ml près

TITRE

Mise en place du contrôle terminal des préparations d'anticancéreux injectables par spectrométrie UV-visible-IRTF, Multispec® à l'Unité de Pharmacie Clinique et Cancérologique de l'Hôpital Bon Secours de Metz :
Aspects analytiques et organisationnels.

Thèse soutenue le vendredi 6 novembre 2009

Par Melle Alexandra CAMUT

RESUME :

Dans le cadre de sa politique d'assurance qualité, le secteur UPCC de la pharmacie de l'hôpital Bon Secours de Metz, a fait l'acquisition d'un spectromètre UV-visible-IRTF Multispec® de Microdom. La mise en place de l'activité de contrôle terminal des préparations a nécessité un long travail préparatoire : recueil d'expérience, bibliographie, rédaction d'une feuille de route pour le suivi de l'avancement des différentes étapes. Ces étapes sont : la mise en place, le développement analytique et la montée en charge des dosages, la modification du processus de préparation, la rédaction des documents d'assurance qualité correspondants.

Un important travail d'appropriation de la technique a été nécessaire à l'issue duquel nous avons ressenti le besoin de créer un diaporama de formation au Multispec® qui a été testé lors de la formation des pharmaciens. Celle-ci s'est déroulée de la façon suivante : formation initiale sur site, lecture du manuel Microdom® et réponse au test des connaissances, puis lecture du diaporama et nouvelle évaluation des connaissances. Un questionnaire de satisfaction du support a été proposé. L'analyse des résultats a montré une nette amélioration des réponses grâce au diaporama de formation, montrant l'intérêt et la pertinence de ce support. Des améliorations ont été apportées dans une nouvelle version qui a été validée pour créer un module d'apprentissage.

Sur le plan analytique, nous avons validé 12 molécules, ce qui permettrait le dosage de 72% des poches de perfusions préparées. Pour la montée en charge de l'activité nous avons procédé par phases successives de tests. Nous avons d'abord validé la technique de prélèvement de l'échantillon, puis réalisé des campagnes mensuelles de dosage *à posteriori* de 4 molécules. Nous avons créé une grille de calcul et d'interprétation des résultats d'analyse au regard de la prescription (Excel®).

Pour le moment, les résultats des 200 dosages réalisés en 3 mois ont tendance à confirmer nos pratiques. Il apparaît cependant de nouvelles contraintes à gérer. Par exemple, le volume de suremplissage des poches est une variable importante pour l'interprétation des résultats et il varie d'un lot à l'autre. Nous envisageons donc d'harmoniser et de réduire le nombre de poches référencées ainsi que le nombre de livraisons afin d'en diminuer l'impact.

Nous constatons une augmentation prévisible du délai de dispensation des préparations qui n'est pas envisageable. Aussi, nous devons envisager d'autres modifications de l'organisation afin de trouver un équilibre entre temps de préparation et temps de contrôle sans retarder la dispensation.

MOTS CLES :

Directeur de thèse	Intitulé du laboratoire	Nature
<u>Mme le Dr Véronique NOIREZ</u>	<u>Pharmacie de l'Hôpital Bon Secours de Metz. Secteur UPCC</u>	Expérimentale <input type="checkbox"/> Bibliographique <input type="checkbox"/> Thème 6

Thèmes

1 – Sciences fondamentales

3 – Médicament

5 – Biologie

2 – Hygiène/Environnement

4 – Alimentation – Nutrition

6 – Pratique professionnelle